

Additional Information for MammoDuo Model

Zusätzliche Informationen zum MammoDuo-Modell

**Informations supplémentaires pour le modèle
MammoDuo**

**Дополнительная информация о модели
MammoDuo**

MammoDuo 機型的其他信息

MammoDuo 機型的其他資訊

MammoDuo 仕様をお買い上げのお客様へ



MammoDuo机型的其他信息

本产品包括两台安装在专用底座上的RadiForce RX560显示器装置。本产品的某些操作方法与使用说明书中描述的有所不同。使用本产品前,请仔细阅读本文档及使用说明书,确保正确使用本产品。

预防措施

警告

请按照规定的正确方法搬运或放置本装置。

装置跌落可能会造成人身伤害或设备损坏。请务必遵守以下内容。

- 拆封和/或搬运显示器时,确保至少由两个人同时进行。
- 紧紧抓住显示器的底部和把手。



从底座拆下显示器装置时,务必由两个人同时进行。

仅从底座拆下其中一台显示器时,会使本产品极不稳定。若在不稳定状态下使用,可能会使本产品翻倒,造成人身伤害或设备损坏。

包装内容


本产品随附以下物品。请检查包装盒中是否包含所有物品。如有缺失,请与经销商或当地EIZO代表联系。

- 显示器
(显示器装置 x 2, 底座)
- 电源线 x 2
- 数字信号线: PP300 x 2
DisplayPort - DisplayPort
- 数字信号线: PP100 x 1
DisplayPort - DisplayPort
- 数字信号线: DD300DL x 2
DVI - DVI (双向链接)
- USB电缆: UU300 x 2
- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- 使用说明书
- MammoDuo 机型的其他信息
(本文档)


控制和功能

有关显示器装置的部件名称与功能,请参照使用说明书的“控制和功能”。

后视图

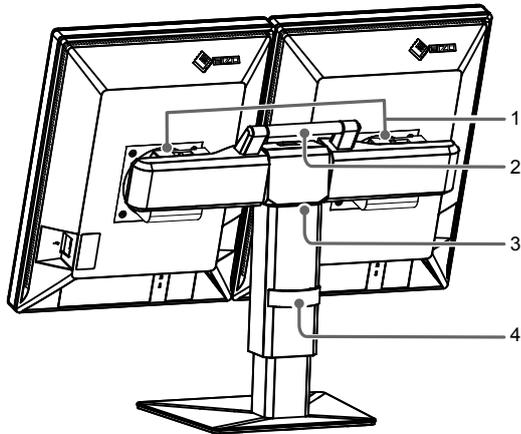

顶视图

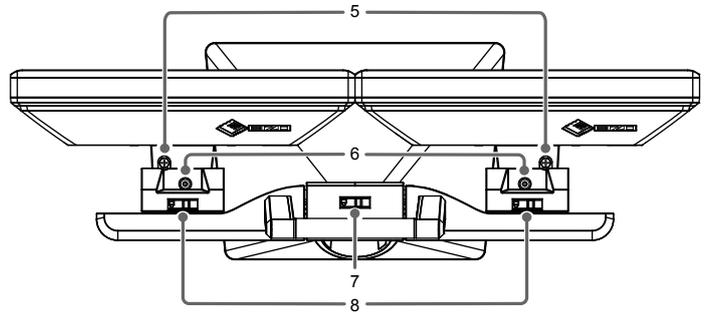

1. 固定装置	将显示器装置安装到底座。
2. 把手	此把手用于搬运。
3. 底座	底座用于： <ul style="list-style-type: none"> • 调节各显示器的位置和水平角度。 • 调节整台显示器的垂直/水平角度和高度。
4. 电缆固定器	固定显示器电缆。
5. 旋转螺钉	旋转此螺钉,可以顺时针或逆时针转动各显示器屏幕,调节显示器之间的空间大小。
6. 摆动锁紧螺钉	拧紧此螺钉,锁紧水平角度。
7. 倾斜锁	将显示器的垂直角度锁定于0°。 ▽: 锁定, ▽: 解除 注 <ul style="list-style-type: none"> • 出货前,角度锁定于0°。如要更改显示器倾斜角度,请解锁。 • 搬运本产品时,将显示器的垂直角度设为0°,然后启用倾斜锁。这有助于搬运本产品。
8. 固定锁	将固定装置锁定在底座上。 从底座拆下固定装置时,请解除固定锁。 ▽: 锁定, ▽: 解除

安装 / 连接

安装之前

请仔细阅读本文档的“预防措施”以及使用说明书的“预防措施”。

安装要求

安装本产品时,应确保显示器的四周、后部和顶部拥有足够空间。

注意

- 将显示器安置于适当位置,使其屏幕不会因任何光线而受到妨碍。

连接电缆

有关显示器兼容的分辨率,请参照使用说明书“兼容的分辨率”。

1. 连接信号线。


检查连接器形状后,再连接电缆。连接DVI电缆之后,拧紧紧固件以固定接头。

注意


- 务必使用本产品附带的电缆。
- 显示器的DisplayPort连接器由输入和输出连接器组成。显示器连接到一台PC时,将电缆连接到输入连接器。
- 若要设定菊链式连接,需要在管理员设定菜单中选择“信号格式”-“DisplayPort”,然后将“版本”设为“1.2”。有关详细信息,请参照安装手册(在CD-ROM上)。
- 有关可用于菊链式连接的显示器与显卡的更多信息,请访问EIZO网站:<http://www.eizoglobal.com>
- 使用菊链式连接之前,从输出信号的显示器输出连接器上取下盖子。

连接示例:

将各显示器连接到一台PC

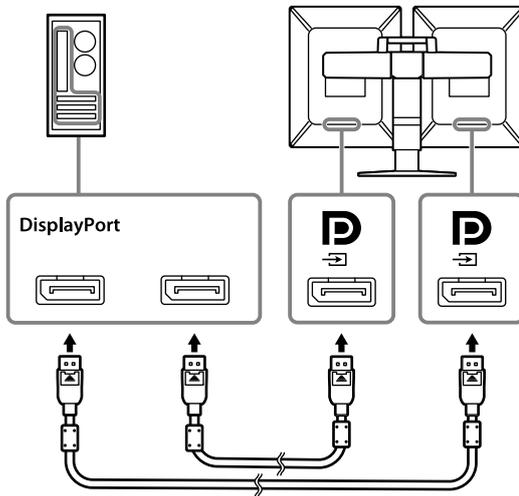


设定菊链式连接

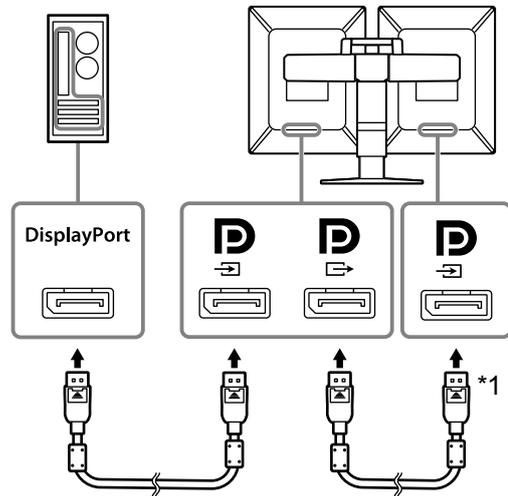

*1 使用附带的“PP100”。

2. 将电源线插头插入电源插座和显示器上的电源连接器。

3. 使用RadiCS / RadiCS LE时,请连接USB电缆。

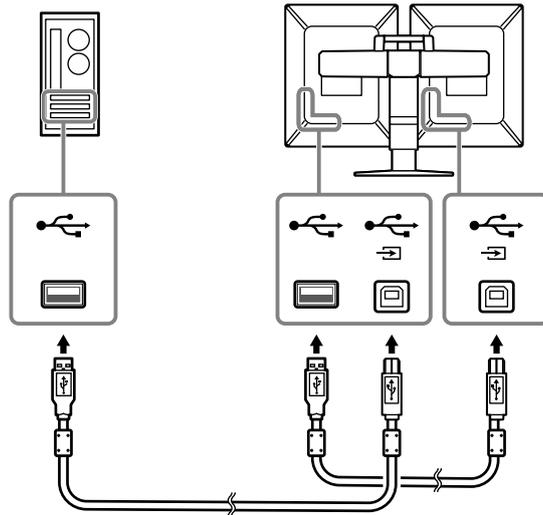

4. 触按显示器正面的 , 打开显示器电源。

显示器的电源开关指示灯会亮绿灯。

5. 打开PC的电源。

出现屏幕图像。

注


• 若显示器未正确运行,请参照使用说明书“不显示图像的问题”。

● 调节屏幕高度和角度


1. 用双手抓住各显示器的顶部和底部,调节位置和角度。

调节水平角度后,逆时针转动摆动锁紧螺钉,锁紧角度。

显示器之间的空间可通过转动旋转螺钉来消除。

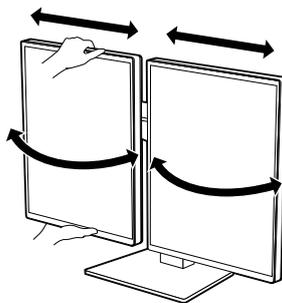


2. 按照下图所示, 抓住显示器, 调节屏幕高度和垂直角度。

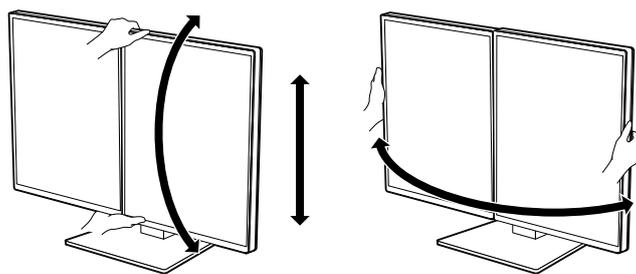

注意

- 出货前, 已启用倾斜锁。调节显示器的倾斜角度之前, 请务必解锁。

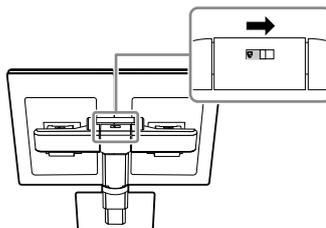


● 拆卸显示器

对于显示器上安装选购的RadiLight等情况,从底座上拆下显示器装置。

注意

- 仅从底座拆下其中一台显示器时,会使本产品极不稳定。若在不稳定状态下使用,可能会使本产品翻倒,造成人身伤害或设备损坏。务必由两个人同时进行。

1. 解除固定锁后,从底座上拆下显示器装置。

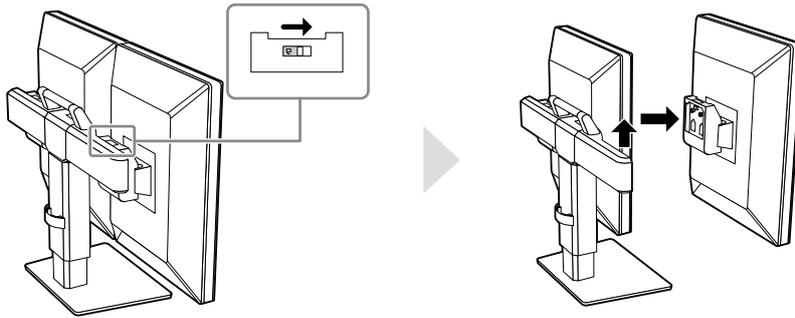


注

- 在显示器上安装RadiLight之前,从显示器拆下固定装置。
- 有关安装步骤,请参照RadiLight使用说明书。

● 安装显示器

1. 将显示器装置安装在底座上。

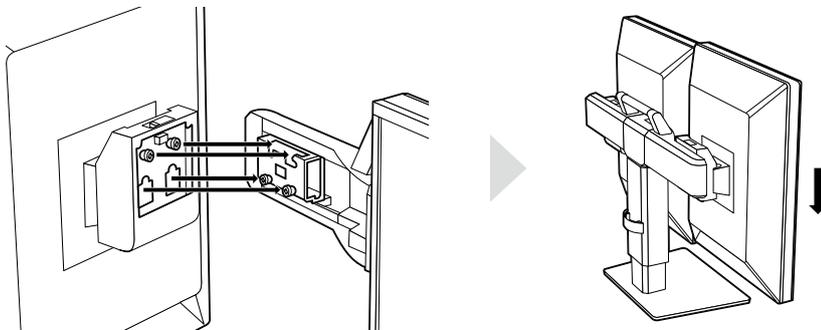

机械规格

尺寸(宽度×高度×深度)	709.0 mm × 476.0 mm - 566.0 mm × 225.0 mm (倾斜:0°,摆动(各显示器装置):0°) 696.5 mm × 476.0 mm - 566.0 mm × 237.1 mm (倾斜:0°,摆动(各显示器装置):15°)
净重	约17.3 kg
高度调节	90 mm (倾斜:0°)
倾斜	向上25°、向下5°
摆动(总计)	40°
摆动(各显示器装置)	15°



00N0N014A1 
INSET-RX560-MD-AL 