

사용 방법

RadiForce® MX242W

컬러 LCD 모니터

중요









본 “사용 방법” 과 설치 설명서 (별도로 제공됨) 를 자세히 읽어서 안전하고 효과적인 사용 방법을 반드시 숙지하시기 바랍니다 .

-
- 모니터 조정 및 설정은 설치 설명서를 참조하십시오 .
 - 최신 “사용 방법” 을 Eizo 웹 사이트
(<http://www.eizo.com>) 에서 다운로드할 수 있습니다 .
-



안전 표시

이 설명서와 이 제품에는 아래에 나와 있는 안전 표시가 사용됩니다. 각각의 기호는 중요 정보를 나타내므로 주의 깊게 읽으십시오.

 경고 경고로 표시된 내용을 따르지 않을 경우 심각한 부상을 입거나 생명의 위협을 받을 수 있습니다.	 주의 주의로 표시된 내용을 따르지 않을 경우 부상을 입거나 재산 또는 제품이 손상될 수 있습니다.
	주의를 기울여야 함을 나타냅니다. 예를 들어  기호는 "감전 위험" 등의 위험 종류를 나타냅니다.
	금지된 행동을 나타냅니다. 예를 들어  기호는 "분해 금지"와 같은 금지된 특정 행동을 나타냅니다.
	반드시 따라야 할 행동을 나타냅니다. 예를 들어  기호는 "장비 접지"와 같은 일반적인 금지 규정에 대한 알리를 나타냅니다.

이 제품은 본래 배송된 지역에서 사용하도록 특별히 조정되었습니다. 이 지역이 아닌 다른 곳에서 작동할 경우 제품이 사양에 명시된 대로 작동하지 않을 수도 있습니다.

본 설명서의 어떠한 부분도 EIZO Corporation의 사전 서면 동의 없이는 어떠한 형태 또는 수단으로도, 전자적, 기계적 또는 그 외 방법으로 복제되거나, 검색 시스템 보관 또는 전송될 수 없습니다.


EIZO Corporation은 해당 정보 수신에 따른 EIZO Corporation의 동의 없이는 제출된 어떠한 자료 또는 정보도 기밀로 유지할 의무가 없습니다. 본 설명서는 최신 정보를 제공할 수 있도록 제작되었지만 EIZO 모니터 사양은 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

주의사항

● 중요

- 이 제품은 본래 배송된 지역에서 사용하도록 특별히 조정되었습니다. 제품을 해당 지역이 아닌 다른 곳에서 사용할 경우 제품이 사양에 명시된 대로 작동하지 않을 수도 있습니다.
- 개인의 안전과 올바른 유지보수를 위해 이 섹션과 모니터의 주의 설명문을 주의 깊게 읽으십시오.

주의 사항의 위치

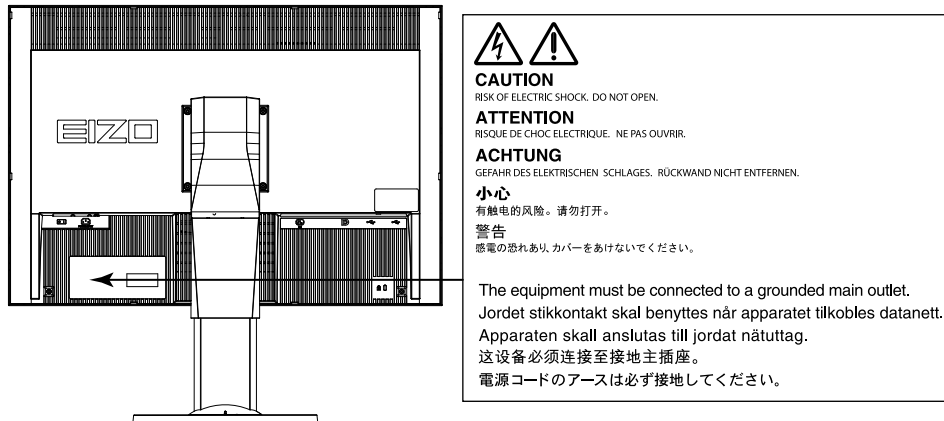

기기의 기호

기호	기호의 의미	
○	주 전원 스위치 :	모니터의 주 전원을 끄려면 이 버튼을 누릅니다.
	주 전원 스위치 :	모니터 주 전원을 켜려면 이 버튼을 누릅니다.
⏻	전원 버튼 :	모니터 전원을 켜거나 끄려면 이 버튼을 누릅니다.
~	교류	
⚡	전기적 위험 경고	
⚠	주의 :	" 안전 표시 "(2 페이지) 항목을 참조하십시오 .
♻	WEEE 표시 :	제품은 반드시 따로 폐기해야 합니다 . 부품은 재활용할 수 있습니다
CE	CE 표시 :	Council Directive 93/42/EEC 및 2011/65EU 조항에 따른 EU 준수 표시

경고

본 제품에서 연기 또는 타는 냄새가 나거나 이상한 소음이 들리면 즉시 모든 전원 코드를 뽑고 가까운 EIZO 대리점에 문의하십시오.

오작동 상태에서 본 제품을 사용할 경우 화재, 감전 또는 장비 손상이 발생할 수 있습니다.

캐비닛을 열거나 기기를 개조하지 마십시오.

캐비닛을 열거나 기기를 개조하면 화재, 감전 또는 화상을 초래할 수 있습니다.



모든 서비스는 전문 서비스 기술자에게 의뢰하십시오.

커버를 열어서 이 제품을 직접 수리하려 하지 마십시오. 이렇게 할 경우 화재, 감전 또는 장비 손상이 발생할 수 있습니다.

기기 주변에 작은 물건 또는 액체를 두지 마십시오.

환기구를 통해 캐비닛 내부로 작은 물건이 떨어지거나 액체가 흘러들어갈 경우 화재, 감전 또는 장비 손상이 발생할 수 있습니다. 작은 물건이나 액체가 캐비닛으로 들어가면 전원 코드를 즉시 뽑으십시오. 본 제품을 다시 사용하기 전에 전문 서비스 기술자의 점검을 받으십시오.



기기를 안전하고 단단한 곳에 설치하십시오.

부적당한 표면에 기기를 두면 기기가 떨어져서 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다. 기기를 떨어뜨린 경우 전원을 즉시 분리하고 가까운 EIZO 대리점에 조언을 구하십시오. 손상된 기기를 계속 사용하지 마십시오. 손상된 기기를 사용하면 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.



본 제품을 적절한 장소에서 사용하십시오.

그렇게 하지 않을 경우 화재, 감전 또는 장비 손상이 발생할 수 있습니다.

- 옥외에 설치하지 마십시오.
- 운송 수단 (배, 비행기, 기차, 자동차 등)에 설치하지 마십시오.
- 먼지가 많거나 습한 곳에 설치하지 마십시오.
- 화면에 물이 튀는 장소에 두지 마십시오 (욕실, 부엌 등).
- 수증기가 직접 화면에 닿는 곳에 설치하지 마십시오.
- 발열 장치 또는 가습기 근처에 설치하지 마십시오.
- 직사광선에 노출될 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.
- 인화성 가스가 있는 곳에 두지 마십시오.



질식 위험을 방지하기 위해 플라스틱 포장 비닐을 유아나 어린이로부터 멀리 치워두십시오.

동봉한 전원 코드를 사용하고 국가별 표준 콘센트에 연결하십시오.

전원 코드의 정격 전압을 반드시 지켜야 합니다. 그렇게 하지 않을 경우 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.

전원 공급 장치 : 100-240Vac 50/60Hz

전원 코드를 분리할 때는 플러그를 단단히 잡고 당기십시오.

코드를 잡아당기면 손상되거나 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다.



OK



본 제품은 반드시 접지된 콘센트에 연결해야 합니다.

그렇게 하지 않을 경우 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.



올바른 전압을 사용하십시오.

- 이 기기는 특정 전압용으로 설계되었습니다. "사용 방법"에 명시된 전압이 아닌 다른 전압에 연결할 경우 화재 또는 감전 사고 발생하거나 장비가 손상될 수 있습니다.

전원 공급 장치 : 100-240Vac 50/60Hz

- 전원 회로에 과부하가 걸리지 않게 하십시오. 과부하 시 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.

전원 코드를 조심스럽게 다루십시오 .

- 기기나 무거운 물체 아래에 코드가 눌리지 않게 하십시오 .
- 코드를 당기거나 묶지 마십시오 .

전원 코드가 손상된 경우 해당 코드의 사용을 중지하십시오 . 손상된 코드를 사용하면 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다 .



전기 안전을 위해 환자가 있는 곳에서는 전원 코드를 연결하거나 분리하지 마십시오 .

천둥이 칠 때는 플러그와 전원 코드를 절대로 만지지 마십시오 .

이 때 전원 코드를 만지면 감전될 수 있습니다 .



암 스탠드를 부착할 때는 암 스탠드의 사용 설명서를 참조하고 암 스탠드에 기기를 단단히 설치하십시오 .

이렇게 하지 않으면 기기가 분리되어 부상을 입거나 장비가 손상될 수 있습니다 . 설치하기 전에 책상이나 벽면 , 또는 암 스탠드가 고정될 그 밖의 위치에 대해 기계적 강도가 적당한지 확인하십시오 . 기기를 떨어뜨린 경우에는 가까운 EIZO 대리점에 조연을 구하십시오 . 손상된 기기를 계속 사용하지 마십시오 . 손상된 기기를 사용하면 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다 . 틸트 스탠드를 다시 장착할 때 동일한 나사를 사용하여 단단히 조이십시오 .

손상된 LCD 패널을 맨손으로 직접 만지지 마십시오 .

패널에서 누출될 수 있는 액정은 눈이나 입으로 들어갈 경우 독성이 있습니다 . 피부나 신체의 일부가 패널과 직접 접촉한 경우 철저히 닦아내십시오 . 이상 신체 증상이 발생할 경우 의사의 진찰을 받으십시오 .



형광등 백라이트 램프에는 수은이 들어 있으므로 (LED 백라이트 램프 제품에는 수은이 없음), 지자체에서 지정한 방법으로 폐기하십시오 .

기본 수은에 노출될 경우 신경계에 영향을 미쳐 떨림 , 기억 상실 및 두통 등의 증상을 유발할 수 있습니다 .

주의


기기를 운반할 때는 조심스럽게 다루십시오 .

기기 이동 시 전원 코드와 케이블을 분리하십시오 . 연결된 코드와 함께 기기를 옮기는 것은 위험한 행동입니다 . 부상을 입을 수도 있습니다 .

지정된 올바른 방법에 따라 기기를 운반하거나 설치하십시오 .

- 기기를 운반할 때는 아래 그림과 같이 단단히 잡으십시오 .
- 대형 기기는 매우 무거우므로 한 사람이 혼자서 기기를 개봉하거나 운반하지 마십시오 .

기기를 떨어뜨릴 경우 부상을 입거나 장비가 손상될 수 있습니다 .

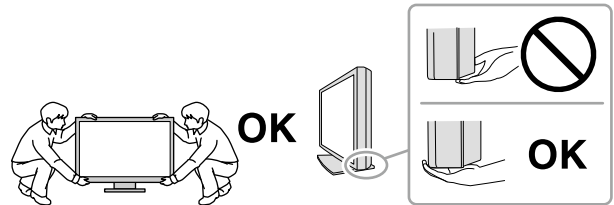

캐비닛의 환기구를 막지 마십시오 .

- 환기구 위에 물건을 올려 놓지 마십시오 .
- 본 제품을 밀폐된 공간에 설치하지 마십시오 .
- 본 제품을 눕히거나 뒤집어서 사용하지 마십시오 .

환기구가 막히면 공기가 제대로 순환되지 않아 화재 , 감전 또는 장비 손상이 발생할 수 있습니다 .



젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오 .

이렇게 할 경우 감전될 수 있습니다 .



쉽게 접근할 수 있는 콘센트를 사용하십시오 .

그렇게 해야 사고 발생 시 신속하게 전원 코드를 뽑을 수 있습니다 .

전원 플러그와 모니터의 환기구를 정기적으로 청소하십시오 .

플러그에 먼지 , 물 또는 오일이 있으면 화재가 발생할 수 있습니다 .

청소하기 전에 기기의 플러그를 뽑으십시오 .

전원 콘센트에 플러그가 꽂힌 상태로 기기를 청소하면 감전될 수 있습니다 .

장기간 기기를 사용하지 않을 예정인 경우 안전을 유지하고 전기를 절약하기 위해 전원 스위치를 끄고 나서 벽 콘센트에서 전원 코드를 분리하십시오 .

이 제품은 환자 환경에만 적합할 뿐 환자와의 접촉용으로 적합하지 않습니다 .

이 모니터에 대한 알림

용도


이 제품은 교육을 받은 의료인의 검토와 분석용으로 디지털 영상을 표시하고 보는 데 사용하기 위한 것입니다 .

주의

- 이 제품을 설명서에 기재된 용도가 아닌 다른 용도로 사용할 경우 보증이 적용되지 않을 수 있습니다 .
- 이 설명서에 명시된 사양은 다음이 사용될 때만 적용됩니다 .
 - 제품과 함께 제공된 전원 코드
 - 당사에서 지정한 신호 케이블
- 이 제품과 함께 당사에서 제조하거나 지정한 제품 (옵션) 만 사용하십시오 .

설치 요구사항

- " 주의사항 "(3 페이지) 을 자세히 읽고 항상 지침을 따르십시오 .
- 모니터를 랙에 설치할 경우 모니터 측면 , 뒷면 , 상단의 공간이 충분한지 확인하십시오 .

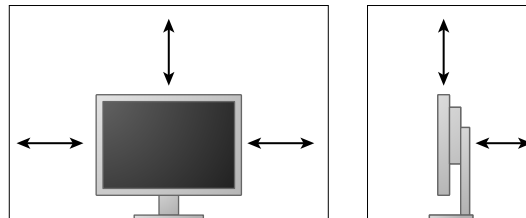

- 빛이 화면을 방해하지 않도록 모니터를 배치하십시오 .

유지보수

- 전기 부품의 성능이 안정화되는 데 대략 30분이 소요됩니다. 모니터 전원을 켜 후 또는 모니터가 절전 모드에서 복구된 후 30분이 경과될 때까지 기다렸다가 모니터를 조정하십시오.
- 장기간 사용으로 인한 조도 변화를 줄이고 안정적인 표시 상태를 유지하려면 모니터를 조금 낮은 밝기로 설정해야 합니다. 항상성 테스트를 정기적으로 수행하고, 필요할 경우 보정하십시오. 자세한 내용은 사용 설명서의 RadiCS/RadiCS LE 모니터 품질 제어 소프트웨어 항목을 참조하십시오.
- 테스트를 하지 않을 경우 장기적으로 부품 (LCD 패널, 팬 등) 성능이 저하될 수 있습니다. 부품이 정상 작동하는지 정기적으로 점검하십시오. 부품이 정상 작동하는지 정기적으로 점검하십시오.
- 동일 영상을 장시간 표시하고 나서 화면 영상을 변경하는 경우 잔상이 나타날 수 있습니다. 화면 보호기나 절전 기능을 사용하여 동일 영상이 장시간 표시되지 않도록 하십시오.
- 모니터를 장시간 사용할 경우 어두운 얼룩, 즉 번인 (burn-in) 현상이 나타날 수 있습니다. 모니터 수명을 극대화하려면 모니터를 정기적으로 꺼주는 것이 좋습니다.
- LCD 패널의 백라이트 수명은 정해져 있습니다. 화면이 어두워지거나 깜박이기 시작하면 가까운 EIZO 대리점에 문의하십시오.
- 화면에 결함이 있는 불량 픽셀이나 소량의 밝은 점이 보일 수도 있습니다. 이는 패널 자체의 특성으로 인한 것일 뿐 제품의 오작동이 아닙니다.
- 패널이나 프레임 가장자리를 강하게 누르지 마십시오. 이렇게 하면 간섭 패턴 등 표시 오작동이 발생할 수 있습니다. 패널에 지속적으로 압력을 가할 경우 패널의 성능이 저하되거나 패널이 손상될 수 있습니다. 패널에 압력을 가한 자국이 남아 있는 경우에는 모니터를 흑백 화면 상태로 두십시오. 증상이 사라질 수 있습니다.
- 날카로운 물체로 패널에 상처를 내거나 누르지 마십시오. 이렇게 하면 패널이 손상될 수 있습니다. 패널에 상처가 날 수 있으므로 휴지로 닦지 마십시오.
- 모니터를 저온 환경에서 실내로 가져온 경우 또는 실내 온도가 급격히 상승하는 경우에는 모니터 내부 또는 외부 표면에서 결로 현상이 발생할 수 있습니다. 이 경우에는 모니터를 켜지 마십시오. 대신에 결로 현상이 사라질 때까지 기다리십시오. 그렇지 않으면 모니터가 손상될 수 있습니다.

청소

모니터를 항상 새 제품 같은 상태로 유지하고 작동 수명을 연장하기 위해서는 모니터를 정기적으로 청소하는 것이 좋습니다.

주의

- 화학 물질을 자주 사용하지 마십시오. 알코올이나 소독액 같은 화학 물질은 캐비닛 또는 패널의 광택 변화, 변색 및 바램 또는 영상 품질 저하의 원인이 될 수 있습니다.
- 시너, 벤젠, 왁스 또는 연마성 세제를 절대로 사용하지 마십시오. 이러한 물질은 캐비닛 또는 패널을 손상시킬 수 있습니다.
- 화학 물질이 모니터에 직접 들어가지 않도록 하십시오.

참고

- 캐비닛 및 패널 표면 청소용으로 ScreenCleaner(옵션) 를 권장합니다.

캐비닛이나 패널 표면의 먼지는 물이나 아래에 나열된 화학 물질 중 하나를 살짝 묻힌 부드러운 천으로 살짝 닦아내십시오.

청소용으로 사용할 수 있는 화학 물질

물질 이름	제품 이름
에탄올	에탄올
이소프로필알코올	이소프로필 알코올
클로르헥시딘	히비탄
치아염소산나트륨	푸랄록스
벤잘코늄클로라이드	Welpas
알킬디아미노에칠글라이신	Tego 51
글루타랄	스테리하이드
글루타랄	Cidex Plus28

모니터를 편안하게 사용하려면

- 너무 어둡거나 밝은 화면은 눈에 영향을 줄 수 있습니다. 환경 조건에 따라 모니터의 밝기를 조정하십시오.
- 장시간 모니터를 응시하면 눈이 피로해집니다. 1 시간마다 10 분 정도 휴식을 취하십시오.
- 적절한 거리와 각도에서 화면을 보십시오.

내용

주의사항	3
● 중요	3
이 모니터에 대한 알림	7
내용	10
1 장 소개	11
1-1. 특징	11
1-2. 포장 내용	11
1-3. EIZO LCD Utility Disk.....	12
● 디스크 내용 및 소프트웨어 개요.....	12
● RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical 사용.....	12
1-4. 각 부분의 명칭과 기능.....	13
2 장 설정	14
2-1. 호환되는 해상도	14
2-2. 케이블 연결	14
2-3. 화면 높이와 각도 조정.....	15
3 장 문제 해결	16
4 장 사양	17
5 장 용어 설명	19
부록	21
상표	21
라이선스	21
의료 규격	22
FCC 적합성 선언	23
EMC 정보	24
ChinaRoHS(중국 RoHS 방지법 준수)	27

1 장 소개

EIZO 컬러 LCD 모니터를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

1-1. 특징

- 24.0 인치 와이드 포맷 LCD
- 광색역 패널
- 230 만 픽셀 (1920 도트 × 1200 라인) 해상도 지원
- 178° 수평 및 수직 시야각을 가진 IPS 패널
- DisplayPort 에 적합 (8 비트 또는 10 비트에 적합 , 오디오 신호에는 적합하지 않음)
- CAL 스위치 기능을 통해 표시된 이미지에 최적화된 화면 모드를 선택할 수 있습니다 .
설치 설명서 (CD-ROM 에 있음) 를 참조하십시오 .
- 선택형 화면으로 , DICOM(19 페이지) Part 14 를 준수합니다 .
- 모니터를 조정하고 조정 내역을 관리하는 데 사용되는 화질 조정 소프트웨어 "RadiCS LE" 가 포함되어 있습니다 .
"1-3. EIZO LCD Utility Disk"(12 페이지) 를 참조하십시오 .
- 마우스와 키보드를 사용하여 화면을 조정할 수 있는 "ScreenManager Pro for Medical" 소프트웨어가 포함되어 있습니다 .
"1-3. EIZO LCD Utility Disk"(12 페이지) 를 참조하십시오 .
- 절전 기능
이 제품에는 절전 기능이 장착되어 있습니다 .
 - 주 전원이 꺼진 경우 전력 소비량은 0W
주 전원 스위치가 장착되어 있습니다 . 모니터가 필요하지 않은 경우 주 전원 스위치를 사용하여 전원 공급을 차단할 수 있습니다 .
- 넓은 범위의 움직임이 가능한 스탠드
모니터의 위치를 조정하여 편안하며 피로가 덜한 업무 환경을 만들 수 있습니다 .
(기울기 : 위쪽 35°/ 아래쪽 5° , 회전축 : 344° , 높이 조정 가능 : 110 mm(기울기 : 35°) , 130mm (기울기 : 0°))
- 수명이 긴 LED 백라이트 LCD 패널


1-2. 포장 내용

포장 상자 안에 다음 항목이 모두 들어 있는지 확인하십시오 . 빠지거나 손상된 항목이 있으면 가까운 EIZO 대리점에 문의하십시오 .


참고

- 나중에 모니터를 이동하거나 운반할 경우에 대비하여 포장 상자와 재료를 잘 보관하십시오 .


- 모니터
- 전원 코드

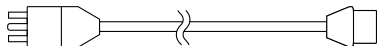


- 디지털 신호 케이블 :
DisplayPort – DisplayPort(PP300)

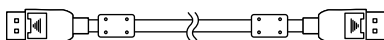

- 디지털 신호 케이블 : DVI-D – DVI-D(DD300-RI)

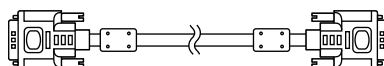

- USB 케이블 : UU300

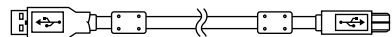

- 스탠드 받침대



- 케이블 홀더



- EIZO LCD Utility Disk(CD-ROM)
- 사용 방법 (이 설명서)
- 스탠드 조립

1-3. EIZO LCD Utility Disk

이 제품과 함께 "EIZO LCD Utility Disk" (CD-ROM) 가 제공됩니다. 다음 표에는 디스크에 수록된 내용과 소프트웨어 프로그램에 대한 간략한 설명이 나와 있습니다.

● 디스크 내용 및 소프트웨어 개요

이 디스크에는 조정용 응용 프로그램 소프트웨어와 설치 설명서가 들어 있습니다. 소프트웨어 시작 절차나 파일 액세스 절차는 디스크에 수록된 Readme.txt 파일을 참조하십시오.


내용	개요
Readme.txt 파일	
RadiCS LE (Windows 용)	모니터 조정 및 조정 내역을 관리하는 화질 조정 소프트웨어입니다.
ScreenManager Pro for Medical (Windows 용)	마우스와 키보드를 사용하여 화면을 조정하는 소프트웨어입니다.
이 모니터의 설치 설명서 (PDF 파일)	
이 모니터의 "사용 방법" (PDF 파일)	

● RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical 사용

"RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical" 의 설치 및 사용은 디스크의 해당 사용 설명서를 참조하십시오.

이 소프트웨어를 사용할 때는 제공된 USB 케이블을 사용하여 PC 를 모니터에 연결해야 합니다. 자세한 내용은 설치 설명서 (CD-ROM 에 있음) 를 참조하십시오.

1-4. 각 부분의 명칭과 기능

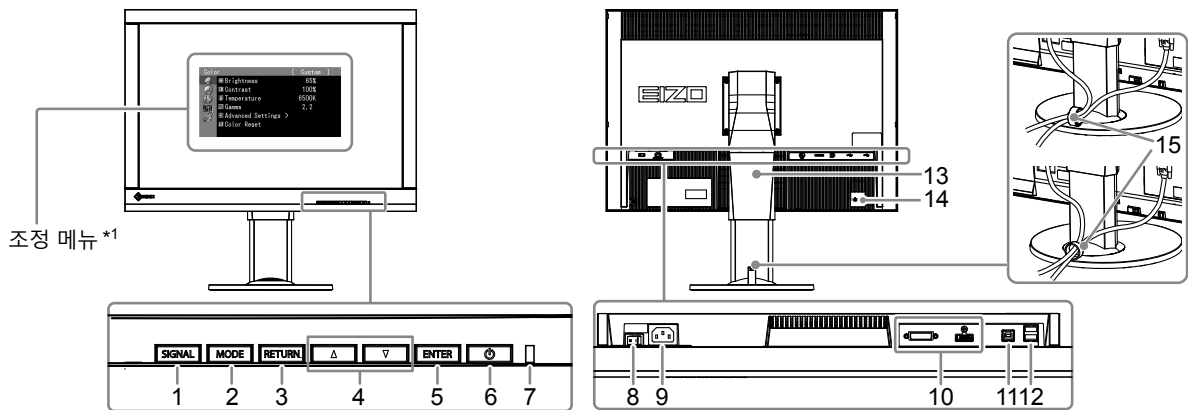

1. SIGNAL 버튼	화면의 입력 신호를 전환합니다.
2. MODE 버튼	CAL Switch 모드를 전환합니다.
3. RETURN 버튼	설정 / 조정을 취소하거나 조정 메뉴를 종료합니다.
4. ▲▼ 버튼	메뉴 선택과 기능 조정 및 설정을 할 수 있습니다.
5. ENTER 버튼	조정 메뉴를 표시하고, 메뉴 화면에서 항목을 결정하고, 조정된 값을 저장합니다.
6. ㄱ 버튼	전원을 켜거나 끕니다.
7. Power Indicator (전원 표시등)	모니터의 작동 상태를 나타냅니다. 녹색: 작동 주황색: 절전 모드 Off(끔): 주 전원 / 전원 꺼짐
8. 주 전원 스위치	주 전원을 켜거나 끕니다.
9. 전원 커넥터	전원 코드를 연결합니다.
10. 입력 신호 커넥터	좌측: DVI-I 커넥터 / 우측: DisplayPort 커넥터
11. USB 업스트림 포트	USB 연결이 필요한 소프트웨어를 사용하거나 USB 허브 기능을 사용하기 위해 USB 케이블을 연결합니다.
12. USB 다운스트림 포트	USB 주변 장치를 연결합니다.
13. 스탠드	모니터 화면의 높이와 각도를 조정하는 데 사용됩니다.
14. 보안 잠금 슬롯	Kensington 의 MicroSaver 보안 시스템을 지원합니다.
15. 케이블 홀더	모니터 케이블을 덮습니다.

*1 사용 방법은 설치 설명서를 참조하십시오 (CD-ROM 에 있음).

2 장 설정

2-1. 호환되는 해상도

모니터에서 지원하는 해상도는 다음과 같습니다.

해상도	수직 스캔 주파수
640×480	60 Hz
720×400	70 Hz
800×600	60 Hz
1024×768	60 Hz
1280×960	60 Hz
1280×1024	60 Hz
1600×1200	60 Hz
1680×1050	60 Hz
1920×1200 ^{*1}	60 Hz

^{*1} 권장 해상도입니다.

2-2. 케이블 연결

주의

- 모니터와 PC의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
- 사용 중인 모니터를 본 모니터로 교체하는 경우에는 반드시 PC의 해상도 및 수직 스캔 주파수 설정을 본 모니터에서 사용할 수 있는 설정으로 변경해 주십시오. PC를 연결하기 전에 호환되는 해상도 표를 참조하십시오.


참고

- 이 제품에 두 대 이상의 PC를 연결하는 경우에는 설치 설명서를 참조하십시오 (CD-ROM에 있음).

1. 입력 신호 커넥터 및 PC에 신호 케이블을 연결하십시오.


커넥터의 모양을 확인하고 케이블을 연결하십시오.

신호 케이블을 연결한 다음 커넥터의 나사를 조여 커플링을 고정합니다.

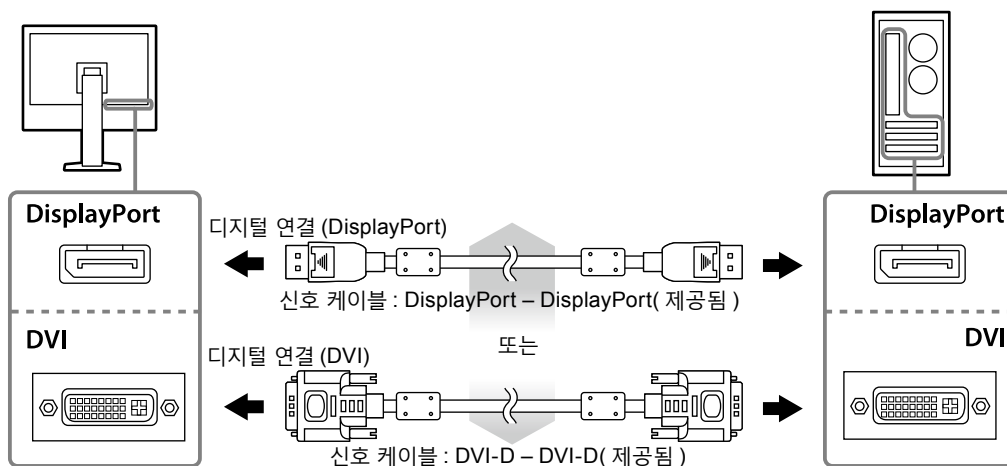


2. 모니터의 전원 커넥터와 콘센트에 전원 코드를 꽂습니다.

3. RadiCS LE 또는 ScreenManager Pro for Medical 을 사용하는 경우 USB 케이블을 연결합니다.

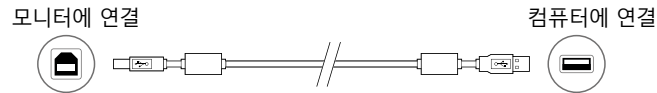

4. 이 제품에는 케이블 홀더가 제공됩니다. 케이블 홀더를 사용해 모니터에 연결된 케이블을 정리하십시오.

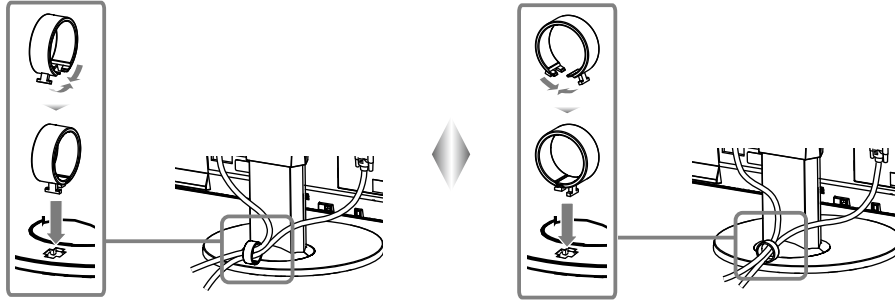

5. 모니터를 켜려면 버튼을 누릅니다.

모니터의 전원 표시등이 녹색으로 켜집니다.

6. PC 를 켭니다.

화면 이미지가 나타납니다.

이미지가 나타나지 않으면 "3 장 문제 해결 "(16 페이지) 에서 추가 정보를 참조하십시오 .

주의


- 사용을 마친 후에는 모니터와 PC 의 전원을 끄십시오 .
- 절전 효과를 최대한 높이려면 전원 버튼을 끄는 것이 좋습니다 . 주 전원 스위치를 끄거나 전원 코드를 뽑으면 모니터로의 전원 공급이 완전히 차단됩니다 .

참고

- 모니터의 수명을 최대한 늘리고 휘도 저하와 전력 소비를 최소화하려면 계속하여 다음을 수행하십시오 .
 - 컴퓨터의 절전 기능을 사용하십시오 .
 - 사용을 마친 후에는 모니터와 PC 의 전원을 끄십시오 .

2-3. 화면 높이와 각도 조정

모니터의 왼쪽과 오른쪽 가장자리를 양손으로 잡고 화면 높이 , 기울기 및 회전축을 작업에 가장 편안한 상태로 조정합니다.


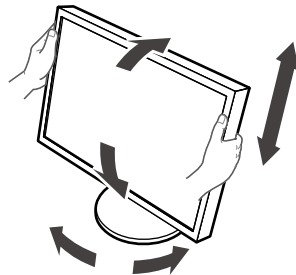


주의

- 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하십시오 .

3 장 문제 해결

제안된 해결 방법을 적용한 후에도 문제가 해결되지 않으면 가까운 EIZO 대리점에 문의해 주십시오.

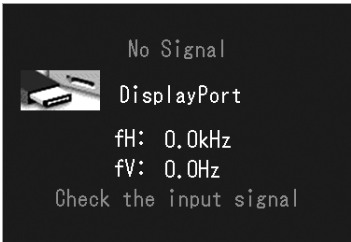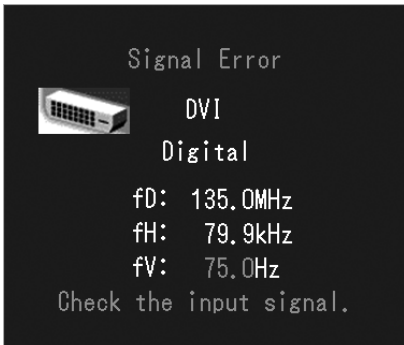
문제	원인 및 해결 방법
1. 화상이 표시되지 않음 <ul style="list-style-type: none"> 전원 표시등이 켜지지 않습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 전원 코드가 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. 주 전원 스위치를 켭니다. ⏻ 버튼을 누릅니다. 주 전원을 끈 다음, 몇 분 뒤에 다시 켭니다.
<ul style="list-style-type: none"> 전원 표시등이 녹색으로 켜집니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 조정 메뉴에서 "Brightness(밝기)" 또는 "Gain(게인)" 을 높이십시오.
<ul style="list-style-type: none"> 전원 표시등이 주황색으로 켜집니다. 	<ul style="list-style-type: none"> SIGNAL 버튼을 사용해 입력 신호를 전환합니다. 마우스를 움직이거나 키보드의 아무 키나 누릅니다. PC 가 켜져 있는지 확인합니다.
<ul style="list-style-type: none"> 전원 표시등이 주황색과 녹색으로 깜빡입니다. 	<ul style="list-style-type: none"> DisplayPort 를 사용하여 연결된 장치에 문제가 있습니다. 문제를 해결하고 모니터 전원을 껐다가 다시 켜십시오. 상세한 내용은 출력 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.
2. 아래와 같은 메시지가 나타납니다.	모니터 기능이 작동하더라도 신호가 올바르게 입력되지 않는 경우 해당 메시지가 나타납니다.
<ul style="list-style-type: none"> 아무런 신호도 입력되지 않았을 때 이 메시지가 표시됩니다. 예 : 	<ul style="list-style-type: none"> 일부 PC 는 전원을 켜 후 곧바로 신호를 출력하지 않기 때문에 왼쪽에 보이는 메시지가 나타날 수도 있습니다. PC 가 켜져 있는지 확인합니다. 신호 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. SIGNAL 버튼을 사용해 입력 신호를 전환합니다.
<ul style="list-style-type: none"> 입력 신호가 지정된 주파수 범위를 벗어난다는 메시지가 표시됩니다. (이러한 신호 주파수는 자홍색으로 표시됩니다.) 예 :  <p>fD: 도트 클럭 (디지털 신호가 입력되는 동안에만 표시) fH: 수평 스캔 주파수 fV: 수직 스캔 주파수</p>	<ul style="list-style-type: none"> PC 가 모니터의 해상도 및 수직 스캔 주파수 요구사항을 만족하도록 설정되어 있는지 확인하십시오 ("2-1. 호환되는 해상도 "(14 페이지) 참조). PC 를 다시 시작합니다. 그래픽 보드의 유틸리티를 사용하여 적합한 설정을 선택합니다. 자세한 내용은 그래픽 보드의 설명서를 참조하십시오.

4 장 사양

LCD 패널	종류	IPS(눈부심 방지)
	백라이트	LED
	크기	61cm(24.1 인치)(61.1cm 대각선)
	기본 해상도	230 만 픽셀 (1920 도트 × 1200 라인)
	표시 크기 (H × V)	518.4 mm × 324.0 mm
	픽셀 피치	0.27mm
	표시 색상	10 비트 색상 : 10 억 7 천만 (최대) 색상
	시야각 (H/V, 일반)	178° / 178°
	권장 밝기	180cd/m ²
	대비 비율 (일반)	1000:1
	응답 시간 (일반)	12ms(흑색 - 백색 - 흑색)
비디오 신호	입력 단자	DVI-I × 1, DisplayPort × 1
	디지털 스캐닝 주파수 (H/V)	31kHz~76kHz / 59Hz~61Hz(VGA TEXT: 69Hz~71Hz) 프레임 동기 모드 : 59Hz~61Hz
	아날로그 스캐닝 주파수 (H/V)	26kHz~76kHz / 49Hz~71Hz(VGA TEXT: 69Hz~71Hz)
	동기 신호	개별, TTL, 포지티브 / 네거티브
	도트 클럭	165MHz(최대)
USB	포트	업스트림 포트 × 1, 다운스트림 포트 × 2
	표준	USB 2.0 규격
전원	입력	100~240Vac±10%, 50/60Hz 0.70A~0.40A
	최대 전력 소비량	68 W 이하
	절전 모드	0.5W 이하 (DVI(아날로그) 커넥터가 연결되어 있고 "Input Selection(입력 선택)" 이 "Manual(수동)" 로 설정되어 있으며 , USB 장치가 연결되지 않았고 "DP PowerSave" 가 "On(켜짐)" 으로 설정된 경우에만)
	대기 모드	0.5W 이하 (USB 장치가 연결되지 않았고 "DP PowerSave" 가 "On(켜짐)" 으로 설정된 경우)
물리적 사양	크기	575mm × 423~553mm × 245 mm(W × H × D)(기울기 : 0°)
	크기 (스탠드 제외)	575 mm × 398 mm × 71 mm(W × H × D)
	순 중량	약 8.7 kg
	순 중량 (스탠드 제외)	약 6.0 kg
	높이 조정 범위	110 mm(기울기 : 35°) 130 mm(기울기 : 0°)
	기울기	위쪽 35°, 아래쪽 5°
	회전축	344°
	회전	90°(시계 방향)
작동 환경 요구사항	온도	0°C~35°C(32°F~95°F)
	습도	20%~80% R.H. (비응축)
	공기 압력	540hPa~1060hPa
운송 / 스토리지 환경 요구사항	온도	-20°C~60°C(-4°F~140°F)
	습도	10%~90% R.H. (비응축)
	공기 압력	200hPa~1060hPa

외부 크기

단위 : mm

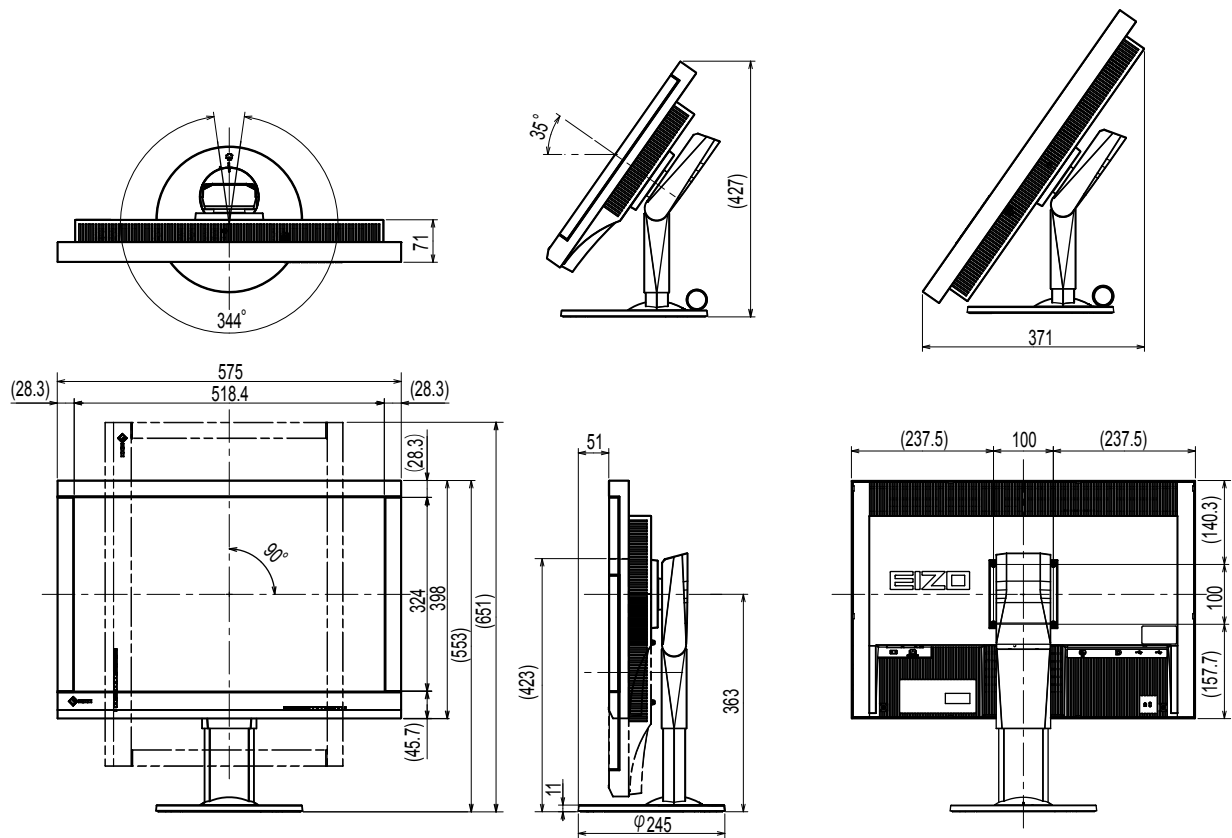

부속품

조정 키트	EIZO "RadiCS UX1" 버전 4.3.2 이상 EIZO "RadiCS Version Up Kit" 버전 4.3.2 이상
네트워크 QC 관리 소프트웨어	EIZO "RadiNET Pro" 버전 4.3.2 이상
청소 키트	EIZO "ScreenCleaner"
신호 케이블 (DVI - D-Sub)	FD-C16

최신 호환 그래픽 보드에 대한 정보와 부속품에 대한 최신 정보는 Eizo 웹 사이트를 참조하십시오 .
<http://www.eizo.com>

5 장 용어 설명

Clock(클럭)

아날로그 신호 입력 모니터의 경우, 이미지 표시를 위해 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환할 때 사용 중인 그래픽 시스템의 도트 클럭과 동일한 주파수의 클럭을 재현해야 합니다. 이를 클럭 조정이라고 합니다. 클럭 펄스를 제대로 설정하지 않을 경우 화면에 수직선이 나타날 수 있습니다.

DDC(Display Data Channel: 표시 데이터 채널)

VESA 는 PC 와 모니터 간에 설정 정보 등을 서로 주고 받기 위한 표준화를 제공합니다.

DICOM(Digital Imaging and Communication in Medicine: 의료용 디지털 영상 및 통신)

DICOM 표준은 미국 방사학회 (American College of Radiology) 와 미국 전기공업회 (National Electrical Manufacturer' s Association) 에서 개발했습니다.

DICOM 호환 장치 연결을 통해 의료 영상과 정보를 전송할 수 있습니다. DICOM, Part 14 문서에는 디지털 그레이스케일 의료 영상 표시에 대해 정의되어 있습니다.

DisplayPort

VESA 에 따라 표준화된 이미지 신호용 인터페이스 표준입니다. 기존의 DVI 와 아날로그 인터페이스를 교체할 목적으로 개발되었으며 DVI 에서 지원되지 않는 고해상도 신호와 소리 신호를 전송할 수 있습니다. 10 비트 색상, 저작권 보호 기술, 긴 케이블 등을 지원하며 커넥터의 크기가 표준형 및 소형으로 표준화되어 있습니다.

DVI(Digital Visual Interface)

DVI 는 디지털 인터페이스 표준입니다. DVI 를 사용하면 PC 의 디지털 데이터를 손실 없이 직접 전송할 수 있습니다.

이 방식에는 TMDS 전송 시스템과 DVI 커넥터가 사용됩니다. DVI 커넥터에는 두 가지 종류가 있습니다. 하나는 디지털 신호 입력 전용 DVI-D 커넥터이며, 다른 하나는 디지털 및 아날로그 신호 입력에 모두 사용할 수 있는 DVI-I 커넥터입니다.

DVI DMPM(DVI Digital Monitor Power Management: 디지털 모니터 전원 관리)

DVI DMPM 은 디지털 인터페이스 절전 기능입니다. "작동 모드" 와 "절전 모드" 는 모니터의 절전 모드로서 DVI DMPM 의 필수 요소입니다.

Gain(게인)

빨간색, 녹색 및 파란색에 대한 각 색상 매개변수를 조정하는 데 사용됩니다. LCD 모니터는 빛이 패널 색상 필터를 통과함으로써 색상이 표시됩니다. 빨간색, 녹색, 파란색이 세 가지 기본 색상입니다. 이 세 가지 색상을 혼합하여 화면의 모든 색상을 표시합니다. 색조는 각 색상 필터를 통과하는 빛의 강도 (볼륨) 를 조정하여 변경할 수 있습니다.

감마

일반적으로 모니터 밝기는 "Gamma Characteristic" (감마 특성) 이라는 입력 신호 레벨에 따라 비선형으로 달라집니다. 감마 값이 작으면 낮은 콘트라스트 이미지를 생성하며, 감마 값이 클 때는 높은 콘트라스트 이미지를 생성합니다.

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection: 고대역 디지털 콘텐츠 보호)

비디오, 음악 등 디지털 콘텐츠의 복사를 방지하기 위해 개발된 디지털 신호 코딩 시스템입니다. 이 기술은 출력 측에서 DVI 또는 HDMI 커넥터를 통해 전송되는 디지털 콘텐츠를 코딩하고 입력 측에서 이러한 코딩된 콘텐츠의 암호를 해독함으로써 디지털 콘텐츠가 안전하게 전송되도록 도와줍니다. 입출력 측의 각 장치가 HDCP 시스템에 적합하지 않을 경우 디지털 콘텐츠는 복제될 수 없습니다.

Phase(위상)

위상이란 아날로그 입력 신호를 디지털 신호로 변환하기 위한 샘플링 시간을 의미합니다. 위상 조정은 타이밍 조정을 위해 수행합니다. 클럭을 올바르게 조정한 후 위상 조정을 수행하는 것이 좋습니다.

Range Adjustment(범위 조정)

범위 조정은 모든 컬러 그라데이션을 표시하기 위한 신호 출력 레벨을 제어합니다. 컬러 조정 전에 범위 조정을 수행하는 것이 좋습니다.

해상도

LCD 패널은 지정된 크기의 수많은 픽셀로 이루어져 있으며, 각각의 픽셀이 빛을 내어 영상을 표현합니다. 이 모니터는 수평 픽셀 1920 개와 수직 픽셀 1200 개로 구성됩니다. 따라서 왼쪽 및 오른쪽 화면의 혼합 해상도가 1920 × 1200 일 경우 모든 픽셀이 전체 화면 (1:1) 에 표시됩니다.

온도

색 온도는 일반적으로 켈빈 온도를 사용하여 표시되는 흰 색조를 측정하는 방법입니다. 화면은 불꽃의 온도와 마찬가지로 온도가 낮으면 붉은색을 띠고 온도가 높으면 파란색을 띵니다.

5000K: 약간 붉은빛을 띠는 흰색

6500K: 주광색이라고도 하는 흰색

9300K: 약간 푸른 빛을 띠는 흰색

VESA DPM(Video Electronics Standards Association - Display Power Management)

VESA 규격은 컴퓨터 모니터의 에너지 효율성 향상을 달성하기 위한 규격입니다. 이는 컴퓨터 (그래픽 보드) 에서 전송한 신호의 표준화와 관련이 있습니다.

DPM 은 컴퓨터와 모니터 사이에서 전송된 신호 상태를 정의합니다.

부록

상표

HDMI, HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 및 HDMI 로고는 미국 및 그 밖의 국가에서 HDMI Licensing, LLC 의 등록 상표입니다.

DisplayPort Compliance Logo 와 VESA 는 Video Electronics Standards Association 의 등록 상표입니다.

Acrobat, Adobe, Adobe AIR 및 Photoshop 은 미국 및 그 밖의 국가에서 Adobe Systems Incorporated 의 등록 상표입니다.

AMD Athlon 및 AMD Opteron 은 Advanced Micro Devices, Inc. 의 상표입니다.

Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook 및 QuickTime 은 Apple Inc. 의 등록 상표입니다.

ColorMunki, Eye-One 및 X-Rite 는 미국 및 / 또는 그밖의 국가에서 X-Rite Incorporated 의 상표 또는 등록 상표입니다.

ColorVision 및 ColorVision Spyder2 는 미국에서 DataColor Holding AG 의 등록 상표입니다.

Spyder3 및 Spyder4 는 DataColor Holding AG 의 상표입니다.

ENERGY STAR 는 미국 및 그 밖의 국가에서 미국 환경 보호국 (United States Environmental Protection Agency) 의 등록 상표입니다.

GRACoL 및 IDEAlliance 는 International Digital Enterprise Alliance 의 등록 상표입니다.

NEC 는 NEC Corporation 의 등록 상표입니다.

PC-9801 및 PC-9821 은 NEC Corporation 의 상표입니다.

NextWindow 는 NextWindow Ltd 의 상표입니다.

Intel, Intel Core, Pentium, Thunderbolt 는 미국 및 / 또는 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation 의 상표입니다.

PowerPC 는 International Business Machines Corporation 의 등록 상표입니다.

PlayStation 은 Sony Computer Entertainment Inc. 의 등록 상표입니다.

PSP 및 PS3 은 Sony Computer Entertainment Inc. 의 상표입니다.

RealPlayer 는 RealNetworks, Inc. 의 등록 상표입니다.

TouchWare 는 3M Touch Systems, Inc. 의 상표입니다.

Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server 및 Xbox 360 은 미국 및 그 밖의 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상표입니다.

YouTube 는 Google Inc. 의 등록 상표입니다.

Firefox 는 Mozilla Foundation 의 등록 상표입니다.

Kensington 및 MicroSaver 는 ACCO Brands Corporation 의 등록 상표입니다.

EIZO, EIZO 로고 , ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor 및 ScreenManager 는 일본 및 그 밖의 국가에서 EIZO Corporation 의 등록 상표입니다.

ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i•Sound, Screen Administrator 및 UniColor Pro 는 EIZO Corporation 의 상표입니다.

그 밖의 모든 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.

라이선스

이 제품에 표시되는 문자에는 Ricoh 에서 디자인한 굵은 둥근 고딕 비트맵 글꼴이 사용됩니다.

의료 규격

- 최종 시스템이 IEC60601-1-1 요구 사항을 준수한다는 것을 보증해야 합니다.
- 전원 공급 장치는 전자파를 방출할 수 있으며, 이로 인해 모니터가 영향을 받거나 사용이 제한되거나 오작동을 일으킬 수 있습니다. 이러한 영향이 미치지 않는 통제된 환경에 기기를 설치하십시오.

장비 분류

- 감전 보호 등급 : 클래스 I
- EMC 클래스 : EN60601-1-2:2007 그룹 1 클래스 B
- 의료 장치 분류 (MDD 93/42/EEC) : 클래스 I
- 작동 모드 : 연속
- IP 클래스 : IPX0

FCC 적합성 선언

미국, 캐나다 등 (정격 100-120 Vac)에만 해당

FCC 적합성 선언

책임자인 당사,

(EIZO Inc.)

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

전화: (562) 431-5011

는 본 제품,

상표 이름: EIZO

모델: RadiForce MX242W

이 FCC 규정 15 항을 준수합니다. 이 제품의 작동에는 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며, (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 초래할 수 있는 간섭을 비롯하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

FCC 규정의 15 항에 따라 이 장치는 Class B 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 테스트 및 입증되었습니다. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 이러한 제한은 거주지 설치 시 유해 간섭에 대한 합당한 보호를 제공하기 위한 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 대한 유해 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치 시 간섭이 발생하지 않음을 보장하지 않습니다. 이 장비가 라디오나 TV 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우 (장비를 켜다가 다시 켜 봄으로써 간섭 여부를 확인할 수 있음) 사용자는 다음과 같은 하나 이상의 방법을 통해 간섭을 해결할 수 있습니다.

- * 수신 안테나의 방향 또는 위치를 변경합니다.
- * 장치와 수신기의 간격을 더 넓힙니다.
- * 장비를 수신기가 연결된 것이 아닌 다른 회로의 콘센트에 연결합니다.
- * 대리점이나 숙련된 라디오 /TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

규정 준수 담당자가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 수정 행위 시 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한이 무효화됩니다.

참고

간섭을 클래스 B 디지털 장치의 제한 이내로 유지하려면 이 모니터와 함께 제공된 EIZO 신호 케이블이나 아래 명시된 케이블을 사용하십시오.

- AC 코드
- 차폐된 신호 케이블 (동봉됨)

캐나다 법적 고지

이 클래스 B 디지털 기기는 캐나다 ICES-003 을 준수합니다.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EMC 정보

RadiForce 시리즈의 기본 용도는 올바르게 이미지를 표시하고 기능을 조작하는 것입니다.

주의

RadiForce 시리즈는 EMC 에 대한 각별한 주의가 필요하며 다음 정보에 따라 사용해야 합니다.

당사에서 제공하거나 지정한 케이블 이외의 어떤 케이블도 사용하지 마십시오 .

다른 케이블을 사용하면 방출량이 증가하거나 내성이 감소할 수 있습니다.

케이블 길이 : 최대 3m

RadiForce 시리즈 가까이에 휴대용 및 모바일 RF 통신 장비를 두지 마십시오 . 그렇지 않으면 RadiForce 시리즈에 영향이 미칠 수 있습니다.

RadiForce 시리즈를 다른 장비 부근이나 다른 장비와 겹쳐 놓은 상태로 사용하면 안 됩니다 . 인접한 상태 또는 겹쳐 놓은 상태로 사용해야 하는 경우에는 사용될 구성에서 장비나 시스템을 관찰하여 정상적으로 작동하는지 확인해야 합니다.

추가 장비를 신호 입력 부분이나 신호 출력 부분에 연결하여 의료 시스템을 구성하는 사람은 시스템이 IEC/EN60601-1-2 요구 사항을 준수하도록 할 책임이 있습니다.

지침 및 제조업체 선언 - 전자파 방출

RadiForce 시리즈는 아래 명시된 전자파 환경용으로 제조되었습니다.

RadiForce 시리즈의 고객이나 사용자는 이 장비가 해당 환경에서 사용되도록 해야 합니다.

방출 테스트	준수	전자파 환경 - 지침
RF 방출 CISPR11/EN55011	그룹 1	RadiForce 시리즈에는 내부 기능용으로만 RF 에너지가 사용됩니다 . 따라서 RF 방출량이 매우 낮으며 인접한 전자 장비에 대한 간섭을 일으킬 가능성이 매우 적습니다 .
RF 방출 CISPR11/EN55011	클래스 B	RadiForce 시리즈는 가정용 시설과 가정용으로 사용되는 건물에 공급되는 공공 저전압 전력 공급망에 직접 연결된 시설 등 모든 시설에 사용하기에 적합합니다 .
고조파 방출 IEC/EN61000-3-2	클래스 D	
전압 변동 / 플리커 (flicker) 방출 IEC/EN61000-3-3	준수	

지침 및 제조업체 선언 - 전자파 내성

RadiForce 시리즈는 아래 명시된 전자파 환경용으로 제조되었습니다.


RadiForce 시리즈의 고객이나 사용자는 이 장비가 해당 환경에서 사용되도록 해야 합니다.

내성 테스트	IEC/EN60601 테스트 수준	준수 수준	전자파 환경 - 지침
정전기 방전 (ESD) IEC/EN61000-4-2	± 6kV(접촉 시) ± 8kV(대기 중)	± 6kV(접촉 시) ± 8kV(대기 중)	바닥은 목재 , 콘크리트 또는 세라믹 타일이어야 합니다 . 바닥이 합성 물질로 덮여 있는 경우 상대 습도가 30% 이상이어야 합니다 .
전기적 급성 과도 현상 / 버스트 IEC/EN61000-4-4	± 2kV (전원 공급 라인) ± 1kV (입 / 출력 라인)	± 2kV (전원 공급 라인) ± 1kV (입 / 출력 라인)	전력 공급 라인의 품질은 표준 상업 또는 병원 환경 등급이어야 합니다 .
서지 IEC/EN61000-4-5	± 1kV(라인 간) ± 2kV(라인 - 접지 간)	± 1kV(라인 간) ± 2kV(라인 - 접지 간)	전력 공급 라인의 품질은 표준 상업 또는 병원 환경 등급이어야 합니다 .
전력 공급 라인의 전압 강하 , 단락 중단 및 전압 변동 IEC/EN61000-4-11	0.5 주기 동안 <5% U_T (>95% 강하 , U_T) 5 주기 동안 40% U_T (60% 강하 , U_T) 25 주기 동안 70% U_T (30% 강하 , U_T) 5 초 동안 <5% U_T (>95% 강하 , U_T)	0.5 주기 동안 <5% U_T (>95% 강하 , U_T) 5 주기 동안 40% U_T (60% 강하 , U_T) 25 주기 동안 70% U_T (30% 강하 , U_T) 5 초 동안 <5% U_T (>95% 강하 , U_T)	전력 공급 라인의 품질은 표준 상업 또는 병원 환경 등급이어야 합니다 . 본선 전력 중단 중에도 RadiForce 시리즈를 지속적으로 작동해야 하는 경우 무정전 전원 공급 장치 또는 배터리를 통해 RadiForce 시리즈에 전원을 공급할 것을 권장합니다 .

전력 주파수 (50/60Hz) 자기장 IEC/EN61000-4-8	3A/m	3A/m	전력 주파수 자기장은 표준 상업 또는 병원 환경의 일반적인 장소의 특성 수준이 해당해야 합니다.
참고 U _T 는 테스트 수준을 적용하기 전 AC 본선 전압을 말합니다.			

지침 및 제조업체 선언 - 전자파 내성

RadiForce 시리즈는 아래 명시된 전자파 환경용으로 제조되었습니다. RadiForce 시리즈의 고객이나 사용자는 이 장비가 해당 환경에서 사용되도록 해야 합니다.

내성 테스트	IEC/EN60601 테스트 수준	준수 수준	전자파 환경 - 지침
전도된 RF IEC/EN61000-4-6	3Vrms 150kHz ~ 80MHz	3Vrms	<p>송신기 주파수에 적용 가능한 공식을 통해 계산된 권장 이격 거리를 벗어나서 케이블 등 RadiForce 시리즈의 구성품 부근에서 휴대용 및 모바일 RF 통신 장비를 사용하면 안 됩니다.</p> <p>권장 이격 거리</p> <p>$d = 1.2 \sqrt{P}$</p> <p>$d = 1.2 \sqrt{P}$, 80MHz ~ 800MHz $d = 2.3 \sqrt{P}$, 800MHz ~ 2.5GHz</p> <p>여기서 "P" 는 송신기 제조업체에서 명시한 송신기의 정격 최대 출력 전력 등급 (W) 이며 "d" 는 권장 이격 거리 (m) 입니다.</p> <p>전자파 현장 조사에 따르면 고정 RF 송신기의 자기장 강도^a 는 각 주파수 범위^b 의 준수 수준보다 작아야 합니다.</p> <p>다음 기호가 표시된 장비 부근에서는 간섭이 발생할 수 있습니다.</p> 
방사 RF IEC/EN61000-4-3	3V/m 80MHz ~ 2.5GHz	3V/m	

참고 1 80MHz 및 800MHz 에서는 더 큰 주파수 범위가 적용됩니다.

참고 2 이러한 지침은 일부 상황에서 적용되지 않을 수도 있습니다. 전자기 전파는 구조물, 물체 및 사람에 의한 흡수와 반사에 영향을 받습니다.

^a 무선 전화 (휴대폰 / 무선 전화) 와 육상 이동 무선, 아마추어 무선, AM 및 FM 라디오 방송 및 TV 방송 기지국 등 고정 송신기로부터의 자기장 강도는 이론적으로 정확하게 예측할 수 없습니다. 고정 RF 수신기로 인한 전자파 환경을 평가하려면 전자파 현장 조사를 고려해 보아야 합니다. RadiForce 시리즈가 사용되는 장소에서 측정된 자기장 강도가 위의 해당하는 RF 적합성 수준을 초과할 경우 RadiForce 시리즈를 관찰하여 정상적으로 작동하는지 확인해야 합니다. 이상 작동이 관찰될 경우 RadiForce 시리즈의 방향이나 위치를 변경하는 등 추가적인 조치를 취해야 할 수도 있습니다.

^b 주파수 범위 150kHz ~ 80MHz 를 벗어나는 경우 자기장 강도는 3 V/m 이하여야 합니다.

휴대용 및 이동 RF 통신 장비와 RadiForce 시리즈 간 권장 이격 거리			
RadiForce 시리즈는 방사 RF 방해가 제어되는 전자파 환경에서 사용해야 합니다. 통신 장비의 최대 출력 전력에 따라 휴대용 및 이동 RF 통신 장비 (송신기) 와 RadiForce 시리즈 간에 최소 거리를 유지할 경우 전자파 간섭을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.			
송신기의 정격 최대 출력 전력 W	송신기 주파수에 따른 이격 거리 m		
	150kHz ~ 80MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80MHz ~ 800MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800MHz ~ 2.5GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
송신기의 정격 최대 출력 전력이 위에 해당하지 않는 경우 권장 이격 거리 "d" (m) 는 송신기 주파수에 적용 가능한 공식을 사용하여 예상할 수 있습니다. 이 공식에서 "P" 는 송신기 제조업체가 명시한 송신기 전력 (W) 의 정격 최대 출력 전력입니다.			
참고 1	80MHz 및 800MHz 에서는 더 큰 주파수 범위에 대한 이격 거리가 적용됩니다.		
참고 2	이러한 지침은 일부 상황에서 적용되지 않을 수도 있습니다. 전자기 전파는 구조물, 물체 및 사람에 의한 흡수와 반사에 영향을 받습니다.		

ChinaRoHS(중국 RoHS 방지법 준수)

전자 정보 제품 오염 관리 기호에 관한 정보



이 기호는 '전자 정보 제품에 의한 오염 관리 방지법'을 통해 규제되는 제품을 나타내며 중국에서 판매되는 전자 정보 제품에 적용됩니다. 원 안에 표시된 숫자는 EFUP(환경 보호 사용 기간)을 의미합니다. 관련 안전 예방책을 준수할 경우 제품이 제조일로부터 지정된 기간 동안 환경 오염, 인체 유해 또는 자산 손해를 초래하지 않음을 보장할 수 있습니다. 이 라벨은 장치 뒷면에 부착되어 있습니다.

- 위험 물질 이름 및 농도

성분 이름	유해 물질 이름					
	납 (Pb)	수은 (Hg)	카드뮴 (Cd)	육가 크로뮴 (Cr(VI))	폴리브롬화 비페닐 (PBB)	폴리브롬화 디페닐 에테르 (PBDE)
인쇄 회로 기판	×	○	○	○	○	○
케이스	○	○	○	○	○	○
LCD 모니터	×	○	○	○	○	○
기타	×	○	○	○	○	○
<p>○: 이 부품에 사용된 모든 동종 물질에 함유된 이 독성 물질 또는 유해 물질의 양이 SJ/T11363-2006 의 제한 요구 사항 범위 이내임을 나타냅니다.</p> <p>×: 이 부품에 사용된 하나 이상의 동종 물질에 함유된 이 독성 물질 또는 유해 물질의 양이 SJ/T11363-2006 의 제한 요구 사항 범위를 초과함을 나타냅니다. (회사에서는 이 공간을 활용하여 위의 표에 '×' 와 관련된 기술적 상황에 대한 추가 설명을 제공합니다.)</p>						

