



Instrucciones de uso

RadiForce® GX570

Monitor LCD monocromo

Importante





Lea las instrucciones de uso y el manual de instalación antes de usar el dispositivo.

- Consulte el manual de instalación para ver la configuración y los ajustes del monitor.
- Encontrará la información más reciente del producto, incluidas las instrucciones de uso, en nuestro sitio web.

www.eizoglobal.com

SÍMBOLOS

En este manual y en este producto se utilizan los símbolos de seguridad que aparecen a continuación. El significado de estos símbolos es importante. Lea con atención la información siguiente.

 ADVERTENCIA	Hacer caso omiso de la información contenida en una ADVERTENCIA puede provocar lesiones graves y poner en riesgo la vida.
 PRECAUCIÓN	Hacer caso omiso de la información contenida en una PRECAUCIÓN puede provocar lesiones leves y/o daños materiales o en el producto.
	Indica una advertencia o precaución.
	Indica una acción no permitida.

Este producto se ha adaptado específicamente para su uso en la región a la que se ha enviado originalmente.

Si se usa fuera de dicha zona, es posible que el producto no funcione con arreglo a lo indicado en las especificaciones.

No se permiten la reproducción, el almacenamiento en cualquier sistema de recuperación de información ni la transmisión en forma alguna o a través de medios electrónicos, mecánicos o de cualquier otro tipo de ninguna parte de este manual sin el consentimiento previo por escrito de EIZO Corporation.

EIZO Corporation no tiene ninguna obligación de mantener la confidencialidad del material o de la información suministrados, salvo que así se acuerde previamente en función de la recepción de dicha información por parte de EIZO Corporation. Aunque se ha hecho todo lo posible por garantizar que la información contenida en este manual esté actualizada, es preciso tener en cuenta que las especificaciones del producto EIZO están sujetas a cambios sin previo aviso.

PRECAUCIONES

Importante







Este producto se ha adaptado específicamente para su uso en la región a la que se ha enviado originalmente. Si se usa fuera de dicha zona, es posible que el producto no funcione con arreglo a lo indicado en las especificaciones.

Para garantizar su seguridad y un mantenimiento adecuado, lea atentamente la sección de "PRECAUCIONES" y las precauciones relativas al monitor.

Símbolos que aparecen en el producto

Símbolo	Este símbolo indica
	Interruptor de alimentación principal: Presione este botón para apagar la alimentación principal del monitor.
	Interruptor de alimentación principal: Presione este botón para encender la alimentación principal del monitor.
	Botón de alimentación: Presione para encender o apagar la alimentación del monitor.
	Corriente alterna
	Tensión peligrosa
	PRECAUCIÓN
	Marcado RAEE: Los productos deberán eliminarse por separado; los materiales pueden reciclarse.
	Marcado EC: Marca de conformidad de la UE de acuerdo con las disposiciones de la Directiva o Reglamento del Consejo (UE).
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Precaución: la ley federal (EE. UU.) establece que este dispositivo solo se puede vender por un profesional médico autorizado o por orden de este.
EU Importer	Importador en la UE
	Marcado UKCA: Marca que indica el cumplimiento de los reglamentos del Reino Unido.
	Persona responsable en el Reino Unido
	Representante autorizado en Suiza
	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Identificador de dispositivo único
	Dispositivo médico *La aplicabilidad a los dispositivos médicos varía según el país.
	Símbolo de reciclaje para el cartón ondulado utilizado para envases
	Símbolo de reciclaje

PRECAUCIONES

Símbolo	Este símbolo indica
	Etiquetado de materiales de cartón ondulado según la directiva europea relativa a los residuos de envases
	Límite máximo de apilamiento (el número del símbolo varía según el producto).
	Este lado hacia arriba
	Mantener seco
	Frágil
	Consulte las instrucciones de uso.

ADVERTENCIA **ADVERTENCIA**

Si la unidad empieza a echar humo, huele a quemado o hace ruidos extraños, desconecte inmediatamente todas las conexiones de alimentación y póngase en contacto con el representante de EIZO.

Intentar utilizar una unidad defectuosa puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

 **ADVERTENCIA**

No desmonte ni modifique la unidad.

Abrir la carcasa podría provocar una descarga eléctrica o quemaduras causadas por la alta tensión o la alta temperatura de las piezas. Modificar la unidad podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

 **ADVERTENCIA**

Todas las reparaciones necesarias debe realizarlas un técnico cualificado.

No intente reparar este producto por su cuenta, puesto que abrirlo o quitar las cubiertas podría causar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

 **ADVERTENCIA**

Mantenga los líquidos y los objetos extraños alejados de la unidad.

Si alguna pieza metálica, material inflamable o líquido penetrara accidentalmente en la carcasa, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

Si algún objeto o líquido caen dentro de la unidad, desconéctela inmediatamente. Asegúrese de que un técnico cualificado revise la unidad antes de volver a utilizarla.

 **ADVERTENCIA**

Coloque la unidad en un lugar sólido y estable.

Si la unidad se coloca sobre una superficie inadecuada, puede caerse y provocar lesiones.

Si la unidad se cae al suelo, desconéctela inmediatamente y póngase en contacto con el representante local de EIZO. No siga utilizando una unidad dañada. Si usa una unidad dañada, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

Utilice la unidad en una ubicación adecuada.

De lo contrario, pueden producirse incendios, descargas eléctricas o daños en el equipo.

- No la instale al aire libre.
- No la instale en ningún medio de transporte (barco, avión, tren, automóvil, etc.).
- No la instale en entornos húmedos o polvorientos.
- No la instale en lugares en los que la pantalla pueda sufrir salpicaduras (baño, cocina, etc.).
- No la instale en lugares en los que el vapor de agua esté en contacto directo con la pantalla.
- No la instale cerca de humidificadores ni de aparatos que generen calor.
- No la instale en lugares en los que el producto reciba luz solar directa.
- No la instale en entornos con gas inflamable.
- No la instale en entornos con gases corrosivos (como dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, dióxido de nitrógeno, cloro, amoníaco y ozono).
- No la instale en entornos con polvo, componentes que aceleran la corrosión en la atmósfera (como cloruro de sodio y azufre), metales conductores, etc.



ADVERTENCIA

Mantenga las bolsas de plástico del embalaje fuera del alcance de los niños.

Las bolsas de plástico del embalaje pueden causar asfixia.

ADVERTENCIA

Utilice el cable de alimentación que acompaña al equipo y conéctelo a la toma de corriente estándar de su país.

Asegúrese de no superar la tensión nominal del cable de alimentación. De lo contrario, podrían producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Alimentación eléctrica: 100-240 VCA 50/60 Hz

ADVERTENCIA

Para desconectar el cable de alimentación, sujete el enchufe con firmeza y tire de él.

Si tira directamente del cable, puede dañarlo y provocar un incendio o una descarga eléctrica.













ADVERTENCIA

El equipo debe conectarse a una toma de corriente con toma de tierra.

De lo contrario, se pueden producir un incendio o una descarga eléctrica.



 ADVERTENCIA	
Utilice la tensión adecuada.	
<ul style="list-style-type: none"> • Esta unidad ha sido diseñada para su uso exclusivo con una tensión determinada. Si se conecta a una tensión distinta de la especificada en estas "Instrucciones de uso", puede provocarse un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo. Alimentación eléctrica: 100-240 VCA 50/60 Hz • No sobrecargue el circuito de alimentación, ya que ello podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. 	
 ADVERTENCIA	
Maneje el cable de alimentación con cuidado.	
No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, ni tampoco lo ate ni tire de él. Si usa un cable de alimentación dañado, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.	
 ADVERTENCIA	
El operario no debería tocar al paciente mientras toca el producto.	
Este producto no se ha diseñado para que lo toquen los pacientes.	
 ADVERTENCIA	
No toque nunca el enchufe ni el cable de alimentación si empiezan a caer truenos.	
De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica.	
 ADVERTENCIA	
Para instalar un soporte con brazo, consulte el Manual del usuario del soporte y coloque la unidad de forma segura.	
De lo contrario, la unidad se podría soltar y podrían producirse lesiones o daños en el equipo.	
Antes de la instalación, asegúrese de que los escritorios, las paredes y demás superficies tengan la suficiente resistencia mecánica.	
Si la unidad se cae al suelo, desconéctela inmediatamente y póngase en contacto con el representante local de EIZO. No siga utilizando una unidad dañada. Si usa una unidad dañada, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Para volver a instalar el soporte inclinable, utilice los mismos tornillos y apriételes con firmeza.	
 ADVERTENCIA	
No toque con las manos desnudas un panel LCD que haya sufrido daños.	
Si alguna parte de la piel entra en contacto directo con el panel, lávese a fondo.	
Si el cristal líquido entra en contacto con los ojos o la boca, lávese inmediatamente con abundante agua y solicite atención médica. De lo contrario, podría sufrir una reacción tóxica.	

PRECAUCIONES



ADVERTENCIA

Para instalarlo en lugares elevados, solicite la ayuda de un profesional.

Al instalar el monitor en un lugar elevado, existe el riesgo de que el producto o alguna de sus piezas caigan y provoquen lesiones. Solicite nuestra ayuda o la de un profesional especializado en trabajos de construcción al instalar el monitor, incluida una inspección del producto en busca de daños o deformidades tanto antes como después de instalar el monitor.

PRECAUCIÓN **PRECAUCIÓN****Compruebe el estado operativo antes de usar la unidad.**

Inicie su uso después de asegurarse de que no hay problemas con la imagen visualizada.

Cuando utilice múltiples unidades, inicie su uso después de asegurarse de que las imágenes se visualizan correctamente.

 **PRECAUCIÓN****Fije de forma segura los cables que dispongan de una opción de fijación.**

Si no se fijan de forma segura, los cables podrían desconectarse y, por tanto, las imágenes podrían cortarse y sus operaciones podrían quedar interrumpidas.



 **PRECAUCIÓN****Desconecte los cables y retire los accesorios al trasladar la unidad.**

De lo contrario, los cables o los accesorios podrían soltarse durante el traslado, lo que podría causar lesiones.

 **PRECAUCIÓN****Traslade o instale la unidad conforme a los métodos especificados.**

- Cuando desplace el producto, sujete con firmeza la parte inferior del monitor.
- Los monitores de 30 pulgadas o más son pesados. Al desempaquetar y/o transportar el monitor, asegúrese de que lo hacen al menos dos personas.
- Si su modelo de dispositivo dispone de un asa en la parte posterior del monitor, utilícela y sujete con firmeza el asa y la parte inferior del monitor.

Si la unidad se cae, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

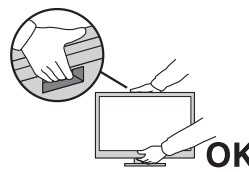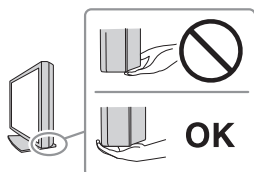 **PRECAUCIÓN****Proceda con cuidado para no pellizcarse las manos.**

Si aplica fuerza sobre el monitor de forma repentina para ajustar su altura o ángulo, podría pellizcarse las manos y sufrir lesiones.











 **PRECAUCIÓN****No tape las ranuras de ventilación del aparato.**

- No coloque ningún objeto sobre las ranuras de ventilación.
- No instale la unidad en un lugar con mala ventilación o en un espacio inadecuado.
- No utilice la unidad en posición tumbada ni boca abajo.

Cubrir las ranuras de ventilación impide la adecuada circulación del aire y podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.



PRECAUCIONES

 PRECAUCIÓN
<p>No toque el enchufe de corriente con las manos mojadas. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica.</p>  
 PRECAUCIÓN
<p>No coloque ningún objeto alrededor del enchufe de corriente. De este modo, podrá desconectar el enchufe de corriente fácilmente en caso de que haya algún problema para evitar un incendio o una descarga eléctrica.</p> 
 PRECAUCIÓN
<p>Limpie periódicamente la zona alrededor del enchufe de corriente y la ranura de ventilación del monitor. El polvo, el agua o el aceite adheridos en esta zona pueden provocar un incendio.</p>
 PRECAUCIÓN
<p>Desenchufe la unidad antes de limpiarla. Si limpia la unidad mientras está conectada a una toma de corriente, puede sufrir una descarga eléctrica.</p>
 PRECAUCIÓN
<p>Por razones de seguridad y para ahorrar energía, si tiene previsto no utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, apáguela y desconecte el enchufe de corriente de la toma de corriente.</p>
 PRECAUCIÓN
<p>Deseche este producto cumpliendo la legislación de la localidad o el país de residencia.</p>
 PRECAUCIÓN
<p>Para usuarios dentro del territorio del Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza: Informe de cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo al Fabricante y la Autoridad competente del Estado Miembro en el que reside el usuario o paciente.</p>

Aviso sobre este monitor

Indicaciones de uso

Este producto está diseñado para usarse en imágenes radiológicas clínicas (lo que incluye la mamografía digital de campo completo y la tomosíntesis digital de seno), para su revisión, análisis y diagnóstico por parte de profesionales médicos capacitados.

Atención

- Las imágenes mamográficas con compresión con pérdida no deben revisarse para interpretar las imágenes primarias.
Las imágenes mamográficas solo se pueden interpretar con una pantalla aprobada por la FDA que cumpla con las especificaciones técnicas revisadas y aceptadas por la FDA.
- Este producto no ha sido diseñado para un uso de diagnóstico in vitro.
- Si el producto se usa con fines distintos de los descritos en este manual, podría perderse la cobertura de la garantía.
- Las especificaciones estipuladas en este manual solo se aplican al usar los cables de alimentación suministrados con el producto y los cables de señal especificados por EIZO.
- Con este producto deben usarse únicamente los accesorios y productos EIZO especificados por EIZO.

Precauciones de uso

- Algunas piezas (como el panel LCD y el ventilador) pueden deteriorarse si se utilizan durante largos períodos de tiempo. Compruebe periódicamente que funcionan con normalidad.
- Cuando se cambia en pantalla la imagen que se ha estado visualizando durante un periodo de tiempo prolongado, es posible que permanezca una imagen. Utilice el salvapantallas o la función de ahorro de energía para evitar que la misma imagen se vea en pantalla durante periodos prolongados. Esta imagen persistente podría aparecer incluso después de un breve tiempo, en función de su naturaleza. Para eliminar este tipo de fenómenos, cambie la imagen o mantenga el botón de alimentación apagado durante varias horas.
- Son necesarios varios minutos para que la visualización del monitor se estabilice. Antes de utilizar el monitor, espere unos minutos o más después de encender la alimentación o después de activar el monitor a partir del modo de ahorro de energía.
- Si el monitor está en funcionamiento continuo durante un largo período de tiempo, pueden aparecer manchas o quemaduras. Para maximizar la vida útil del monitor, se recomienda apagarlo periódicamente.
- La luz de fondo del panel LCD tiene una vida útil fija. Según el patrón de uso, como el funcionamiento continuo durante largos períodos de tiempo, es posible que la vida útil de la luz de fondo se agote antes, por lo que requerirá una sustitución. Cuando la pantalla se oscurezca o comience a parpadear, póngase en contacto con el representante local de EIZO.
- La pantalla puede tener píxeles defectuosos o un número reducido de puntos luminosos. Esto se debe a las características del panel LCD en sí y no es un mal funcionamiento del producto.
- No ejerza una presión fuerte sobre la superficie o el marco exterior del panel LCD, ya que podría provocar fallos en la visualización, como patrones de interferencia, etc. Una presión constante aplicada sobre el panel LCD puede deteriorar el cristal líquido o dañar el panel. Si quedan marcas de presión en el panel LCD, deje el monitor con una pantalla blanca o negra; puede que el síntoma desaparezca.

- No arañe ni presione el panel LCD con objetos afilados, ya que esto podría dañarlo. No intente limpiar el panel con pañuelos de papel, ya que podría rayarlo.
- No toque el sensor de calibración incorporado (Sensor delantero integrado). De lo contrario, podría reducir la precisión de la medición o provocar daños en el equipo.
- El valor medido por el sensor de iluminancia integrado podría diferir del valor que se muestra en un luminómetro independiente según el entorno.
- Se puede formar condensación en la superficie o el interior de este producto cuando se coloca en una habitación fría, cuando la temperatura aumenta de forma repentina o cuando se traslada de una habitación fría a una caliente. En tal caso, no encienda el producto. En lugar de ello, espere a que desaparezca la condensación; de lo contrario, podrían producirse daños en el producto.

Uso del monitor durante periodos de tiempo prolongados

Control de calidad

- La calidad de visualización de los monitores depende del nivel de calidad de las señales de entrada y la degradación del producto. Realice pruebas de aceptación, comprobaciones visuales y pruebas de estabilidad periódicas (incluida la comprobación de escala de grises) para cumplir con los estándares/directrices médicos según su aplicación y lleve a cabo la calibración cuando sea necesario. El software de control de calidad del monitor RadiCS (opcional) le permite llevar a cabo un control de calidad que cumpla con los estándares/directrices médicos. Además, el software simplificado de control de calidad del monitor RadiCS LE también se puede utilizar para realizar calibraciones y gestionar su historial. Puede descargar RadiCS LE de nuestro sitio web. (www.eizoglobal.com)
- Espere 15 minutos o más después de encender el monitor o de activarlo a partir del modo de ahorro de energía antes de realizar pruebas de control de calidad, calibraciones o ajustes de pantalla.
- Se recomienda ajustar el brillo de los monitores al nivel recomendado o más bajo con el fin de reducir los cambios en la luminosidad provocados por el uso prolongado y para mantener un brillo estable.
- Para ajustar los resultados de medición del sensor de calibración integrado (Sensor delantero integrado) a los del sensor externo opcional, realice correlaciones entre el Sensor delantero integrado y el sensor externo utilizando RadiCS/RadiCS LE. Las correlaciones periódicas le permiten mantener el resultado de medición del Sensor delantero integrado en un nivel equivalente al del sensor externo. La precisión del Sensor delantero integrado de este producto está optimizada para la visualización vertical en la configuración de fábrica. Al realizar el control de calidad con el Sensor delantero integrado en una visualización horizontal, asegúrese de realizar la correlación en esta visualización. Para obtener más información sobre la correlación, consulte las instrucciones de uso del RadiCS/RadiCS LE.
- Para garantizar que las mediciones del sensor de iluminancia incorporado sean equivalentes a las de un medidor de iluminancia, utilice RadiCS/RadiCS LE para realizar la correlación del sensor de iluminancia. Para obtener más información sobre la correlación del sensor de iluminancia, consulte las instrucciones de uso del RadiCS/RadiCS LE.

Atención
<ul style="list-style-type: none">• El estado de visualización del monitor puede cambiar inesperadamente debido a un error de funcionamiento o un cambio inesperado en los ajustes. Una vez ajustada la pantalla del monitor, se recomienda utilizarlo con los interruptores de funcionamiento bloqueados. Para obtener información detallada sobre la configuración, consulte el Manual de instalación.

Limpieza

- Se recomienda realizar una limpieza periódica para mantener el producto como nuevo y prolongar su vida útil.
- Limpie suavemente la suciedad del producto con un poco de agua o con un paño suave humedecido con un detergente suave diluido en agua.

Atención

- No utilice nunca disolventes, benceno, cera ni limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar el producto.
- El uso de alcohol u otros productos químicos para la desinfección puede provocar grietas, cambios en el brillo, alteraciones en el color, decoloración o deterioro de la calidad de la imagen de la pantalla. Tenga cuidado con los siguientes puntos durante el uso del producto.
 - No permita que el producto entre en contacto directo con agentes químicos.
 - No utilice toallitas húmedas que hayan sido impregnadas con una solución química, ya que pueden contener mucho líquido.
 - No permita que se introduzcan productos químicos por los huecos del producto o dentro del mismo.
- Para obtener más información sobre limpieza y desinfección, consulte nuestro sitio web. Cómo buscar: Acceda a www.eizoglobal.com y escriba "disinfect" en el cuadro de búsqueda del sitio

Desinfección con productos químicos

- Use un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora para limpiar suavemente. Para desinfectar el producto, se recomienda utilizar productos químicos que hayan sido probados por EIZO (véase la tabla siguiente). Tenga en cuenta que, aunque se utilicen estos productos químicos, no hay garantía de que el producto no se dañe o deteriore.

Clasificación	Tipo de producto químico	Concentración
Alcoholes	Etanol	70 v/v%
Alcoholes	Isopropanol	70 v/v%
Basados en el cloro	Hipoclorito de sodio	0,1 %
Surfactantes anfóteros	Hidrocloruro de alquildiaminoetilglicina	0,2 %
Sal de amonio cuaternario	Cloruro de benzalconio	0,2 %
Biguanida	Gluconato de clorhexidina	0,1 %
Agente oxidante	Solución de peróxido de hidrógeno acelerado	0,5 %

Para un uso cómodo del monitor

- Una pantalla demasiado oscura o brillante puede afectar a sus ojos. Ajuste el brillo del monitor según las condiciones ambientales.
- Mirar el monitor durante periodos prolongados de tiempo cansa la vista. Haga una pausa de 10 minutos cada hora.
- Mire la pantalla desde la distancia y el ángulo adecuados.

Advertencias de ciberseguridad y responsabilidades

- La actualización del firmware debe llevarse a cabo a través de EIZO Corporation o de su distribuidor.

- Si EIZO Corporation o su distribuidor le indican que debe actualizar el firmware, hágalo inmediatamente.

ÍNDICE

PRECAUCIONES	3
Importante	3
Símbolos que aparecen en el producto	3
ADVERTENCIA.....	5
PRECAUCIÓN	9
Aviso sobre este monitor	11
Indicaciones de uso	11
Precauciones de uso.....	11
Uso del monitor durante periodos de tiempo prolongados	12
Control de calidad	12
Limpieza.....	13
Desinfección con productos químicos	13
Para un uso cómodo del monitor	13
Advertencias de ciberseguridad y responsabilidades	13
1 Introducción	17
1.1 Características	17
1.1.1 Cableado sencillo.....	17
1.1.2 Control de calidad	17
1.1.3 Equipado con la función de carga rápida del USB Type-C® (en adelante USB-C®)	18
1.1.4 Diseño para ahorrar espacio.....	18
1.1.5 Uso del monitor con el ratón y el teclado.....	18
1.2 Contenido del paquete	19
1.2.1 EIZO LCD Utility Disk.....	19
1.3 Controles y funciones.....	20
1.3.1 Parte delantera	20
1.3.2 Parte trasera	21
2 Instalación y conexión	23
2.1 Antes de la instalación	23
2.1.1 Condiciones de instalación	23
2.2 Conexión de los cables	24
2.3 Encendido	26
2.4 Ajuste de la altura y el ángulo de la pantalla.....	27
3 No aparece ninguna imagen	28
4 Especificaciones	30
4.1 Lista de especificaciones	30
4.1.1 Tipo	30
4.1.2 Panel LCD.....	30

4.1.3	Señales de vídeo	30
4.1.4	USB.....	31
4.1.5	Alimentación	31
4.1.6	Especificaciones físicas	31
4.1.7	Requisitos ambientales de operación	31
4.1.8	Condiciones de transporte y almacenamiento.....	31
4.2	Resoluciones compatibles	32
4.3	Accesorios.....	32
	Apéndice	33
	Estándar médico	33
	Clasificación del equipo	33
	Información sobre compatibilidad electromagnética (CEM).....	34
	Entornos de uso previsto	34
	Descripciones técnicas	35

1 Introducción


Gracias por haber elegido un monitor LCD monocromo de EIZO.

1.1 Características

1.1.1 Cableado sencillo

Además de un terminal de entrada DisplayPort™, se proporciona también un terminal de salida.

Desde el terminal de salida (DP), es posible enviar una señal a otro monitor.

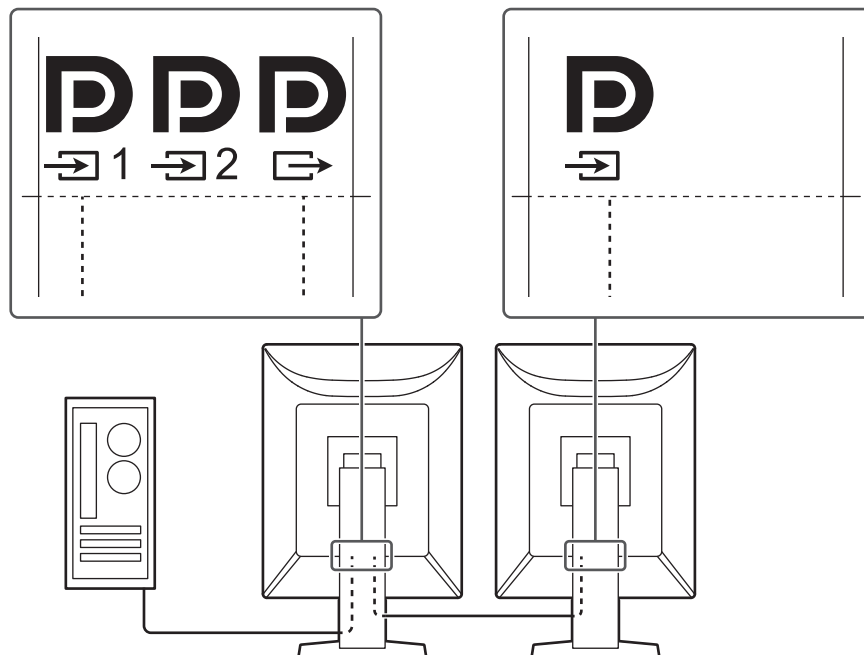

1.1.2 Control de calidad


- El monitor tiene un sensor de calibración incorporado (Sensor delantero integrado). Este sensor permite al monitor realizar la calibración (SelfCalibration) y la Compr. esc. grises por separado.



- El software de control de calidad del monitor RadiCS le permite llevar a cabo un control de calidad, una calibración y una gestión del historial que cumpla con los estándares/directrices médicos.


1.1.3 Equipado con la función de carga rápida del USB Type-C® (en adelante USB-C®)

Esta función le permite recargar el smartphone o tableta en muy poco tiempo.

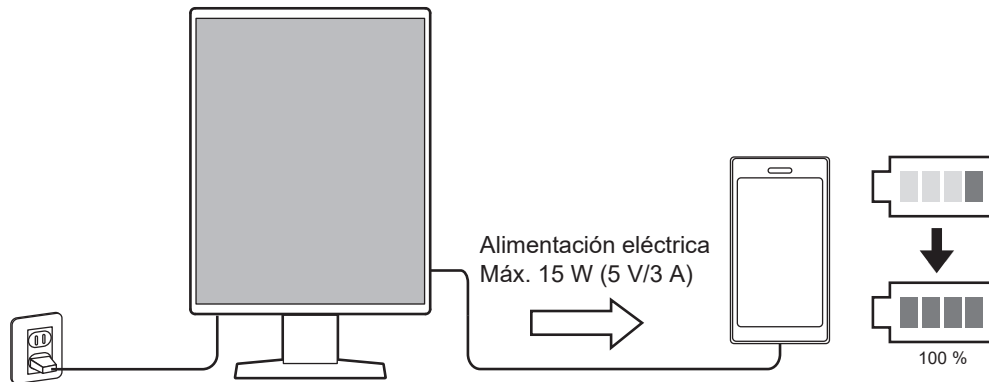

1.1.4 Diseño para ahorrar espacio

Hay varios conectores USB (de carga) disponibles. Puede utilizar varios PC con un mismo conjunto de dispositivos USB (ratón, teclado, etc.).

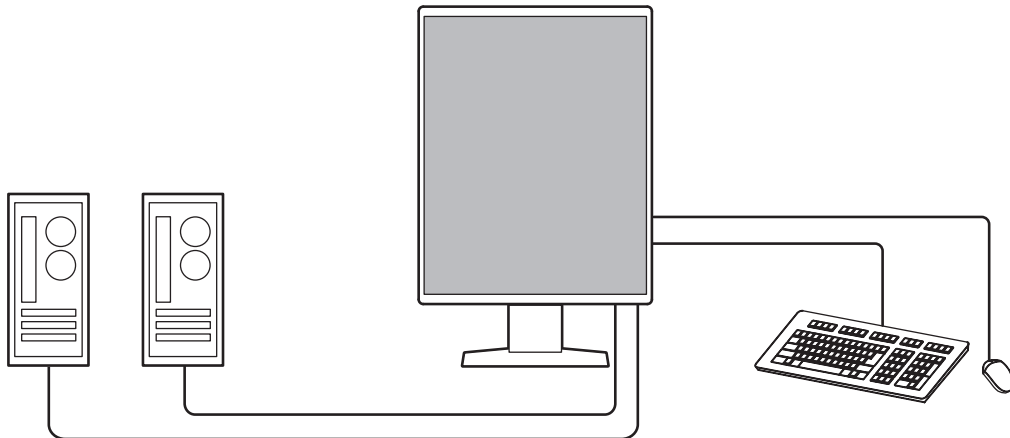

Atención

- El producto incluye un cable de señal y un cable USB. Cuando se conecte según lo descrito anteriormente, prepare el número requerido por separado.

1.1.5 Uso del monitor con el ratón y el teclado

Con el software de control de calidad del monitor RadiCS/RadiCS LE puede realizar las siguientes operaciones del monitor con el ratón y el teclado:

- Cambiar los modos CAL Switch
- Cambiar las señales de entrada
- Función que asigna cualquier modo CAL Switch a una parte de la pantalla y muestra una imagen (Point-and-Focus)
- Cambiar los PC que utilizan los dispositivos USB (Switch-and-Go)
- Pasar al modo de ahorro de energía (Backlight Saver)
- Una función que aumenta temporalmente el brillo para mejorar la visibilidad de las imágenes diagnósticas (Instant Backlight Booster)

1.2 Contenido del paquete

Compruebe que todos los elementos siguientes estén incluidos en el paquete. Si falta alguno o cualquiera de ellos presenta daños, póngase en contacto con su distribuidor o un representante local de EIZO.

Nota

- Se recomienda guardar la caja y los materiales de embalaje para poder utilizarlos en caso de tener que mover o transportar el producto.

- Monitor
- Cable de alimentación



- Cable de señal digital (DisplayPort - DisplayPort): PP300



- Cable USB 2.0 (USB-A - USB-B): UU300



- EIZO LCD Utility Disk
- Instrucciones de uso


1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

El disco contiene los elementos siguientes. Consulte "Readme.txt" en el disco para obtener instrucciones sobre cómo hacer referencia a cada elemento.

- Archivo Readme.txt
- Instrucciones de uso
 - Instrucciones de uso de este monitor
 - Manual de instalación del monitor
- Dimensiones exteriores


1.3 Controles y funciones

1.3.1 Parte delantera

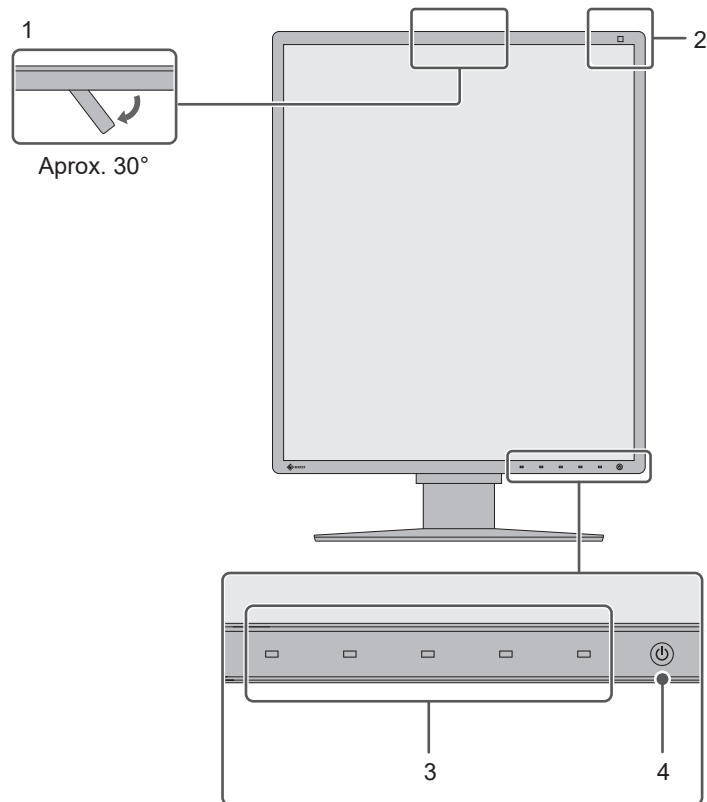

1. Sensor delantero integrado (móvil)	Este sensor se emplea para realizar la calibración y la Compr. esc. grises.
2. Sensor de iluminancia	Este sensor mide la iluminación del entorno. La medición de la iluminación del entorno se lleva a cabo mediante el software de control de calidad RadiCS/RadiCS LE.
3. Interruptores de funcionamiento	Muestra la guía de funcionamiento. Configure los menús de acuerdo con la guía de funcionamiento.
4. Interruptor de alimentación	<p>Enciende o apaga la unidad.</p> <p>El indicador del interruptor se enciende cuando se conecta la alimentación. El color del indicador varía según el estado operativo del monitor.</p> <p>Verde: modo de funcionamiento normal; Naranja: modo de ahorro de energía, apagado: alimentación principal o alimentación apagada</p>

1.3.2 Parte trasera

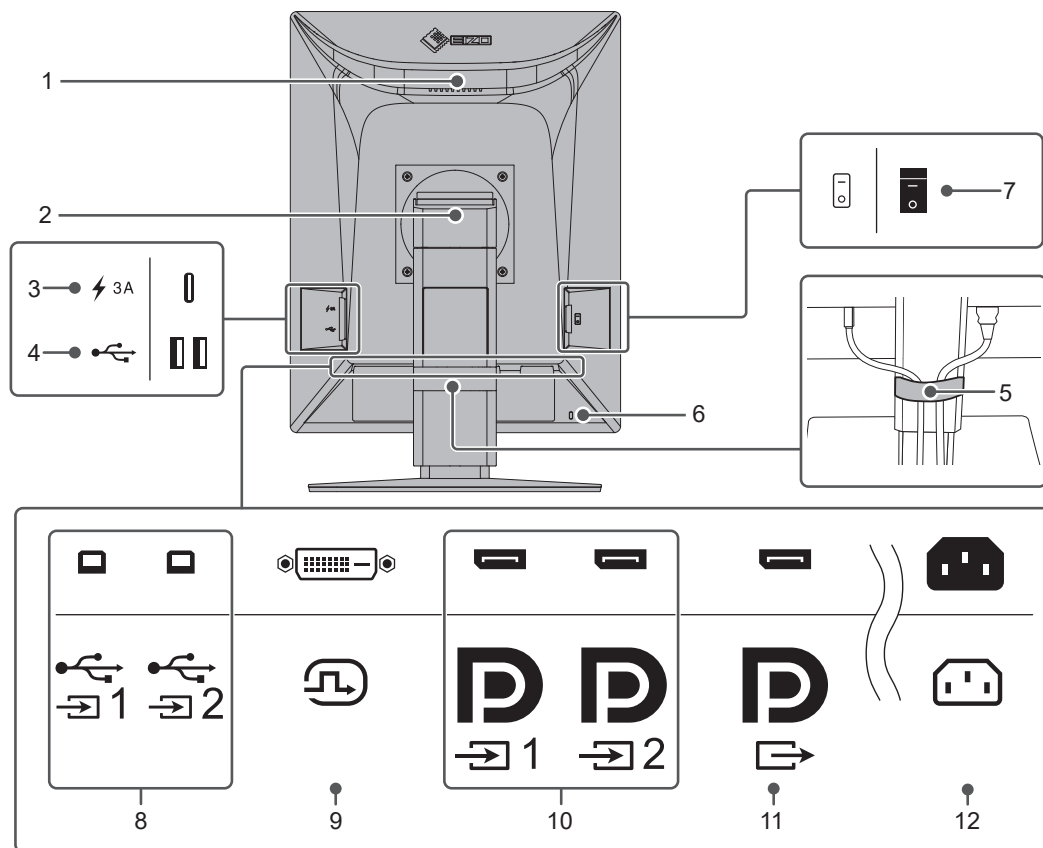

<p>1. Asa</p>	<p>Esta asa se utiliza para el transporte.</p> <p>Atención</p> <ul style="list-style-type: none"> Sujete firmemente el monitor por la parte inferior mientras agarra el asa mientras lo transporta. No ejerza presión en el panel LCD ni deje caer el monitor. No lo sujete por la sección del sensor, en el lado delantero.
<p>2. Soporte</p>	<p>Ajusta la altura y el ángulo (inclinación, giro o rotación) del monitor.</p>
<p>3. Conector USB-C (solo carga rápida)</p>	<p>Puede conectar y cargar un smartphone o tableta.</p> <p>Atención</p> <ul style="list-style-type: none"> No admite señales de vídeo ni comunicación de datos
<p>4. Conector USB-A (conexión de flujo descendente)</p>	<p>Se conecta a un dispositivo USB. Para establecer una conexión en cadena margarita, conecte el cable al puerto USB de conexión de flujo ascendente de otro monitor.</p>
<p>5. Portacables</p>	<p>Ayuda a tener los cables organizados.</p>
<p>6. Ranura de bloqueo de seguridad</p>	<p>Admite el sistema de seguridad MicroSaver de Kensington.</p>
<p>7. Interruptor de alimentación principal</p>	<p>Enciende o apaga la alimentación principal.</p> <p>○ : apagada, : encendida</p>
<p>8. Conector USB-B (conexión de flujo ascendente)</p>	<p>Se conecta a un PC cuando se utiliza un software que necesita una conexión USB o cuando se utiliza la función de hub del USB de este producto.</p>
<p>9. Conector DVI-D</p>	<p>Se conecta a un PC con salida DVI.</p>
<p>10. Conector de entrada DisplayPort</p>	<p>Se conecta a un PC con salida DisplayPort.</p>

11. Conector de salida DisplayPort	Para establecer una conexión en cadena margarita, conecte el cable al conector de entrada DisplayPort de otro monitor.
12. Conector de alimentación	Conecta el cable de alimentación.

2 Instalación y conexión

2.1 Antes de la instalación

Lea atentamente las [PRECAUCIONES \[► 3\]](#) y siga siempre las instrucciones.

Si instala este producto sobre un escritorio lacado, el color puede adherirse a la parte inferior del soporte debido a la composición de la goma. Compruebe la superficie del escritorio antes de usarlo.

2.1.1 Condiciones de instalación

Cuando instale el monitor en un estante, asegúrese de que haya suficiente espacio a los lados, detrás y encima del monitor.

Atención
<ul style="list-style-type: none">• Coloque el monitor de forma que la luz no interfiera con la pantalla.


2.2 Conexión de los cables

Atención

- Compruebe que el monitor, el PC y los periféricos están apagados.
- Si sustituye su monitor actual por este otro, vea [4.2 Resoluciones compatibles \[p. 32\]](#) para cambiar en el PC los valores de configuración de la resolución y la frecuencia de barrido vertical por los que estén disponibles para este monitor antes de proceder a la conexión del PC.
- Si resulta difícil insertar los cables, ajuste el ángulo de la pantalla.

1. Conecte los cables de señal.

Compruebe las formas de los conectores y conecte los cables. Una vez conectado el cable DVI, apriete los elementos de sujeción para fijar el conector.

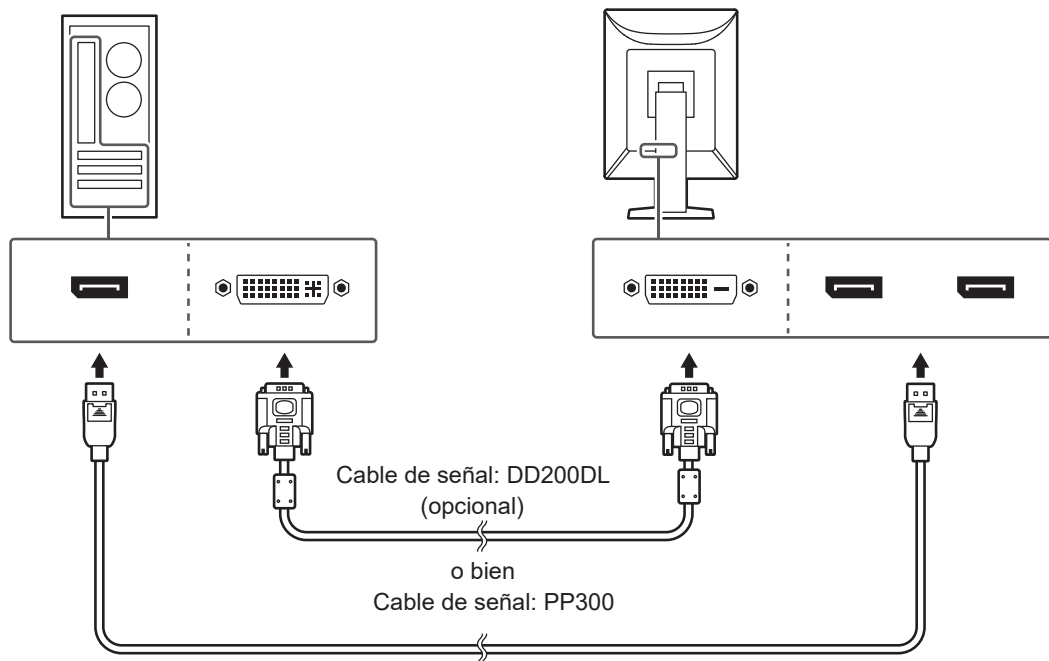

Atención


- Los conectores DisplayPort del monitor cuentan con conectores de entrada y salida. Cuando conecte el monitor a un PC, conecte el cable al conector de entrada.
- Cuando conecte a varios PC, cambie la señal de entrada. Para obtener más detalles, consulte el Manual de instalación.

Nota

- Si resulta difícil insertar los cables, ajuste el ángulo de la pantalla.

Al conectar otros monitores mediante una conexión en cadena margarita


La señal de entrada al conector DisplayPort 1 puede salir a otro monitor.

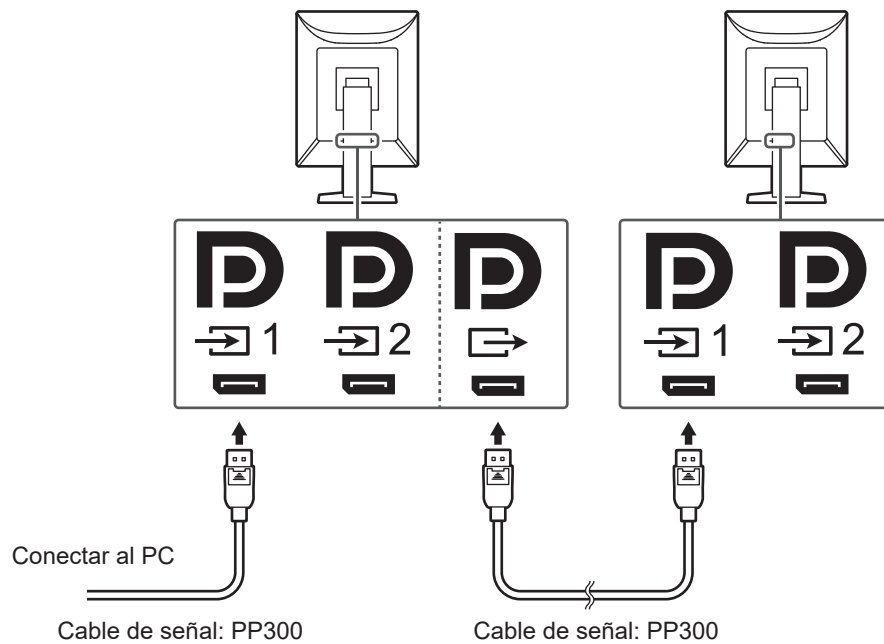

Atención

- Visite el sitio web de EIZO para obtener más información sobre los monitores y tarjetas gráficas que pueden utilizarse para una conexión en cadena margarita: (www.eizoglobal.com)
- Cuando utilice una conexión en cadena margarita, conecte el cable al conector de entrada **DP1**.
- Para establecer una conexión en cadena margarita, debe seleccionar "Formato de señal" - "DisplayPort 1" en el menú Configuración del administrador y ajustar "Versión" en "1.2". Para obtener más detalles, consulte el Manual de instalación.
- Retire la tapa del conector de salida **DP2** antes de conectar el cable de señal.

2. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente y al conector de alimentación del monitor.
Inserte completamente el cable de alimentación en el monitor.
3. Si utiliza RadiCS/RadiCS LE o conecta dispositivos USB (periférico compatible con USB) al monitor, conecte un cable USB 2.0 del conector USB-B del monitor al conector USB-A del PC.

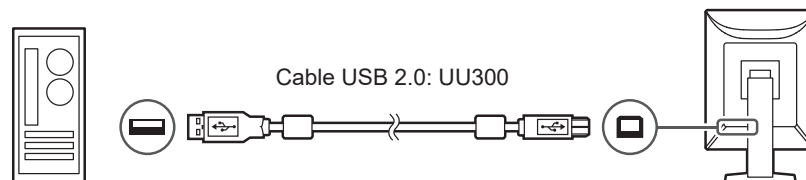


Atención


- Si conecta el monitor a un PC en el que se haya instalado RadiCS/RadiCS LE, conecte el cable a USB-B 1 (**USB1**).
- Cuando utilice el USB-B 2 (**USB2**), retire la tapa antes. Además, debe cambiar la configuración "Selección de USB" en el menú de ajustes (vea "Selección de USB" en el manual de instalación).

Nota

- Al conectar dos PC a dos monitores, como se muestra en la siguiente figura, puede cambiar qué PC utiliza los dispositivos USB.
- El producto solo incluye un cable USB 2.0 (UU300). Para realizar la conexión como se muestra en la siguiente figura, prepare la cantidad necesaria de cables por separado.
- Para obtener más información sobre cómo alternar entre los PC que utilizan los dispositivos USB, consulte el Manual de instalación.

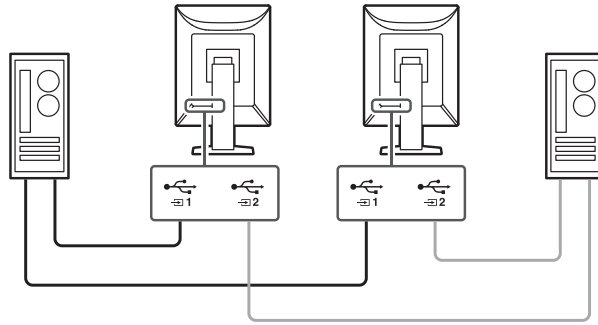



2.3 Encendido

1. Pulse  para encender el monitor.

El indicador del interruptor de alimentación del monitor se enciende en verde.

Si el indicador no se enciende, vea [3 No aparece ninguna imagen \[▶ 28\]](#).

Nota

- Si con el monitor apagado toca cualquiera de los interruptores de funcionamiento, excepto ,  empieza a parpadear para indicarle dónde está el interruptor de alimentación.

2. Encienda el PC.

Aparece la imagen de pantalla.

Si no aparece ninguna imagen, vea [3 No aparece ninguna imagen \[▶ 28\]](#) para obtener más información.

Atención


- Al conectar por primera vez o cambiar el método de conexión, algunos ajustes de visualización, como la resolución y la escala, pueden no ser los apropiados. Asegúrese de que el PC esté configurado correctamente.
- Se recomienda apagar el monitor por medio del botón de alimentación para ahorrar energía. Cuando no utilice el monitor, puede apagarlo o desconectarlo del enchufe de corriente de forma que se corte la alimentación eléctrica completamente.

Nota

- Para maximizar la vida útil del monitor, evitar la degradación del brillo y reducir el consumo eléctrico, lleve a cabo lo siguiente:
 - Use la función de ahorro de energía del PC o el monitor.
 - Cuando haya terminado de utilizar el monitor, apáguelo.

2.4 Ajuste de la altura y el ángulo de la pantalla

Sujete con ambas manos los extremos superior e inferior o izquierdo y derecho del monitor para regular la altura, la inclinación y el giro de la pantalla, y conseguir la posición de trabajo óptima.

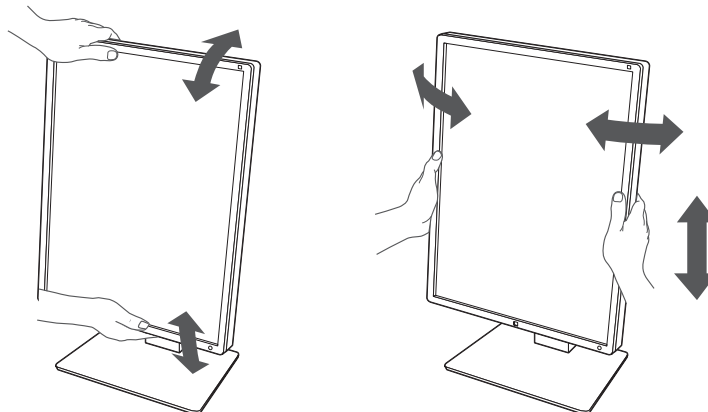


Atención

- Cuando se haya completado el ajuste, asegúrese de que los cables estén bien conectados.
- Después de ajustar la altura y la inclinación, introduzca los cables en el portacables.

3 No aparece ninguna imagen


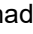
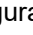
El indicador del interruptor de alimentación no se enciende

- Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente.
- Encienda el interruptor de alimentación principal del lado izquierdo.
- Toque .
- Desconecte el interruptor de alimentación principal del lado izquierdo y vuelva a conectarlo después de unos minutos.


El indicador del interruptor de alimentación se enciende: Verde

- Aumente los valores de ajuste para "Brillo" y "Contraste" (solo para el modo "4-Text") en el menú Configuración. Para obtener más detalles, consulte el Manual de instalación.
- Desconecte el interruptor de alimentación principal del lado izquierdo y vuelva a conectarlo después de unos minutos.

El indicador del interruptor de alimentación se enciende: Naranja

- Cambie la señal de entrada. Para obtener más detalles, consulte el Manual de instalación.
- Mueva el ratón o pulse cualquier tecla del teclado.
- Compruebe si el PC está encendido.
- Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. Conéctelo a  cuando se haya seleccionado "DisplayPort 1" y a  cuando se haya seleccionado "DisplayPort 2" en la señal de entrada.  se usa como salida cuando se configura una conexión en cadena margarita.
- Desconecte el interruptor de alimentación principal del lado izquierdo del monitor y vuelva a conectarlo.

El indicador del interruptor de alimentación parpadea: Naranja, Verde

- Establezca la conexión mediante el cable de señal especificado por EIZO. Desconecte el interruptor de alimentación principal del lado izquierdo del monitor y vuelva a conectarlo después de unos minutos.
- Si el cable de señal está conectado a DisplayPort 1 () , intente cambiar la versión de DisplayPort. Para obtener más detalles, consulte el Manual de instalación.

El mensaje "Señal no" aparece en pantalla


Ejemplo:



- Es posible que aparezca el mensaje mostrado anteriormente, ya que algunos PC no emiten la señal inmediatamente después de haberse encendido.
- Compruebe si el PC está encendido.
- Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. Conecte los cables de señal a los conectores de la señal de entrada correspondiente.
- Cambie la señal de entrada. Para obtener más detalles, consulte el Manual de instalación.
- Si el cable de señal está conectado a DisplayPort 1 (DP1), intente cambiar la versión de DisplayPort. Para obtener más detalles, consulte el Manual de instalación.
- Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. ¿El cable de señal está conectado a DP1 o DP2 para la entrada de la señal de DisplayPort? DP2 se utiliza para la salida cuando se establece una conexión en cadena margarita.
- Desconecte el interruptor de alimentación principal del lado izquierdo del monitor y vuelva a conectarlo.

El mensaje "Error de señal" aparece en pantalla

Ejemplo:

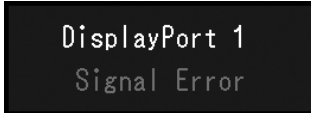

- Compruebe si el PC está configurado para satisfacer los requisitos de resolución y frecuencia de barrido vertical del monitor (vea [4.2 Resoluciones compatibles](#) [▶ 32]).
- Reinicie el PC.
- Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar la configuración adecuada. Consulte el manual de usuario de la tarjeta gráfica para obtener más información.

4 Especificaciones

4.1 Lista de especificaciones

4.1.1 Tipo

GX570	Antirreflejos
GX570-P	Emparejar Antirreflejos
GX570-MD	MammoDuo Antirreflejos
GX570-AR	Antirreflexión
GX570-AR-P	Emparejar Antirreflexión
GX570-AR-MD	MammoDuo Antirreflexión

4.1.2 Panel LCD

Tipo	Monocromo (IPS)
Luz de fondo	LED
Tamaño	21,3 " (54,1 cm)
Resolución	2048 puntos x 2560 líneas
Área de visualización (H x V)	337,9 mm x 422,4 mm
Tamaño de píxel (H x V)	0,165 mm x 0,165 mm
Gradación de pantalla	Visualización simultánea de 1024 gradaciones de un total de 16369 (cuando se establece "Sub Pixel Drive (Hor.)": "Apagado") Visualización simultánea de 1024 gradaciones de un total de 8185 (cuando se establece "Sub Pixel Drive (Hor.)": "Encendido")
Ángulo de visualización (H/V, típico)	178°/178°
Brillo recomendado	600 cd/m ² y 1000 cd/m ²
Relación de contraste (típica)	2200:1
Tiempo de respuesta (típico)	25 ms (negro -> blanco -> negro)

4.1.3 Señales de vídeo

Conectores de entrada		DisplayPort x 2, DVI-D (dual link) x 1
Terminales de salida		1 DisplayPort
Frecuencia de barrido horizontal		31 kHz – 135 kHz
Frecuencia de barrido vertical ^{*1}	DisplayPort	59 Hz – 61 Hz (720 x 400: 69 Hz – 71 Hz, 2048 x 2560 / 2560 x 2048: 23 Hz – 51 Hz)
	DVI	59 Hz – 61 Hz (720 x 400: 69 Hz – 71 Hz, 2048 x 2560 / 2560 x 2048: 24 Hz – 51 Hz)
Modo de sincronización de trama		23,5 Hz – 25,5 Hz, 47,0 Hz – 51,0 Hz
Reloj de puntos	DisplayPort	25 MHz – 290 MHz
	DVI	25 MHz – 290 MHz

^{*1} La frecuencia de barrido vertical que es compatible varía de acuerdo con la resolución. Para obtener más información, vea [4.2 Resoluciones compatibles](#) [▶ 32].

4.1.4 USB

Puertos	Conexión de flujo ascendente	USB-B x 2
	Conexión de flujo descendente	USB-A x 2
	Solo carga	USB-C x 1 ^{*1}
Estándar	Especificación USB revisión 2.0	
Corriente de suministro	Conexión de flujo descendente (USB-A)	Máx. 500 mA por puerto
	Solo carga rápida (USB-C)* ¹	Máx. 15 W (5 V/3 A)

*1 Solo para carga. No admite señales de vídeo ni comunicación de datos

4.1.5 Alimentación

Entrada	100–240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 0,90–0,40 A
Consumo energético máximo	89 W o menos ^{*1}
Modo de ahorro de energía	1,0 W o menos ^{*2}
Modo de espera	1,0 W o menos ^{*3}

*1 "CAL Switch Mode": "4-Text", "Brillo": "100%", conexión de carga externa

*2 Cuando se usa la entrada DisplayPort 1, "Ahorro ener.": "Alto", "DP Power Save": "Encendido", "Ajustes de administrador" - "Formato de señal" - "DisplayPort 1" - "Versión": "1.1", el puerto USB de conexión de flujo ascendente no está conectado y no hay ninguna carga externa conectada

*3 Cuando "DP Power Save": "Encendido", "Ajustes de administrador" - "Formato de señal" - "DisplayPort 1" - "Versión": "1.1", el puerto USB de conexión de flujo ascendente no está conectado y no hay ninguna carga externa conectada

4.1.6 Especificaciones físicas

Dimensiones (anch. x alt. x prof.)	354,5 mm x 476,0 mm — 566,0 mm x 200,0 mm (inclinación: 0°) 354,5 mm x 504,6 mm — 594,6 mm x 264,1 mm (inclinación: 30°)
Dimensiones (anch. x alt. x prof.) (sin soporte)	354,5 mm x 452,0 mm x 78,0 mm
Peso neto	Aprox. 7,6 kg
Peso neto (sin soporte)	Aprox. 4,8 kg
Rango de ajuste de altura	90 mm (inclinación: 0°)
Inclinación	Hacia arriba 30°, hacia abajo 5°
Giro	70°
Rotación	90° (en el sentido contrario a las agujas del reloj)

4.1.7 Requisitos ambientales de operación

Temperatura	0 °C–35 °C ^{*1}
Humedad	20 %–80 % H.R. (sin condensación)
Presión atmosférica	540 hPa–1060 hPa

*1 Cuando se utilice para la obtención de imágenes médicas, debe usarse entre 15 °C y 30 °C.

4.1.8 Condiciones de transporte y almacenamiento

Temperatura	-20 °C–60 °C
Humedad	10 %–90 % H.R. (sin condensación)

Presión atmosférica	200 hPa–1060 hPa
---------------------	------------------

4.2 Resoluciones compatibles

El monitor admite las siguientes resoluciones.

√: Compatible, -: No compatible

Resolución	Frecuencia de barrido vertical (Hz)	DisplayPort		DVI	
		Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
640 x 480	59,940	√	√	√	√
720 x 400	70,087	√	√	√	√
800 x 600	60,317	√	√	√	√
1024 x 768	60,004	√	√	√	√
1280 x 1024	60,020	√	√	√	√
1600 x 1200	60,000	√	√	√	√
2048 x 2560	24,962	-	-	√ ^{*1}	-
2048 x 2560	48,000	√ ^{*1,2}	-	-	-
2048 x 2560	49,698	-	-	√ ^{*1}	-
2048 x 2560	50,011	√ ^{*1}	-	-	-
2560 x 2048	24,974	-	-	-	√ ^{*1}
2560 x 2048	48,000	-	√ ^{*1,2}	-	-
2560 x 2048	49,966	-	√ ^{*1}	-	√ ^{*1}

*1 Resolución recomendada

*2 Solo se admite cuando "Ajustes de administrador" - "Formato de señal" - "DisplayPort 1" - "Versión" es "1.2"

4.3 Accesorios

Los accesorios siguientes están disponibles por separado.

Para obtener información actualizada sobre los accesorios opcionales y sobre la tarjeta gráfica compatible más reciente, consulte nuestro sitio web.

(www.eizoglobal.com)

Kit de calibración	RadiCS UX2 versión 5.2.0 o posterior RadiCS Version Up Kit versión 5.2.0 o posterior
Software de gestión del control de calidad de la red	RadiNET Pro ^{*1}
Luz cómoda para salas de lectura	RadiLight
Brazo	AAH-02B3W LA-011-W
Protector de panel	RP-918
Adaptador VESA para cliente delgado o mini-PC	PCSK-R1
Cable de señal (DVI-D - DVI-D)	DD200DL

*1 Para obtener versiones compatibles de RadiNet Pro, póngase en contacto con su distribuidor o representante local de EIZO.

Apéndice

Estándar médico

- Deberá garantizarse que el sistema final cumpla con los requisitos de la norma IEC60601-1.
- Los equipos alimentados por energía eléctrica pueden emitir ondas electromagnéticas, que podrían influir en, limitar o causar un mal funcionamiento del producto. Instale el equipo en un entorno controlado en el que se eviten tales efectos.

Clasificación del equipo

- Tipo de protección frente a descargas eléctricas: Clase I
- Clase CEM: IEC60601-1-2 Grupo 1, Clase B
- Clasificación del producto sanitario (UE): Clase I
- Modo de funcionamiento: continuo
- Clase IP: IPX0

Información sobre compatibilidad electromagnética (CEM)

La serie RadiForce puede mostrar imágenes médicas de forma adecuada.

Entornos de uso previsto

La serie RadiForce se ha diseñado para su uso en los siguientes entornos

- Entornos de centros sanitarios profesionales como clínicas y hospitales

Los siguientes entornos no son adecuados para utilizar la serie RadiForce:

- Entornos de asistencia sanitaria doméstica
- Cerca de equipos quirúrgicos de alta frecuencia como un bisturí electroquirúrgico
- Cerca de equipos terapéuticos de onda corta
- En habitaciones protegidas contra señales de RF de sistemas médicos para IRM
- En entornos específicos protegidos
- En vehículos, entre otros, ambulancias
- Otros entornos específicos

ADVERTENCIA

- La serie RadiForce exige adoptar precauciones especiales con respecto a la CEM y se debe instalar. Es necesario leer detenidamente la información sobre CEM y la sección "PRECAUCIONES" de este documento. Además, se deben respetar y seguir las instrucciones al instalar y utilizar el producto.

ADVERTENCIA

- La serie RadiForce no debe usarse pegada a otros equipos ni montada encima o debajo de otros equipos. Si fuera necesario su uso de tal manera, deberá observarse el equipo o el sistema para comprobar que funciona con normalidad en la configuración en la que se va a utilizar.

ADVERTENCIA


- Si utiliza un equipo de comunicación por RF portátil, manténgalo a 30 cm (12 pulgadas) o más de cualquier pieza, incluidos los cables, del RadiForce. De lo contrario, podría producirse una degradación del rendimiento de este equipo.

ADVERTENCIA

- La persona que conecte equipos adicionales a las entradas o salidas de señal en la configuración de un sistema médico será responsable de que el sistema cumpla con los requisitos estipulados en IEC60601-1-2.

ADVERTENCIA

- No deben tocarse los conectores de entrada/salida de señal mientras se usa la serie RadiForce. De lo contrario, podría verse afectada la imagen mostrada.

 ADVERTENCIA
<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de utilizar los cables suministrados con el producto o cables recomendados por EIZO. <p>El uso de otros cables distintos a los recomendados por EIZO puede provocar un incremento de las emisiones electromagnéticas o una reducción de la inmunidad electromagnética de este equipo, así como un funcionamiento incorrecto.</p>

Puerto de señal	Longitud máx. del cable	Protección	Núcleo de ferrita	Cable recomendado
DisplayPort	3 m	Protegido	Sin núcleos de ferrita	PP300
DVI-D	3 m	Protegido	Con núcleos de ferrita	DD300DL/ DD200DL
USB-C (solo carga)	2 m	Protegido	Sin núcleos de ferrita	-
USB-B (conexión de flujo ascendente)	3 m	Protegido	Con núcleos de ferrita	UU300/MD-C93
USB-A (conexión de flujo descendente)	3 m	Protegido	Sin núcleos de ferrita	-
Entrada física de CA (o entrada de CA)	3 m	Sin protección	Sin núcleos de ferrita	Con cable de tierra

Descripciones técnicas

Emisiones electromagnéticas

La serie RadiForce se ha diseñado para su uso en los entornos electromagnéticos que se indican a continuación.

El cliente o el usuario de la serie RadiForce debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.


Prueba de emisiones	Cumplimiento	Pautas sobre el entorno electromagnético
Emisiones de RF CISPR11	Grupo 1	La serie RadiForce usa energía de RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencias en los equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF CISPR11	Clase B	La serie RadiForce es apta para su uso en todos los ámbitos, incluidos los residenciales y los conectados directamente a la red eléctrica pública de baja tensión que abastece a los edificios destinados al uso doméstico.
Emisiones de armónicos IEC61000-3-2	Clase D	
Fluctuaciones de tensión/emisiones de parpadeos IEC61000-3-3	Cumple	

Inmunidad electromagnética

La serie RadiForce se ha probado en los siguientes niveles de conformidad según los requisitos (T) de ensayo para los entornos sanitarios profesionales especificados en IEC60601-1-2.

El cliente o el usuario de la serie RadiForce debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Ensayo de inmunidad	Nivel de ensayo (T)	Nivel de conformidad (C)	Pautas sobre el entorno electromagnético
Descarga electrostática (ESD) IEC61000-4-2	Descarga de contacto de ± 8 kV Descarga de aire de ± 15 kV	Descarga de contacto de ± 8 kV Descarga de aire de ± 15 kV	Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas cerámicas. Si los suelos están recubiertos de algún material sintético, la humedad relativa debe ser al menos del 30 %.
Transitorios eléctricos rápidos/en ráfagas IEC61000-4-4	Líneas eléctricas de ± 2 kV Líneas de entrada/salida de ± 1 kV	Líneas eléctricas de ± 2 kV Líneas de entrada/salida de ± 1 kV	La calidad de la red eléctrica debe ser la habitual en entornos comerciales u hospitalarios normales.
Sobretensión IEC61000-4-5	± 1 kV línea a línea ± 2 kV línea a tierra	± 1 kV línea a línea ± 2 kV línea a tierra	La calidad de la red eléctrica debe ser la habitual en entornos comerciales u hospitalarios normales.
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de suministro de energía eléctrica IEC61000-4-11	0 % U_T (caída del 100 % en U_T) 0,5 ciclos y 1 ciclo 70 % U_T (caída del 30 % en U_T) 25 ciclos/50 Hz 0 % U_T (caída del 100 % en U_T) 250 ciclos/50 Hz	0 % U_T (caída del 100 % en U_T) 0,5 ciclos y 1 ciclo 70 % U_T (caída del 30 % en U_T) 25 ciclos/50 Hz 0 % U_T (caída del 100 % en U_T) 250 ciclos/50 Hz	La calidad de la corriente suministrada por la red eléctrica debe ser la habitual en entornos comerciales u hospitalarios normales. Si el usuario de la serie RadiForce necesita que el dispositivo siga funcionando a pesar de que haya cortes en el suministro de la red de energía eléctrica, se recomienda conectar la serie RadiForce a un sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida o una batería.
Campos magnéticos a frecuencia de red IEC61000-4-8	30 A/m (50/60 Hz)	30 A/m	Los campos magnéticos a frecuencia de red deben encontrarse en los niveles característicos de una instalación típica en un entorno comercial u hospitalario normal. El producto debe mantenerse a unos 15 cm, como mínimo, de la fuente de campos magnéticos a frecuencia de red durante su uso.

Ensayo de inmunidad	Nivel de ensayo (T)	Nivel de conformidad (C)	Pautas sobre el entorno electromagnético
Perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de RF IEC61000-4-6	3 Vrms De 150 kHz–80 MHz 6 Vrms bandas ISM entre 150 kHz y 80 MHz ^{*1}	3 Vrms 6 Vrms	Los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles no deben usarse más próximos a ninguna pieza de la serie RadiForce, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$
Campos de RF radiada IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz–2,7 GHz	3 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$, 80 MHz–800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$, 800 MHz–2,7 GHz Donde "P" es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y "d" es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las intensidades de campo de transmisores de RF fijos, conforme se determinen mediante un estudio electromagnético de campo ^{*2} , deben ser menores que el nivel de conformidad en cada rango de frecuencias ^{*3} . Pueden producirse interferencias cerca de equipos que tengan el símbolo siguiente. 

Nota

- U_T es la tensión de CA de la red antes de aplicar el nivel de prueba.
- A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
- Estas pautas relacionadas con la inferencia conducida inducida por los campos de RF o campos radiados de RF, pueden no ser aplicables en todos los casos. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión en estructuras, objetos y personas.

^{*1} Las bandas ISM (industrial, científica y médica) entre 150 kHz y 80 MHz son de 6,765 MHz a 6,795 MHz, 13,553 MHz a 13,567 MHz, 26,957 MHz a 27,283 MHz y 40,66 MHz a 40,70 MHz.

^{*2} Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, equipos de radioaficionados, emisoras de radio AM y FM y emisoras de televisión, no se pueden predecir con exactitud de forma teórica. Para evaluar el entorno electromagnético provocado por transmisores de RF fijos, debe considerarse la posibilidad de realizar un estudio electromagnético de campo. Si la intensidad del campo medida en el lugar en el que se usa la serie RadiForce supera el nivel de conformidad de RF correspondiente indicado anteriormente, debe vigilarse la serie RadiForce a fin de comprobar que funciona correctamente. Si se observa un funcionamiento anómalo, puede

que sean necesarias medidas adicionales, como la reorientación o la reubicación de la serie RadiForce.

- *3 En el rango de frecuencias comprendido entre 150 kHz y 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación por RF portátiles o móviles y la serie RadiForce

La serie RadiForce está diseñada para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlen las perturbaciones por emisiones de RF radiada. El cliente o el usuario de la serie RadiForce pueden eliminar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima (30 cm) entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles (transmisores) y la serie RadiForce. La serie RadiForce se ha probado al siguiente nivel de cumplimiento (C) para los requisitos de nivel de ensayo de inmunidad del campo electromagnético próximo (T) para los siguientes servicios de comunicación de RF.

Frecuencia de ensayo (MHz)	Ancho de banda ^{*1} (MHz)	Servicio ^{*1}	Modulación ^{*2}	Nivel de ensayo (T) ^{*3} (V/m)	Nivel de conformidad (C) (V/m)
385	380 – 390	TETRA 400	Modulación por impulsos ^{*2} 18 Hz	27	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM desviación de ± 5 kHz sinusoidal de 1 kHz	28	28
710 745 780	704 – 787	Banda LTE 13, 17	Modulación por impulsos ^{*2} 217 Hz	9	9
810 870 930	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, Banda LTE 5	Modulación por impulsos ^{*2} 18 Hz	28	28
1720 1845 1970	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulación por impulsos ^{*2} 217 Hz	28	28
2450	2400 – 2570	Bluetooth®, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	Modulación por impulsos ^{*2} 217 Hz	28	28
5240 5500 5785	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulación por impulsos ^{*2} 217 Hz	9	9

*1 En algunos servicios solo se incluyen las frecuencias de enlace ascendente.

*2 La onda portadora se modula utilizando una señal de onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 50 %.

*3 Los niveles de prueba se calcularon sobre la base de la potencia máxima y una distancia de separación de 30 cm.

El cliente o el usuario de la serie RadiForce suprime las interferencias causadas por los campos magnéticos próximos al mantener una distancia mínima (15 cm) entre los transmisores de RF y la serie de RadiForce. La serie RadiForce se ha probado a los siguiente niveles de cumplimiento (C) para los requisitos de niveles de ensayo de inmunidad del campo magnético próximo (T).

Frecuencia de ensayo	Modulación	Nivel de ensayo (T) (A/m)	Nivel de conformidad (C) (A/m)
134,2 kHz	Modulación por impulsos ^{*1} 2,1 kHz	65	65
13,56 MHz	Modulación por impulsos ^{*1} 50 kHz	7,5	7,5

*1 La onda portadora se modula utilizando una señal de onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 50 %.

En el caso de otros equipos de comunicación por RF portátiles y móviles (transmisores), debe mantenerse una distancia mínima entre dichos equipos y la serie RadiForce, según lo recomendado a continuación, de acuerdo con la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.

Potencia nominal máxima de salida del transmisor (W)	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)		
	150 kHz – 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz – 2,7 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

En el caso de los transmisores cuya potencia nominal máxima de salida no figura en la tabla anterior, la distancia de separación recomendada "d" en metros (m) se puede calcular por medio de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde "P" es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.


Nota
<ul style="list-style-type: none"> A 80 y 800 MHz se debe aplicar la distancia de separación para un rango de frecuencias más alto. Estas pautas relacionadas con la interferencia conducida inducida por los campos de RF o campos radiados de RF, pueden no ser aplicables en todos los casos. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión en estructuras, objetos y personas.



EIZO Corporation 
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO GmbH 
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

EIZO Limited 
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

EIZO AG 
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



00N0N558AZ
IFU-GX570