

# 使用說明

# RadiForce® MX315W

LCD 彩色顯示器

## 重要事項

請仔細閱讀此「使用說明」及「安裝手冊」(不同文件)，讓您更熟悉如何安全及有效地使用本產品。

請妥善保管本手冊，以供日後參考。

- 
- 如需顯示器調整與設定的詳細資訊，請參閱「安裝手冊」。
  - 有關包含「使用說明」的最新產品消息，請參考我們的網站：

<http://www.eizoglobal.com>

---

## 安全符號

本手冊及本產品使用的安全符號如下。它們表示重要資訊。請仔細閱讀。

|  <b>警告事項</b>                                                                                                         |  <b>注意事項</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 若不遵守警告事項中的資訊，可能會造成嚴重傷害或威脅到生命安全。                                                                                                                                                                       | 若不遵守注意事項中的資訊，可能會造成中度傷害並 / 或使財產或產品受損。                                                          |
|  必須提供注意標示。例如，符號  說明如「小心觸電」等意外風險。    |                                                                                               |
|  表示禁止的動作。例如，符號  說明如「不要拆開」等特殊禁止動作。   |                                                                                               |
|  指出必須執行的步驟。例如，符號  說明如「裝置接地」等一般禁止告示。 |                                                                                               |

本產品已特別針對在原始送貨地區使用而調整過。若是在此地區外操作，產品可能不適合完全依規格所述來執行。

未經 EIZO Corporation 事先書面允許，不得以電子的、機械的或者其他任何的形式或手段，將本操作手冊中的任何部分進行複製、存放到檢索系統或者進行傳送。


EIZO Corporation 沒有義務為任何已提交的材料或資訊保守機密，除非事先依照 EIZO Corporation 已收到的所述資訊進行商議。儘管我們已經作了最大努力以確保本操作手冊中的資訊為最新資訊，但是請注意 EIZO 螢幕的規範仍會不經通知即作出變更。

# 預防措施

## ● 重要事項

- 本產品已特別針對在原始送貨地區使用而調整過。若是在此地區外使用產品，可能不適合依規格指定標準來操作。
- 為了個人安全及正確維護，請仔細閱讀本章節及螢幕上的注意事項。

### 警告標語位置

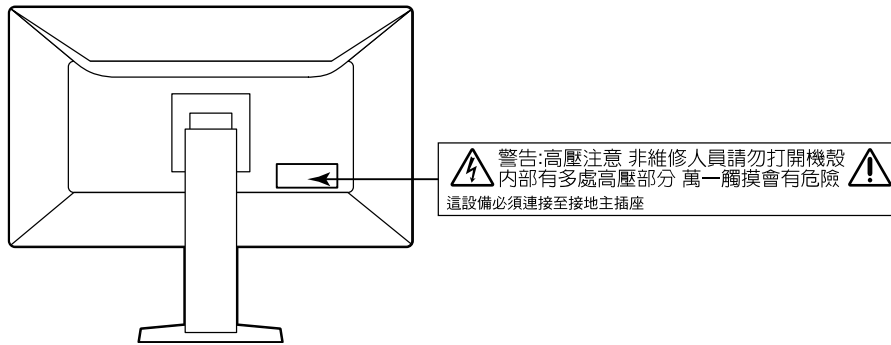

### 本機上的符號

| 符號          | 此符號表示                                    |
|-------------|------------------------------------------|
|             | 主電源開關：按此鍵關閉螢幕主電源。                        |
|             | 主電源開關：按此鍵打開螢幕主電源。                        |
|             | 電源鍵：按此開關打開或關閉螢幕的電源。                      |
|             | 交流電                                      |
|             | 警告存在觸電危險                                 |
|             | 注意事項：請參閱 " 安全符號 " ( 第 2 頁 )。             |
|             | WEEE 標示：產品必須分別進行廢棄處理，以產生再生材質。            |
|             | CE 標示：符合歐盟理事會指令和 / 或法規 ( EU ) 規定的歐盟合格標章。 |
|             | 製造商                                      |
|             | 製造日期                                     |
|             | 歐盟境內醫療裝置                                 |
| EU Importer | 歐盟境內進口商                                  |



## 警告事項

若裝置出現煙霧，聞起來像是東西著火，或者有奇怪聲音，請立刻拔除電源，並聯絡當地 EIZO 代表以尋求建議。嘗試使用功能異常的裝置可能會造成火災、電擊或設備受損。

請勿打開機殼或修改裝置。

打開機殼或修改裝置可能造成火災、電擊或燙傷。



所有維修事宜，請洽詢合格的維修人員。

請勿擅自維修本產品，因為打開或取下外蓋都可能造成火災、電擊或設備受損。

勿讓小物件或液體碰觸到裝置。

小物件意外掉入通風槽而進入機殼，或液體溢入機殼會造成火災、電擊或設備受損。若物件掉入或液體溢入機殼，請立刻拔除裝置的電源插頭。再次使用裝置前，請由合格的服務工程師檢查。



將裝置放置在平穩堅固的地方。

若將裝置放在不夠支撐的表面，可能因裝置掉落而造成人員受傷或設備受損。萬一裝置掉落，請立即中斷電源，並向您當地 EIZO 代表徵詢意見。千萬不可繼續使用受損的裝置。使用受損裝置可能會造成火災或電擊。

在適當的位置使用裝置。

否則可能會造成火災、電擊或設備受損。

- 請勿置放戶外。
- 請勿置於交通運輸系統中 ( 輪船、飛機、火車、汽車等 )。
- 請勿置於佈滿灰塵或潮濕的環境中。
- 請勿置於水會濺到螢幕的地方 ( 浴室、廚房等 )。
- 請勿置於蒸氣直接達到螢幕的地方。
- 請勿置於熱源裝置或加濕器附近。
- 請勿置於陽光會直接照射到產品的地方。
- 請勿置於易燃氣體環境。
- 請勿放置在具有腐蝕性氣體 ( 例如二氧化硫、硫化氫、二氧化氮、氯、氨和臭氧 ) 的環境中。
- 請勿放置在佈滿灰塵、具有空氣中加速腐蝕的成分 ( 例如氯化鈉和硫磺 )、導電金屬等物質的環境中。



為避免發生窒息危險，請勿將塑膠包裝袋放置在嬰兒及兒童能觸及的地方。

使用內附電源線，並連接當地的標準電源插座。

確保電源電壓在電源線的額定電壓範圍內，否則可能會造成火災或電擊。

電源供應器：100 - 240 Vac, 50 / 60 Hz

要拔掉電源線時，請穩穩抓緊插頭並拔出。

扯拉電源線可能使電源線受損，且可能會造成火災或電擊。



裝置必須連接到接地主插座。

若未遵循，可能會造成火災或電擊。



請使用正確電壓。

- 裝置的設計只能使用特定電壓。若使用的不是本「使用說明」所指定的電壓，可能會造成火災、電擊或設備受損。  
電源供應器：100 - 240 Vac, 50 / 60 Hz
- 電源電路不可超載，否則可能會造成火災或電擊。

務必小心處理電源線。

- 勿將電源線置放在裝置或其他重物底下。
- 勿拉扯電源線或將電源線打結。

如果電源線受損，請停止使用。使用受損電源線可能會造成火災或電擊。





## 警告事項

---

為確保電子產品使用安全，請勿在病患在場時插上或拔除電源線。

---

打雷時，絕對不可碰觸插頭和電源線。

否則可能會造成電擊。



---

連接手臂支撐架時，請參閱手臂支撐架使用者操作手冊，再確實安裝該裝置。

否則，會造成支撐架未能接合，進而導致人員受傷或設備受損。安裝之前，先確定要固定手臂支撐架的桌面、牆面和其他表面有足夠的機械強度可支撐。萬一裝置掉落，請向您當地 EIZO 代表徵詢意見。千萬不可繼續使用受損的裝置。使用受損裝置可能會造成火災或電擊。重新連接傾斜支架時，請使用相同的螺絲牢牢鎖緊。

---

請勿徒手直接碰觸受損的 LCD 面板。

從面板外洩的液晶有毒性，勿沾到眼睛或嘴巴。若皮膚或身體的任何部分直接碰觸到面板，請徹底洗淨。若身體出現症狀，請向您的醫生諮詢。



---

螢光背光燈含有汞（具有 LED 背光燈的產品不含有汞），請根據當地的法律法規進行廢棄處理。



暴露於元素汞時，可能會影響到神經系統，出現像顫抖、失憶及頭痛等症狀。

---



## 注意事項


搬運裝置時，請務必小心處理。

要移動裝置時，請拔掉電源線和纜線。移動插著電源線的裝置是很危險的，其可能造成人員受傷。

請依照正確的指定方式搬運或擺放裝置。

- 搬運裝置時，請依下圖所示，穩穩地抓牢。
- 30 英吋及以上大小的顯示器重量很重。拆封與 / 或搬運顯示器時，確保至少有兩個人同時協作。

裝置掉落可能會造成人員受傷或設備受損。

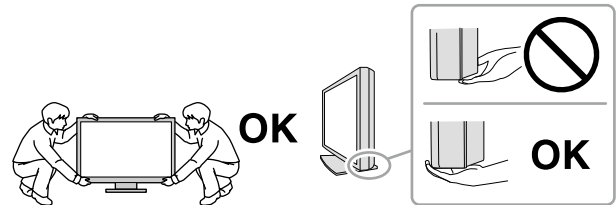

請勿阻塞機殼上的通風槽。

- 請勿將任何物件置於通風槽上。
- 請勿將裝置安裝在封閉空間中。
- 請勿使用已放下或倒放的裝置。



阻塞通風槽會阻礙適當氣流進出，並造成火災、電擊或設備受損。

勿用沾濕的手碰觸插頭。

這麼做會造成電擊。



使用可輕易連接的電源插座。

這可確保問題發生時快速拔除電源。

定期清潔顯示器電源插座和通風槽溝四周區域。

插頭上的灰塵、水滴或油漬可能會引發火災。

清潔之前，請先拔掉裝置插頭。

清潔裝置時若插頭仍插在插座上，可能會造成電擊。

如果您打算長期間不使用該裝置，在關閉電源開關後，記得將牆壁插座上的插頭拔掉，以確保安全，也能達到省電目的。

本產品僅適用於有病患的環境，但不可接觸到病患。

使用過度恐傷害視力。(BSMI 警語)

- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

歐洲經濟區 (EEA) 和瑞士境內的使用者：

任何與裝置有關的嚴重事故，都應向製造商和使用者和 / 或患者資料所在成員國的主管當局回報。

# 此螢幕的注意事項

## 預期用途

此產品預期用於顯示和檢視數位影像，供受過訓練的醫生評論、分析和診斷之用。此顯示器不適用於乳房攝影。

### 注意

- 當用於上述之用途時，本產品應設定為水平檢視模式。
- 若未依照本手冊指示使用本產品，便無法獲得保固條款的保障。
- 本手冊所述之規格，僅適用於使用下列配件的情況：
  - 隨產品提供的電源線
  - 我們指定的訊號線
- 僅能與本產品搭配使用我們所製造或指定的選擇性產品。

## 當用於上述之用途時，本產品應設定為水平檢視模式

- 零件 (LCD 面板等) 可能會在長期使用之後退化。定期檢查以確認運作正常。
- 當畫面影像因長時間顯示相同影像而產生變化時，可能會出現殘影。請啟用螢幕保護功能，以避免長時間顯示相同影像。
- 如果螢幕持續顯示很長一段時間，則可能會出現暗色污漬痕跡或殘影現象。為了延長螢幕壽命，建議定期關閉螢幕。
- 視顯示的影像而定，即便過去一段較短時間，仍可能出現殘影。在此情況下，請變換圖像或關閉電源數小時，可解決此問題。
- LCD 面板的背光燈有固定的生命週期。當畫面變暗或開始閃爍時，請連絡您當地的 EIZO 代表。
- 畫面上可能會有瑕疵像素，或有少量的光點。這是因為面板本身特性，不是產品功能發生問題所造成。
- 請勿用力按壓面板或框架邊緣，否則會造成如干擾圖型等顯示功能障礙。如果持續在面板上施壓，便會惡化，最後造成面板受損 (如果面板上仍有壓力標記，請將螢幕停留在黑白畫面，如此症狀就會消失)。
- 勿用尖銳物體刮或按壓面板，此動作可能造成面板受損。勿使用紙巾擦拭面板，此動作可能刮傷面板。
- 請勿碰觸內建校準感應器 (整合式前感應器)。這可能降低量測精確度或導致設備受損。
- 視環境而定，內建照度傳感器測量的值可能與單獨照度計顯示的值不同。
- 當低於常溫的螢幕被帶入房間，或室內溫度快速升高時，螢幕內外表面都可能產生結露。在此情況下，請勿打開螢幕。須等結露消散，否則可能會造成螢幕受損。

## 長時間使用顯示器

### ● 維護

- 顯示器的顯示品質受輸入訊號的品質等級與產品的退化程度影響。執行日常目視檢查及定期穩定性測試，確保符合您應用領域的醫療標準 / 準則，必要時進行校準。使用 RadiCS 顯示器品質控制軟體可讓您執行高級別的品質控制，確保符合醫療標準 / 準則。
- 電子零件性能穩定需要約 15 分鐘。在螢幕電源開啟或從省電模式恢復後請等 15 分鐘以上的時間，再開始調整螢幕。
- 我們建議將顯示器設定為建議的值或更低，以降低因長時間使用造成的亮度變動，並維持穩定顯示品質。
- 為了維持整合式前感測器的量測精確度，請使用 RadiCS / RadiCS LE 執行定期關聯。

### ● 清潔

建議定期清潔以維持嶄新的螢幕外觀，延長其操作生命週期。

用軟質布料沾濕少量的水或下列其中一種化學物品，輕輕擦掉機殼或面板表面上的污物沙塵。

#### 適宜清潔用途的化學物品

| 材質名稱         | 產品名稱         |
|--------------|--------------|
| 酒精           | 酒精           |
| 異丙醇          | 異丙醇          |
| 消毒劑          | Hibitane     |
| 苯甲烷氯化銨       | Welpas       |
| 鹽酸烷基二氨基乙基甘氨酸 | Tego 51      |
| 戊乙醛          | SteriHyde    |
| 戊乙醛          | Cidex Plus28 |

#### 注意

- 請勿頻繁使用化學物品。酒精及防腐劑等化學物品可能造成光彩度異變、失去光澤，以及機殼或面板退化，影像品質也會下降。
- 千萬不可使用任何稀釋劑、苯、蠟和擦洗劑，其可能會造成機殼或面板受損。
- 請勿讓螢幕直接碰到化學物品。

#### 附註

- 建議選用 ScreenCleaner 來清潔機殼和面板表面。

## 愉快地使用顯示器

- 觀看螢幕時須和螢幕保持適當距離和角度。

# 內容

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 預防措施 .....                    | 3  |
| ● 重要事項 .....                  | 3  |
| 此螢幕的注意事項 .....                | 7  |
| 預期用途 .....                    | 7  |
| 當用於上述之用途時，本產品應設定為水平檢視模式 ...   | 7  |
| 長時間使用顯示器 .....                | 8  |
| ● 維護 .....                    | 8  |
| ● 清潔 .....                    | 8  |
| 愉快地使用顯示器 .....                | 8  |
| 內容 .....                      | 9  |
| 章節 1 介紹 .....                 | 10 |
| 1-1. 特色 .....                 | 10 |
| 1-2. 包裝內容 .....               | 12 |
| ● EIZO LCD Utility Disk ..... | 12 |
| 1-3. 控制與功能 .....              | 14 |
| 章節 2 安裝 / 連接 .....            | 15 |
| 2-1. 在安裝本產品之前 .....           | 15 |
| ● 安裝需求 .....                  | 15 |
| 2-2. 連接訊號線 .....              | 16 |
| 2-3. 開啟電源 .....               | 19 |
| 2-4. 調整螢幕高度與角度 .....          | 19 |
| 章節 3 無畫面的問題 .....             | 20 |
| 章節 4 規格 .....                 | 21 |
| 4-1. 規格清單 .....               | 21 |
| 4-2. 相容的解析度 .....             | 22 |
| 4-3. 選購配件 .....               | 22 |
| 附錄 .....                      | 23 |
| 醫療標準 .....                    | 23 |
| EMC 資訊 .....                  | 24 |
| 限用物質含有情況標示 .....              | 27 |


# 章節 1 介紹

感謝您選擇 EIZO 彩色 LCD 螢幕。

## 1-1. 特色

### ● 高度配置自由


本產品具有 PbyP (多重畫面) 和 PinP (子母畫面) 功能，可以同時顯示最多三個訊號。

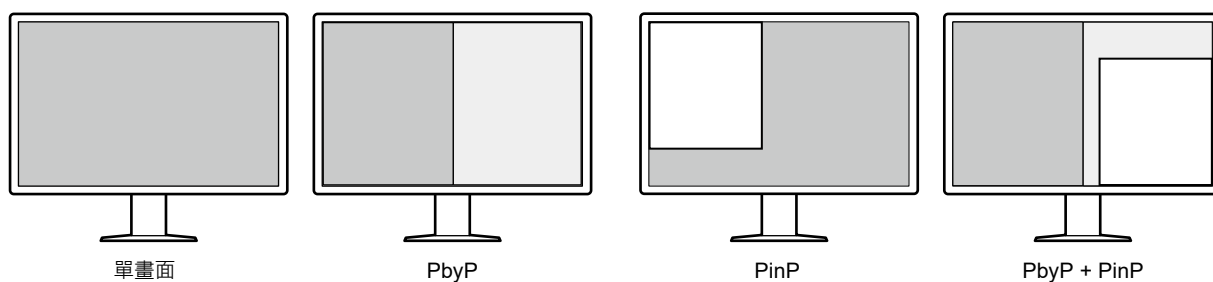


### ● 佈線簡單

除了 DisplayPort 輸入端子外，也提供輸出端子。

- 訊號可以從輸出端子 (D<sub>OUT</sub>) 輸出到不同的顯示器。

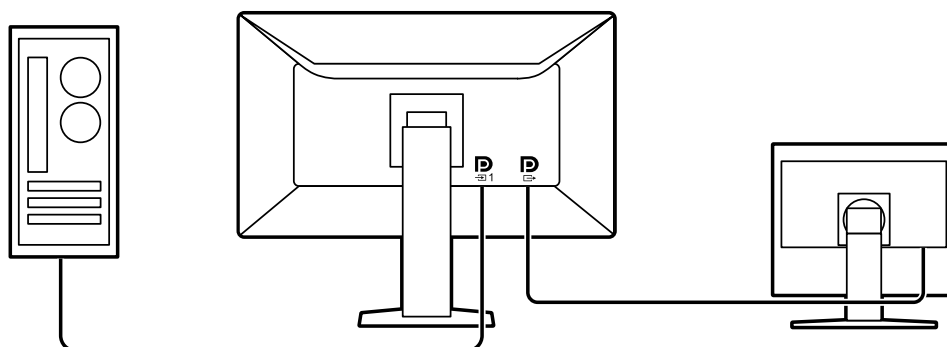


- 若要以 PbyP 顯示影像，通常需要在電腦和顯示器之間連接兩條信號線。在此機型上，您可以使用一條纜線連接到電腦。您只需在輸出端子 (D<sub>OUT</sub>) 和輸入端子 (D<sub>2</sub>) 之間連接隨附的 DisplayPort 纜線 (PP028)。

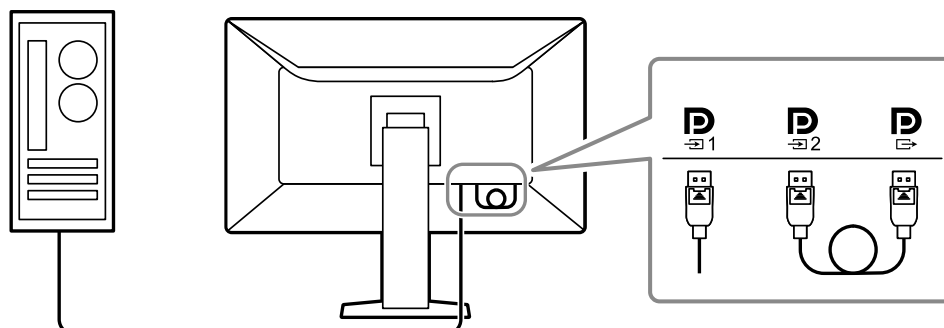

## ● 節省空間的設計

顯示器具有兩個 USB 上游連接埠。您可以在電腦之間切換以使用一組 USB 裝置 (滑鼠、鍵盤等) 操作兩台電腦。

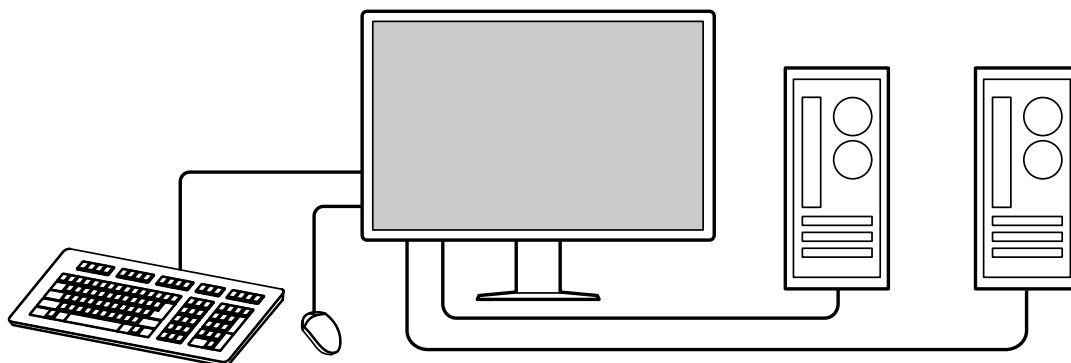

## ● 從滑鼠和鍵盤進行顯示器操作

透過 RadiCS / RadiCS LE 顯示器品質控制軟體，您可以使用滑鼠和鍵盤執行以下顯示器操作：


- 切換 CAL Switch 模式
- 切換輸入訊號
- 顯示或隱藏 PinP 子視窗 ( Hide-and-Seek )
- 切換用於操作 USB 裝置的電腦 ( Switch-and-Go )

### 附註

- RadiCS / RadiCS LE 軟體可讓您顯示或隱藏 PinP 子視窗，同時切換用於操作 USB 裝置的電腦。如需設定步驟的詳細資訊，請參考 RadiCS / RadiCS LE 使用者操作手冊。

## ● 品質控制

- 這個顯示器具有內建校準感應器 ( 整合式前感應器 )。這個感應器可讓顯示器單獨執行校準 (SelfCalibration) 和灰階檢查。

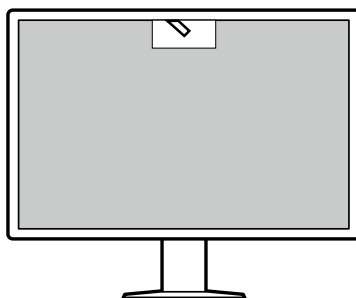

- 使用連接到顯示器的 RadiCS LE，可以管理與顯示器相關的記錄，以及 SelfCalibration 目標和執行進度。
- RadiCS 顯示器品質控制軟體可讓您執行品質控制，確保符合醫療標準 / 準則。


## 1-2. 包裝內容

請檢查包裝中是否包含下列物品。如果有缺少任何物品，或物品有損壞現象，請與經銷商或附表列出的當地 EIZO 代表聯絡。


### 附註

- 建議保留好包裝盒及包裝材料，在移動或搬運本產品時即可派上用場。


- 顯示器
- 電源線

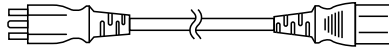


- 數位訊號線：PP300 x 2  
DisplayPort - DisplayPort

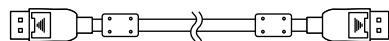


- 數位訊號線：PP028 x 1  
DisplayPort - DisplayPort

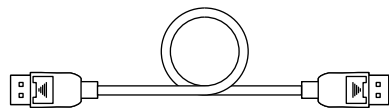

- 數位訊號線：DD300DL x 1  
DVI - DVI (雙連結)

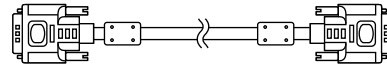

- USB 纜線：UU300 x 2

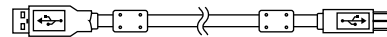

- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- 使用說明

## ● EIZO LCD Utility Disk

CD-ROM 包含下列物品。如需軟體安裝步驟或檔案參考步驟，請參考磁碟內的「Readme.txt」。

- Readme.txt 檔案
- RadiCS LE 顯示器品質控制軟體 (用於 Windows)
- 使用者操作手冊  
顯示器安裝手冊  
RadiCS LE 使用者操作手冊
- 外形尺寸

## RadiCS LE

RadiCS LE 可讓您執行以下品質控制和顯示器操作。如需軟體或設定步驟的詳細資訊，請參考 RadiCS LE 使用者操作手冊。

### 品質控制

- 執行校準
- 在清單中顯示測試結果並製作測試報告
- 設定 SelfCalibration 目標和執行進度

### 顯示器操作

- 切換 CAL Switch 模式
- 切換輸入訊號
- 顯示或隱藏 PinP 子視窗 (Hide-and-Seek)
- 切換用於操作 USB 裝置的電腦 (Switch-and-Go)
- 進入省電模式 (Backlight Saver)

### 注意

- RadiCS LE 規格可能會變更，恕不另行通知。您可從下列網站下載最新版的 RadiCS LE：  
<http://www.eizoglobal.com>

## 使用 RadiCS LE


如需有關如何安裝及使用 RadiCS LE 的詳細資訊，請參考 RadiCS LE 使用者操作手冊（於 CD-ROM 中）。使用 RadiCS LE 時，透過隨附的 USB 纜線將顯示器連接到電腦。如需有關如何連接顯示器的詳細資訊，請參見 "2-2. 連接訊號線"（第 16 頁）。

---

### 附註

- 在難以連接 USB 纜線的環境中，啟用 DDC 通訊時可使用 RadiCS LE，不需要使用 USB 纜線。如需有關如何設定 DDC 通訊的詳細資訊，請參閱安裝手冊（於 CD-ROM 中）。基於反應時間和操作穩定性，建議進行 USB 連接。
-

## 1-3. 控制與功能

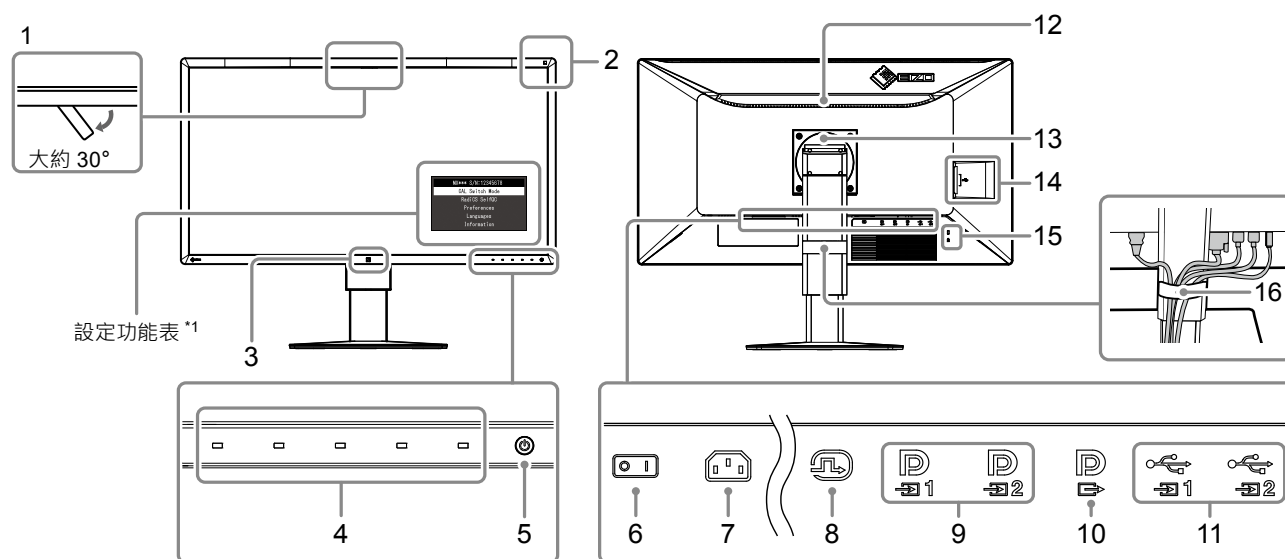

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 整合式前感測器           | 這個感應器用於執行校準和灰階檢查。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. 環境光源感測器           | 這個感應器測量環境照明。使用 RadiCS / RadiCS LE 品質控制軟體執行環境照明測量。                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. 狀態感測器             | 這個感應器偵測顯示器前的人體移動。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. 操作按鈕              | 顯示操作指南。根據操作指南設定功能表。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. 開關                | 打開或關閉電源。<br>打開電源時，開關指示燈亮起。指示燈顏色視顯示器的操作狀態而異。<br>綠色：顯示器處於操作中狀態，橙色：省電模式，關：主電源 / 電源關閉                                                                                                                                                                                               |
| 6. 主電源開關             | 打開或關閉主電源。<br>○：關， ：開                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. 電源接頭              | 連接電源線。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. DVI-D 連接器         | 將其連接至 PC。所使用的接頭因畫面編排而異。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9. DisplayPort 輸入接頭  | 如需詳細資訊，請參閱 "2-2. 連接訊號線" (第 16 頁)。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. DisplayPort 輸出接頭 | 若要設定菊輪鍊連接，請將纜線連接至其他顯示器的輸入連接埠。<br>當這個連接器連接到  時，輸入到  的訊號可在 PbyP 模式中顯示。<br>如需詳細資訊，請參閱 "2-2. 連接訊號線" (第 16 頁)。 |
| 11. USB 上游連接埠        | 當您使用需要 USB 連接的軟體或將 USB 裝置 (支援 USB 的周邊裝置) 連接到 USB 下游連接埠時，將此連接埠連接到電腦。                                                                                                                                                                                                             |
| 12. 把手               | 用於搬運用把手。<br><b>注意</b><br>• 搬運顯示器時，抓住顯示器的底部及此把手，以免掉落。                                                                                                                                                                                                                            |
| 13. 支架               | 可以調整高度和角度。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14. USB 下游連接埠        | 連接 USB 裝置。若要設定菊輪鍊連接，請將纜線連接至其他顯示器的 USB 上游連接埠。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15. 安全鎖孔             | 符合 Kensington's MicroSaver 安全系統。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16. 纜線收納架            | 固定顯示器的線材。                                                                                                                                                                                                                                                                       |

\*1 如需有關如何使用的詳細資訊，請參考安裝手冊 (於 CD-ROM 中)。

## 章節 2 安裝 / 連接


### 2-1. 在安裝本產品之前

仔細閱讀 " 預防措施 " ( 第 3 頁 ) 且務必遵循指示。

如果將此產品放置在塗漆的桌面上，漆的顏色可能會因橡膠成分而附著在支架底部。使用之前請檢查桌面。

#### ● 安裝需求

將顯示器安裝在機架上時，請確定顯示器側邊、背後和上方都有足夠空間。

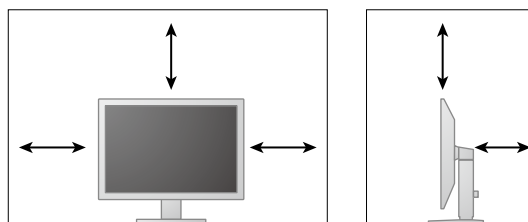

#### 注意

- 將顯示器定位好，不要讓任何光線干擾螢幕。

## 2-2. 連接訊號線

### 注意


- 確認顯示器和電腦的電源已關閉。
- 將目前顯示器更換為此顯示器時，請參考 "4-2. 相容的解析度" (第 22 頁)，在連接電腦之前，先將電腦解析度及垂直掃描頻率設定更改為可用於此顯示器的設定值。
- 保護蓋可能已安裝到顯示器的接頭上。先取下蓋，再連接纜線。

### 1. 連接訊號線。

請確認接頭形狀後，再連接纜線。連接 DVI 纜線之後，擰緊緊固件以鎖緊接頭。

啟用 PinP 顯示時，請參閱安裝手冊 (於 CD-ROM 中)。

#### 單畫面顯示

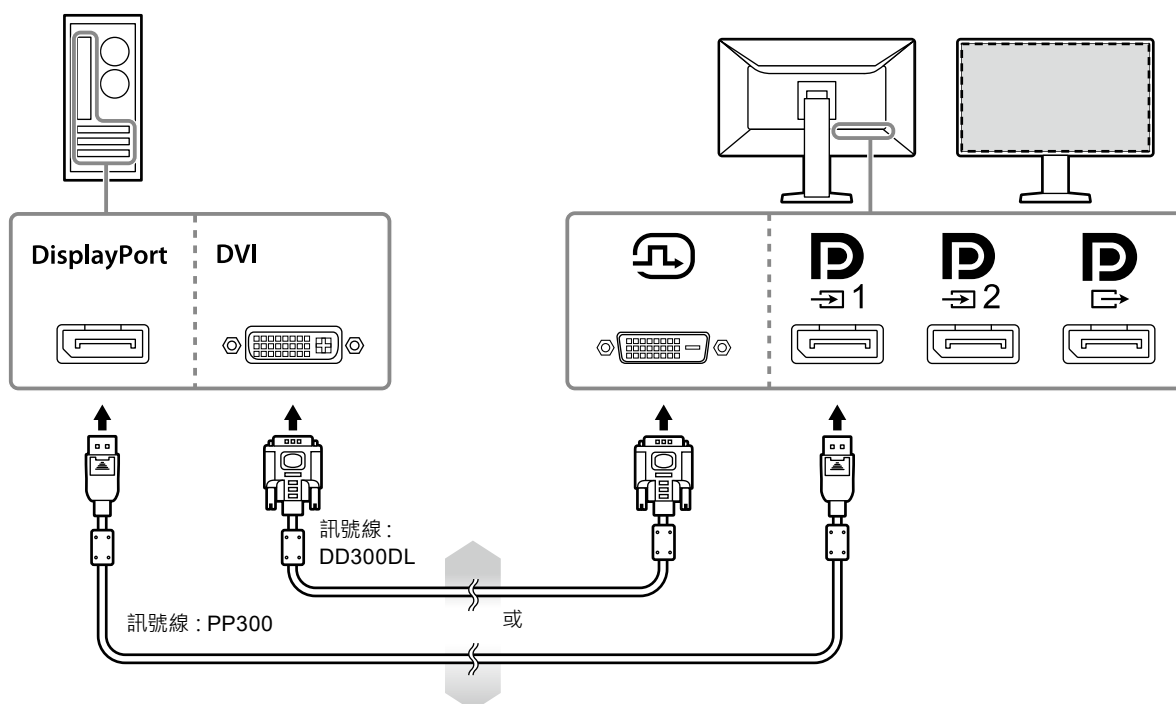

### 注意


- 透過 DisplayPort 使用顯示器進行單畫面顯示時，將顯示器連接到輸入接頭 **D<sub>1</sub>**。
- 透過 DVI 使用顯示器進行單畫面顯示時，更新率 (螢幕上的影像更新頻率) 將降低。因此進行單畫面顯示時，建議使用 DisplayPort 1。透過 DVI 使用顯示器進行單畫面顯示時，必須將設定功能表中「喜好設定」的「輸入」設定為「DVI」。如需詳細資訊，請參閱安裝手冊 (於 CD-ROM 中)。

## PbyP (雙畫面) 顯示


### 注意

- 必須將設定功能表中「喜好設定」設定為「輸入」，以選擇要顯示的訊號組合。如需詳細資訊，請參閱安裝手冊（於 CD-ROM 中）。
- 在 PbyP 模式下使用顯示器以從兩台電腦顯示影像時，某些品質控制功能的使用，如校準，可能會受到限制。

### DisplayPort 1 / DisplayPort 2

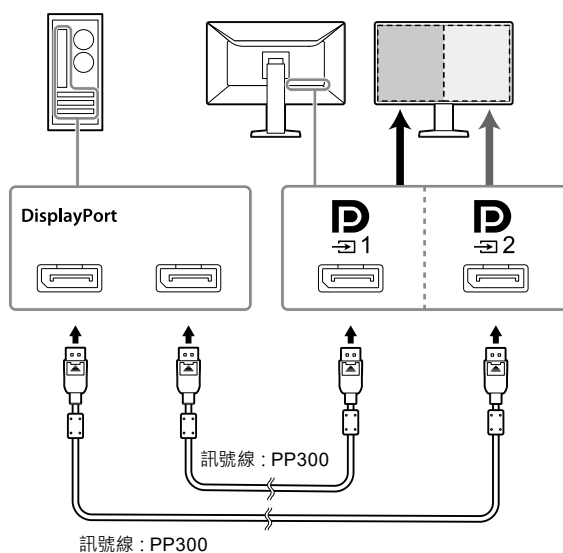


### DisplayPort 1 / DVI

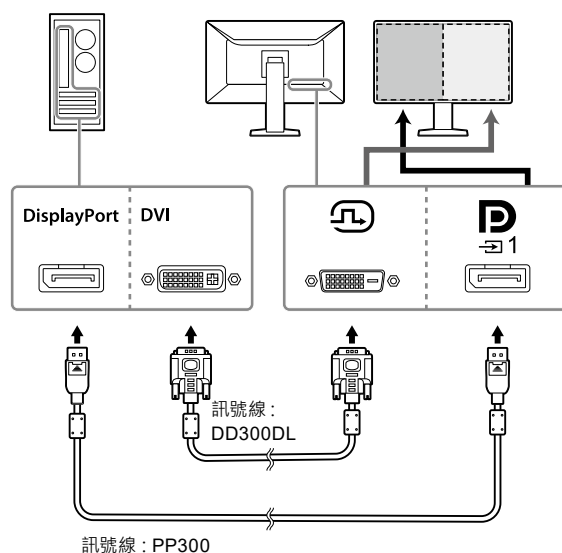

### 附註

- 當隨附的 DisplayPort 纜線 (PP028) 連接到 **D 1** 和 **D 2** 時，輸入到 **D 1** 的訊號可在 PbyP 模式中顯示。在這種情況下，必須將管理員設定功能表中的「訊號格式」、「DisplayPort 1」、「版本」設定為「1.2」，並將「Daisy Chain」設定為「開」。

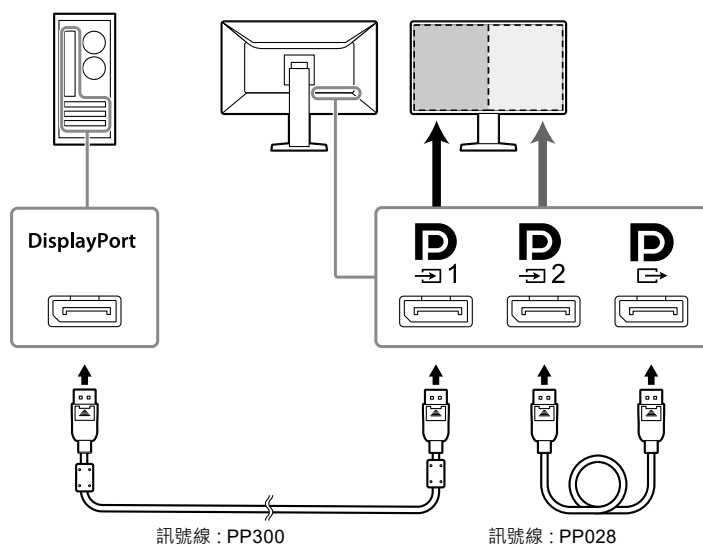


## 設定菊輪鍊連接到其他顯示器

輸入到 **D<sub>1</sub>** 的訊號會輸出到其他顯示器。

### 注意

- 如需有關可用於菊輪鍊連接之顯示器與顯示卡的詳細資訊，請造訪 EIZO 網站：<http://www.eizoglobal.com>
- 必須將管理員設定功能表中的「訊號格式」、「DisplayPort 1」、「版本」設定為「1.2」，並將「Daisy Chain」設定為「開」。

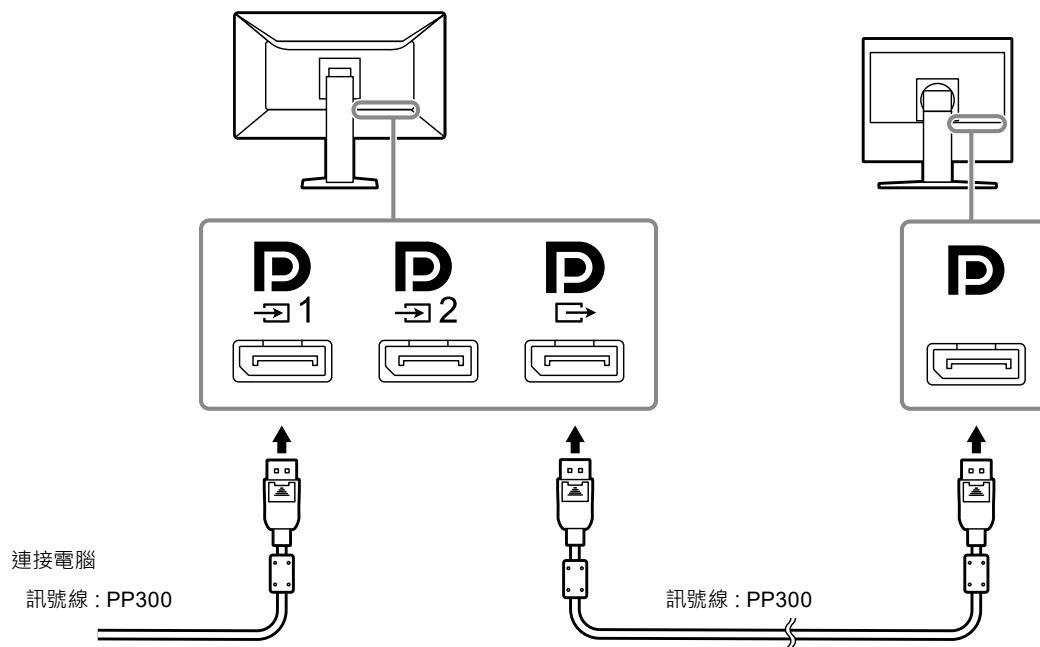

## 2. 將電源線插頭插入電源插座和螢幕上的電源接頭。

將電源線完全插入顯示器。

## 3. 使用 RadiCS / RadiCS LE 或將 USB 裝置 (支援 USB 的周邊裝置) 連接到顯示器時，將 USB 纜線連接到顯示器的 USB 上游連接埠和電腦。



### 注意

- 為了控制顯示器品質而安裝了 RadiCS / RadiCS LE 的 PC 必須與 **USB** 連接。

## 2-3. 開啟電源

### 1. 碰觸 以打開顯示器的電源。

顯示器的電源開關指示燈會亮起綠燈。

如果指示燈不亮，請參閱 " 章節 3 無畫面的問題 " ( 第 20 頁 )。

#### 附註

- 顯示器電源未開啟時，碰觸  除外的任何按鈕會使  閃爍。

### 2. 開啟電腦電源。

出現畫面影像。

若未出現影像，請參考 " 章節 3 無畫面的問題 " ( 第 20 頁 ) 以取得其他建議。

#### 注意


- 若要達到最佳省電效果，建議您關閉電源鍵。不使用顯示器時，可以關閉主電源或拔除電源插頭，以便完全切斷電源。

#### 附註

- 為了防止亮度衰退以延長顯示器使用壽命同時減少功耗，請執行以下步驟：
  - 使用電腦或顯示器的省電功能。
  - 使用後請關閉顯示器。

## 2-4. 調整螢幕高度與角度

用雙手抓住螢幕的左右邊緣，將螢幕高度、傾斜度和轉角調整到最佳工作狀態。

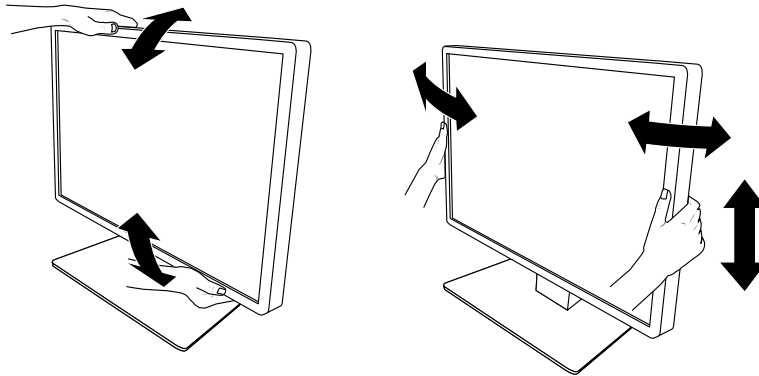

#### 注意

- 調整完成後，請確認纜線是否正確連接。

## 章節 3 無畫面的問題

| 問題                                                                                                                                                         | 原因及解決方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. 無畫面</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>電源開關指示燈不亮</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>檢查電源線是否連接正確。</li> <li>打開主電源開關。</li> <li>碰觸 。</li> <li>關閉主電源開關，然後再重新打開。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>電源開關指示燈亮起：綠色</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>在設定功能表中增加「亮度」、「對比度」或「增益」。如需詳細資訊，請參閱安裝手冊（於 CD-ROM 中）。</li> <li>關閉主電源開關，然後再重新打開。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>電源開關指示燈亮起：橙色</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>切換輸入訊號。如需詳細資訊，請參閱安裝手冊（於 CD-ROM 中）。</li> <li>移動滑鼠，或按鍵盤上的任意鍵。</li> <li>確認是否已打開電腦。</li> <li>如果狀態感測器設為「開」，顯示器可能處於省電模式。嘗試靠近顯示器。</li> <li>檢查訊號線是否連接正確。如果將輸入訊號選擇為「DisplayPort 1」，請將其連接至 。設定菊輪鍊連接時， 用於輸出。</li> <li>關閉主電源開關，然後再重新打開。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>電源開關指示燈閃爍：橙色、綠色</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>使用 EIZO 指定的訊號線連接。關閉主電源開關，然後再重新打開。</li> <li>如果訊號線連到 DisplayPort 1 ()，請嘗試切換 DisplayPort 版本。如需詳細資訊，請參閱安裝手冊（於 CD-ROM 中）。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2. 出現以下訊息。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>當未輸入訊號時，就會出現此訊息。<br/>例如：</li> </ul> <div data-bbox="240 1081 703 1171" data-label="Image"> </div> | <p>即使顯示器正常工作，如果不正確輸入訊號，也顯示此資訊。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>可能會出現左邊顯示的訊息，因為有些電腦在開機後不會立刻輸出訊號。</li> <li>確認是否已打開電腦。</li> <li>檢查訊號線是否連接正確。</li> <li>切換輸入訊號。如需詳細資訊，請參閱安裝手冊（於 CD-ROM 中）。</li> <li>如果訊號線連到 DisplayPort 1 ()，請嘗試切換 DisplayPort 版本。如需詳細資訊，請參閱安裝手冊（於 CD-ROM 中）。</li> <li>訊號線是否連到  以在單一畫面上顯示 DisplayPort 訊號？如果纜線連接到  或 ，無法顯示訊號。</li> <li>關閉主電源開關，然後再重新打開。</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>此訊息表示輸入訊號在指定的頻率範圍之外。<br/>例如：</li> </ul> <div data-bbox="271 1462 644 1599" data-label="Image"> </div>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>確認 PC 的輸入訊號的設定是否與該顯示器的解析度及垂直頻率是否相符合（請參考「4-2. 相容的解析度」（第 22 頁））。</li> <li>重新啟動電腦。</li> <li>使用顯示卡公用程式，選擇適用的設定。如需詳細資訊，請參考顯示卡的使用者操作手冊。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 章節 4 規格

### 4-1. 規格清單

|             |                              |                                                         |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 液晶面板        | 類型                           | 彩色 (IPS)                                                |
|             | 背光                           | LED                                                     |
|             | 尺寸                           | 79 cm ( 31.1 英吋 )                                       |
|             | 解析度 (H × V)                  | 4096 × 2160                                             |
|             | 顯示尺寸 (H × V)                 | 698.0 mm × 368.1 mm                                     |
|             | 像素間距                         | 0.1704 mm                                               |
|             | 顯示色彩                         | 10 位元 (DisplayPort <sup>*1</sup> ) : 107374 萬色 ( 最大值 )  |
|             |                              | 8 位元 (DisplayPort <sup>*1</sup> / DVI) : 1677 萬色        |
|             | 視角 ( H / V · 一般 )            | 178° / 178°                                             |
|             | 建議亮度                         | 270 cd/m <sup>2</sup>                                   |
|             | 回應時間 ( 一般 )                  | 20 ms ( 黑 -> 白 -> 黑 )                                   |
| 視訊訊號        | 輸入端子                         | DisplayPort × 2 · DVI-D ( 雙連結 ) × 1                     |
|             | 輸出端子                         | DisplayPort × 1                                         |
|             | 水平掃描頻率                       | 31 kHz - 134 kHz                                        |
|             | 垂直掃描頻率                       | DisplayPort : 29 Hz - 61 Hz (720 × 400 : 69 Hz - 71 Hz) |
|             |                              | DVI : 14 Hz - 61 Hz (720 × 400 : 69 Hz - 71 Hz)         |
|             | 訊框同步模式                       | 29.5 Hz - 30.5 Hz, 59 Hz - 61 Hz                        |
| USB         | 連接埠                          | 上行埠 × 2, 下行埠 × 3                                        |
|             |                              | 標準                                                      |
|             | 標準                           | USB 規格修訂 2.0 版                                          |
| 電源          | 輸入                           | 100 - 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 1.30 - 0.60 A           |
|             | 最大功耗                         | 125 W 或以下                                               |
|             | 省電模式                         | 1.6 W 或以下 <sup>*2</sup>                                 |
|             | 待機模式                         | 1.6 W 或以下 <sup>*3</sup>                                 |
| 規格          | 尺寸 ( 寬 × 高 × 深 )             | 733.0 mm × 474.0 mm - 574.0 mm × 225.0 mm ( 傾斜度 : 0° )  |
|             |                              | 733.0 mm × 508.0 mm - 608.0 mm × 267.0 mm ( 傾斜度 : 30° ) |
|             | 尺寸 ( 寬 × 高 × 深 )<br>( 不含底座 ) | 733.0 mm × 408.0 mm × 64.5 mm                           |
|             | 重量                           | 約 11.7 kg                                               |
|             | 重量<br>( 不含底座 )               | 約 7.5 kg                                                |
|             | 高度調整範圍                       | 100 mm ( 傾斜度 : 0° )                                     |
|             | 傾斜度                          | 上傾 30° · 下傾 5°                                          |
| 轉角          | 轉角                           | 70°                                                     |
| 操作環境需求      | 溫度                           | 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)                            |
|             | 濕度                           | 20 % - 80 % R.H. ( 無凝結 )                                |
|             | 壓力                           | 540 hPa - 1060 hPa                                      |
| 運送 / 儲存環境要求 | 溫度                           | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)                         |
|             | 濕度                           | 10 % - 90 % R.H. ( 無凝結 )                                |
|             | 壓力                           | 200 hPa - 1060 hPa                                      |

\*1 顯示器上顯示的 DisplayPort 訊號顏色可能根據顯示器設定而有所不同。有關顯示顏色和設定的詳細內容，請參見 "4-2. 相容的解析度" ( 第 22 頁 )。

\*2 使用 DisplayPort 1 輸入時，USB 上游連接埠不會連接、「輸入」：「單畫面 DisplayPort 1」、「DDC」：「關」、「DP Power Save」：「開」、「DisplayPort 1」-「版本」：「1.1」、其他設定：初期設定、未連接外部負載

\*3 當未連接 USB 上游連接埠時，「DP Power Save」：「開」、「DisplayPort 1」-「版本」：「1.1」、「DDC」：「關」、其他設定：初期設定、未連接外部負載

## 4-2. 相容的解析度

本顯示器支援下列解像度。如需有關 PinP 子視窗相容的解析度的詳細資訊，請參閱安裝手冊。

√: 支援

| 解析度<br>(H × V) | 垂直頻率<br>(Hz) | DisplayPort           |                       |                               | DVI             |                 |
|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
|                |              | 單畫面顯示                 |                       | 雙畫面顯示<br>(PbyP) <sup>*3</sup> | 單畫面顯示           | 雙畫面顯示<br>(PbyP) |
|                |              | Ver.1.2 <sup>*1</sup> | Ver.1.1 <sup>*2</sup> |                               |                 |                 |
| 720 × 400      | 70           | √                     | √                     | √                             | √               | √               |
| 640 × 480      | 60           | √                     | √                     | √                             | √               | √               |
| 800 × 600      | 60           | √                     | √                     | √                             | √               | √               |
| 1024 × 768     | 60           | √                     | √                     | √                             | √               | √               |
| 1280 × 1024    | 60           | √                     | √                     | √                             | √               | √               |
| 1600 × 1200    | 60           | √                     | √                     | √                             | √               | √               |
| 2048 × 2160    | 30           | -                     | -                     | √                             | -               | √               |
| 2048 × 2160    | 60           | -                     | -                     | √ <sup>*4</sup>               | -               | √ <sup>*4</sup> |
| 3840 × 2160    | 15           | -                     | -                     | -                             | √               | -               |
| 3840 × 2160    | 30           | -                     | √                     | -                             | √               | -               |
| 3840 × 2160    | 60           | √                     | -                     | -                             | -               | -               |
| 4096 × 2160    | 15           | -                     | -                     | -                             | √               | -               |
| 4096 × 2160    | 30           | -                     | √ <sup>*4</sup>       | -                             | √ <sup>*4</sup> | -               |
| 4096 × 2160    | 60           | √ <sup>*4</sup>       | -                     | -                             | -               | -               |

\*1 「Daisy Chain」設定為「關」時：10 位元輸入，「Daisy Chain」設定為「開」時：8 位元輸入

\*2 10 位元輸入

\*3 使用「DisplayPort 1 / DisplayPort 2」的雙畫面顯示：10 位元輸入，使用「DisplayPort 1 / DVI」的雙畫面顯示：8 位元輸入

\*4 推薦解析度

## 4-3. 選購配件

可另購以下配件。

如需有關選購配件的最新資訊，以及有關最新相容顯示卡的詳細資訊，請瀏覽我們的網站。

<http://www.eizoglobal.com>

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 校準套件       | EIZO「RadiCS UX1」Ver.4.5.5 或之後的版本<br>EIZO「RadiCS Version Up Kit」Ver.4.5.5 或之後的版本 |
| 網路 QC 管理軟體 | EIZO「RadiNET Pro」Ver.4.5.5 或之後的版本<br>EIZO「RadiNET Pro Lite」Ver.4.5.5 或之後的版本     |
| 清潔套件       | EIZO「ScreenCleaner」                                                             |
| 閱讀室的舒適燈光   | EIZO「RadiLight」                                                                 |

## 醫療標準

- 必須確保最終系統符合 IEC60601-1-1 要求。
- 供電設備可能會發射電磁波，這些電磁波可能會影響、限制螢幕或導致螢幕故障。請在能避免這些影響的受控環境中安裝此設備。

### 設備分類

- 電擊的防護類型：Class I
- EMC 等級：EN60601-1-2:2015 Group 1 Class B
- 醫療裝置分類 (EU)：Class I
- 操作模式：繼續
- IP Class：IPX0

# EMC 資訊

RadiForce 系列具有可適當顯示影像的性能。

## 預期用途的環境

RadiForce 系列預期用於專業醫療機構環境，如診所和醫院。

以下環境不適合使用 RadiForce 系列：

- 家庭醫療環境
- 鄰近高頻外科設備，如電手術刀
- 鄰近短波治療設備
- MRI 醫療設備系統的 RF 屏蔽室
- 屏蔽位置特殊環境
- 安裝於車上，包括救護車。
- 其他特殊環境



## 警告

使用 RadiForce 系列產品時必須特別注意 EMC 相關預防事項並安裝。安裝與操作本產品時，必須仔細閱讀本文件中的 EMC 資訊和「使用須知」章節，並且遵循以下指示。

務必使用連接到本產品的纜線或 EIZO 指定的纜線。

使用非本設備的 EIZO 指定或提供的纜線可能會導致本設備的電磁放射量增加或電磁耐受性降低以及無法進行正常操作。

纜線長度：最長 3 公尺

RadiForce 系列產品在使用時不宜靠近其他設備，或與其他設備疊放在一起。如果需要靠近或疊放使用，最好先觀察該設備或系統，確認其用途配置不影響正常運作。

使用可攜式 RF 通訊設備時，須距離 RadiForce 系列的任何部分，包括纜線，

至少 30 cm ( 12 英吋)。否則可能會減損本設備性能。

無論是誰將其他設備連接到訊號輸入 部分或訊號輸出部分來架構醫療系統，都必須保證系統符合 IEC / EN60601-1-2 的需求。

## 技術說明

### 電磁放射性

RadiForce 系列產品應在以下指定的電磁環境中使用。

RadiForce 系列產品的客戶或使用者，須保證會在這樣的環境中使用該產品。

| 放射性測試                                | 符合標準    | 電磁環境 - 指導準則                                                                                                                                |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF 放射性<br>CISPR11 / EN55011          | Group 1 | RadiForce 系列產品僅針對其內部功能使用 RF 能源。<br>因此，其 RF 放射量非常低，不太可能會對附近電子設備造成干擾。<br><br>RadiForce 系列產品適用於所有的設施，包括住宅設施，以及直接連接公共低電壓電源供應系統（供應住宅大樓用電）的住宅設施。 |
| RF 放射性<br>CISPR11 / EN55011          | Class B |                                                                                                                                            |
| 諧波放射性<br>IEC / EN61000-3-2           | Class D |                                                                                                                                            |
| 電壓波動 /<br>閃爍放射性<br>IEC / EN61000-3-3 | 符合標準    |                                                                                                                                            |

| 電磁耐受性                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RadiForce系列已根據IEC / EN60601-1-2定義的專業醫療機構環境測試要求通過檢測，確實符合以下標準等級。<br>RadiForce系列的客戶和使用者必須保證RadiForce系列是在以下環境中使用： |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 耐受性測試                                                                                                         | 專業醫療機構環境的測試等級                                                                                                                                                                                                                                              | 符合標準等級                                                                                                   | 電磁環境 - 指導準則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 靜電釋放(ESD)<br>IEC / EN61000-4-2                                                                                | ±8 kV接觸點放電<br>±15 kV空氣放電                                                                                                                                                                                                                                   | ±8 kV接觸點放電<br>±15 kV空氣放電                                                                                 | 地板材質必須為木質、混凝土或瓷磚。<br>如果地板鋪的是合成材質，相對濕度則必須至少達到30%。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 電氣快速瞬變脈衝群<br>雜訊(Electrical fast transients / bursts)<br>IEC / EN61000-4-4                                     | ±2 kV電源線路<br>±1 kV輸入 / 輸出線路                                                                                                                                                                                                                                | ±2 kV電源線路<br>±1 kV輸入 / 輸出線路                                                                              | 主電源電力品質必須為一般商業或醫院環境的電力品質。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 突波<br>IEC / EN61000-4-5                                                                                       | ±1 kV線對線<br>±2 kV線對地                                                                                                                                                                                                                                       | ±1 kV線對線<br>±2 kV線對地                                                                                     | 主電源電力品質必須為一般商業或醫院環境的電力品質。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 電源供應器輸入端線路產生的電壓驟降、短期間電壓中斷及電壓變動<br>IEC / EN61000-4-11                                                          | 0 % $U_T$ ( $U_T$ 驟降100 %) 0.5週波和1週波<br>70 % $U_T$ ( $U_T$ 驟降30 %) 25週波<br>0 % $U_T$ ( $U_T$ 驟降100 %) 5秒                                                                                                                                                   | 0 % $U_T$ ( $U_T$ 驟降100 %) 0.5週波和1週波<br>70 % $U_T$ ( $U_T$ 驟降30 %) 25週波<br>0 % $U_T$ ( $U_T$ 驟降100 %) 5秒 | 主電源電力品質必須為一般商業或醫院環境的電力品質。如果RadiForce系列產品的使用者要求在主要電源電力中斷的情況下繼續操作該產品，建議使用不斷電系統 或電池，為RadiForce系列產品提供電力。                                                                                                                                                                                                                              |
| 功率頻率磁場<br>IEC / EN61000-4-8                                                                                   | 30 A/m<br>(50 / 60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                     | 30 A/m                                                                                                   | 在一般商業或醫院環境中，功率頻率磁場必須維持一般場合等級的特性。<br>使用時，本產品應距離電源頻率磁場的來源至少15 cm。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RF場產生的傳導干擾<br>IEC / EN61000-4-6                                                                               | 3 Vrms<br>150 kHz - 80 MHz<br>6 Vrms<br>150 kHz和80 MHz之間的ISM波段                                                                                                                                                                                             | 3 Vrms<br>6 Vrms                                                                                         | 使用可攜式及行動式RF通訊設備時，該設備和RadiForce系列產品的任何零組件（包括纜線）的距離不得少於依據傳送器頻率方程式所計算出來的建議相隔距離。<br><br>建議相隔距離<br>$d = 1.2\sqrt{P}$                                                                                                                                                                                                                   |
| 輻射RF場<br>IEC / EN61000-4-3                                                                                    | 3 V/m<br>80 MHz - 2.7 GHz                                                                                                                                                                                                                                  | 3 V/m                                                                                                    | $d = 1.2\sqrt{P}$ , 80 MHz - 800 MHz<br>$d = 2.3\sqrt{P}$ , 800 MHz - 2.7 GHz<br><br>這裡的P為傳送器製造商所提供，以瓦(W)為單位的傳送器最高額定輸出功率，而d則是以公尺(m)為單位的 建議相隔距離。<br><br>依據電磁場測量a)而判定的固定RF傳送器的磁場強度，必須低於每種頻率範圍b)的符合標準等級。<br><br>若設備上有標示下列符號，該設備附近便可能會產生干擾現象。<br> |
| 附註1                                                                                                           | $U_T$ 為採用測試等級之前的AC主電源電壓。                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 附註2                                                                                                           | 在功率為80 MHz和800 MHz時，可採用較高頻率範圍的相隔距離。                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 附註3                                                                                                           | 關於RF場或輻射RF場產生的傳導干擾之準則可能不適用於所有的情況。建築物、物體和人體的吸收及反射作用皆會影響電磁的傳導。                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 附註4                                                                                                           | 150 kHz和80 MHz之間的ISM波段為6.765 MHz至6.795 MHz、13.553 MHz至13.567 MHz、26.957 MHz至27.283 MHz和40.66 MHz至40.70 MHz。                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a)                                                                                                            | 理論上，並無法準確地預測從位置固定的傳送器產生的磁場強度，例如無線電（蜂巢式 / 無線）電話和地面行動式無線電、業餘無線電、AM及FM無線電廣播和電視廣播的基地台。若要評估位置固定的RF傳送器所產生的電磁環境，便須考慮執行電磁場測量。若在RadiForce系列產品使用位置測量到的磁場強度超過上述適用的RF符合標準等級，便須觀察RadiForce系列產品，確認其是否有正常運作。若觀察到運作不正常現象，便須採用其他測量方法來解決問題，例如改變方向或將RadiForce系列產品重新定位到其他地方使用。 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b)                                                                                                            | 超過150 kHz至80 MHz的頻率範圍，磁場強度應低於3 V/m。                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**可攜式或行動式 RF 通訊設備與 RadiForce 系列產品之間的建議相隔距離**

RadiForce 系列產品應在輻射 RF 擾動的電磁環境中使用。RadiForce 系列產品的客戶或使用者只要讓可攜式及行動式 RF 通訊設備 ( 傳送器 ) 與 RadiForce 系列產品之間保持最小相隔距離，就能避免產生電磁干擾現象。

已確認以下 RF 無線通訊設備的近場耐受性：

| 測試頻率<br>(MHz) | 頻寬 a)<br>(MHz) | 服務 a)                                                                             | 調變 b)                     | 最大功率<br>(W) | 最小相隔<br>距離<br>(m) | IEC / EN60601測<br>試等級(V/m) | 符合標準等級<br>(V/m) |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 385           | 380 - 390      | TETRA 400                                                                         | 脈衝調變 b)<br>18 Hz          | 1.8         | 0.3               | 27                         | 27              |
| 450           | 430 - 470      | GMRS 460,<br>FRS 460                                                              | FM<br>±5 kHz偏差<br>1 kHz正弦 | 2           | 0.3               | 28                         | 28              |
| 710           | 704 - 787      | LTE Band 13, 17                                                                   | 脈衝調變 b)<br>217 Hz         | 0.2         | 0.3               | 9                          | 9               |
| 745           |                |                                                                                   |                           |             |                   |                            |                 |
| 780           |                |                                                                                   |                           |             |                   |                            |                 |
| 810           | 800 - 960      | GSM 800 / 900,<br>TETRA 800,<br>iDEN 820<br>CDMA 850,<br>LTE Band 5               | 脈衝調變 b)<br>18 Hz          | 2           | 0.3               | 28                         | 28              |
| 870           |                |                                                                                   |                           |             |                   |                            |                 |
| 930           |                |                                                                                   |                           |             |                   |                            |                 |
| 1720          | 1700 - 1990    | GSM 1800;<br>CDMA 1900;<br>GSM 1900;<br>DECT;<br>LTE Band 1, 3, 4,<br>25;<br>UMTS | 脈衝調變 b)<br>217 Hz         | 2           | 0.3               | 28                         | 28              |
| 1845          |                |                                                                                   |                           |             |                   |                            |                 |
| 1970          |                |                                                                                   |                           |             |                   |                            |                 |
| 2450          | 2400 - 2570    | Bluetooth,<br>WLAN,<br>802.11 b/g/n,<br>RFID 2450,<br>LTE Band 7                  | 脈衝調變 b)<br>217 Hz         | 2           | 0.3               | 28                         | 28              |
| 5240          | 5100 - 5800    | WLAN 802.11 a/n                                                                   | 脈衝調變 b)<br>217 Hz         | 0.2         | 0.3               | 9                          | 9               |
| 5500          |                |                                                                                   |                           |             |                   |                            |                 |
| 5785          |                |                                                                                   |                           |             |                   |                            |                 |

a) 對於某些服務，只能包含上行頻率。

b) 使用50 %工作週期方波訊號調變載波。

RadiForce系列產品應在輻射RF擾動的電磁環境中使用。對於其他可攜式及行動式RF通訊設備 ( 傳送器 )，根據通訊設備最大輸出功率，可攜式及行動式RF通訊設備 ( 傳送器 ) 與RadiForce系列產品之間的最小相隔距離如下建議。

| 傳送器的額定最高輸出功率<br>(W) | 根據傳送器頻率建議的相隔距離<br>(m)       |                             |                              |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                     | 150 kHz至80 MHz<br>d = 1.2√P | 80 MHz至800 MHz<br>d = 1.2√P | 800 MHz至2.7 GHz<br>d = 2.3√P |
| 0.01                | 0.12                        | 0.12                        | 0.23                         |
| 0.1                 | 0.38                        | 0.38                        | 0.73                         |
| 1                   | 1.2                         | 1.2                         | 2.3                          |
| 10                  | 3.8                         | 3.8                         | 7.3                          |
| 100                 | 12                          | 12                          | 23                           |

若傳送器額定的最高輸出功率未列示在上表中，可使用傳送器頻率適用 的方程式來估算建議的相隔距離d ( 以公尺(m)為單位 )，而P為傳送器製造商提供的傳送器最高額定輸出功率 ( 以瓦(w)為單位 )。

附註 1 在功率為80 MHz和800 MHz時，可採用較高頻率範圍的相隔距離。

附註 2 這些準則可能不適用於所有的情況。建築物、物體和人體的吸收及反射作用皆會影響電磁的傳導。

| 纜線            | 長度     |
|---------------|--------|
| 訊號線： PP300    | 3 m    |
| 訊號線： PP028    | 0.28 m |
| 訊號線： DD300DL  | 3 m    |
| USB 纜線： UU300 | 3 m    |
| 電源線 ( 帶接地 )   | 3 m    |

# 限用物質含有情況標示

| 設備名稱：LCD 彩色顯示器·型號( 型式)：RadiForce MX315W<br>Equipment name: Color LCD Monitor, Type designation (Type): RadiForce MX315W                                                                                                                                                                               |                                                              |                      |                      |                                                      |                                              |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 單元<br>Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                      |                      |                                                      |                                              |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 鉛<br>Lead<br>(Pb)                                            | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 電路板<br>Printed<br>circuit board                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                            | ○                    | ○                    | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 外殼<br>Housing                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○                                                            | ○                    | ○                    | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 液晶單元<br>LCD Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                            | ○                    | ○                    | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 構造部品<br>( 例：板金, 加工零件,<br>固定部件, 等...)<br>Structual Part<br>(Sheetmetal Part,<br>Machined Part,<br>Fastening Part...)                                                                                                                                                                                   | —                                                            | ○                    | ○                    | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 配線部品<br>( 例：電源線, 信號<br>線, 內部線, 等...)<br>Cable<br>(Power Cable,<br>Signal Cable, Inner<br>Cable...)                                                                                                                                                                                                    | —                                                            | ○                    | ○                    | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br>Note 1: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.<br>備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。<br>Note 2: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. |                                                              |                      |                      |                                                      |                                              |                                                      |



## **EIZO Corporation**

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

## **EIZO GmbH** EC REP

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

## **艺卓显像技术(苏州)有限公司**

中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B

## **EIZO Limited** UK Responsible Person

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,  
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

## **EIZO AG** CH REP

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

Copyright © 2017 - 2022 EIZO Corporation. All rights reserved.



00N0N006G1  
IFU-MX315W-6

7th Edition - March 10th, 2022 Printed in Japan.