

Manuel d'utilisation

DuraVision® FDF2382WT

Moniteur couleur LCD à écran tactile


Important

Veillez lire attentivement ce « Manuel d'utilisation » et le « PRECAUTIONS » (tome separe) afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute securite.

-
- Reportez-vous à la « Guide d'installation » pour obtenir plus d'informations sur l'installation et/ou le branchement du moniteur.
 - Pour obtenir les toutes dernières informations relatives au produit, dont le « Manuel d'utilisation », reportez-vous à notre site web : www.eizoglobal.com
-



Emplacements des étiquettes de sécurité

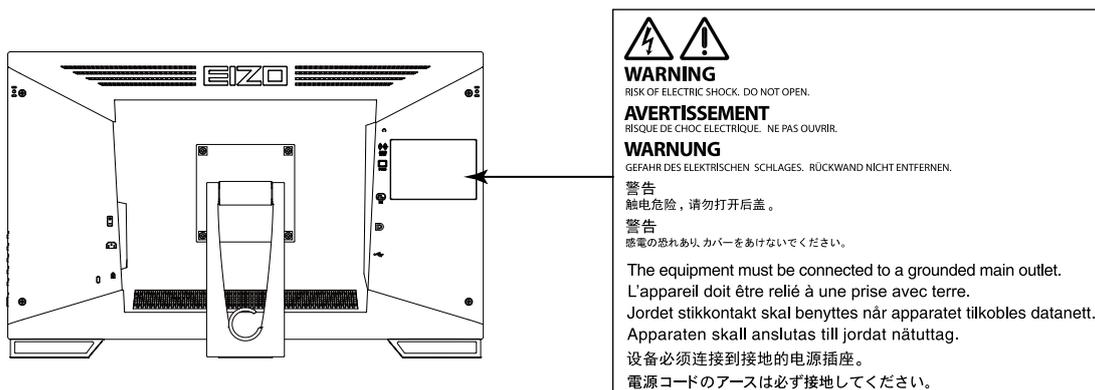

Symboles sur l'appareil

Symbole	Signification du symbole
	Touche d'alimentation Appuyez pour allumer ou éteindre le moniteur.
	Courant alternatif
	Avertissement sur les dangers electriques
	ATTENTION Reportez-vous à la section SYMBOLES DE SECURITE du chapitre PRECAUTIONS.
	Marquage DEEE Le produit doit être éliminé séparément ; les matériaux peuvent être recyclés.
	Marquage CE Marque de conformité aux dispositions des directives de l'Union Européenne 93/42/EEC et 2011/65/EU.

Ce produit a été spécialement réglé pour l'utilisation dans la région dans laquelle il a d'abord été livré. Si utilisé en dehors de cette région, le produit pourrait ne pas fonctionner comme indiqué dans les spécifications.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de EIZO Corporation.

EIZO Corporation n'est tenu à aucun engagement de confidentialité sauf en cas d'accord préalable passé avant la réception de ces informations par EIZO Corporation. Malgré tous les efforts déployés pour garantir la mise à jour des informations contenues dans ce manuel, veuillez noter que les caractéristiques techniques du moniteur EIZO sont sujettes à modification sans préavis.

Avertissement concernant le moniteur

Ce produit est prévu pour les usages polyvalents comme la création de documents, la visualisation de contenu multimédia (suppose une utilisation de 12 heures par jour).

Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue. Les performances du produit peuvent être différentes de celles indiquées dans les caractéristiques en cas d'utilisation dans une région différente de celle prévue à l'origine.

Ce produit peut ne pas être couvert par la garantie pour des usages autres que ceux décrits dans le présent manuel.

Les spécifications notées dans ce manuel ne sont applicables que lorsque les éléments suivants sont utilisés :

- Cordons d'alimentation fournis avec le produit
 - Câbles de signalisation spécifiés par nos soins
-

Utilisez uniquement avec ce produit les produits optionnels fabriqués ou spécifiés par nos soins.

Si vous placez ce produit sur un bureau avec une surface laquée, la couleur risque d'adhérer au bas du support en raison de la composition du caoutchouc.

30 minutes sont nécessaires à la stabilisation des performances des composants électriques. Veuillez attendre au moins 30 minutes après avoir mis en marche le moniteur pour le régler.

Les moniteurs devraient être réglés à une luminosité inférieure pour réduire les changements de luminosité causés par une utilisation à long terme et maintenir un affichage stable.

Lorsque l'image de l'écran change après que la même image est restée affichée pendant une période prolongée, une image rémanente risque de s'afficher. Utilisez l'économiseur d'écran ou la fonction d'économie d'énergie pour éviter d'afficher la même image pendant une période prolongée. Selon l'image, une image rémanente peut apparaître même si elle a été affichée durant une courte période. Pour éliminer un tel phénomène, modifiez l'image ou coupez l'alimentation pendant plusieurs heures.

Si le moniteur affiche un contenu en continu sur une longue période, des taches sombres ou des brûlures sont susceptibles d'apparaître sur l'écran. Afin d'optimiser la durée de vie d'un moniteur, nous vous conseillons de l'éteindre régulièrement.

Un nettoyage périodique est recommandé pour conserver son aspect neuf au moniteur et prolonger sa durée de vie (Référez-vous à « [Nettoyage](#) » (page 4)).

Le panneau LCD est fabriqué à l'aide d'une technologie de haute précision. Bien que, il est possible que des pixels manquants ou des pixels allumés apparaissent sur l'écran LCD. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Pourcentage de points effectifs : 99,9994 % ou supérieur.

La durée de vie du rétro-éclairage du panneau LCD est limitée. Les habitudes d'utilisation, par exemple lorsque le moniteur est allumé en continu pendant de longues périodes, peuvent raccourcir la durée de vie du rétroéclairage, lequel doit alors être remplacé plus tôt que prévu. Si l'écran s'assombrit ou se brouille, prenez contact avec votre représentant local EIZO.

Prenez garde de ne pas rayer ou d'appuyer sur le panneau LCD avec des objets pointus, car cela pourrait entraîner des dommages au panneau LCD. Ne tentez jamais de le nettoyer à sec avec du tissu, au risque de le rayer.

Lorsque le moniteur est froid et déplacé dans une autre pièce ou lorsque la température de la pièce augmente rapidement, de la condensation peut se former à l'intérieur et à l'extérieur du moniteur. Dans ce cas, ne mettez pas le moniteur sous tension. Et attendez la disparition de la condensation. Sinon, le moniteur pourrait être endommagé.

(Précautions lors de l'utilisation de l'écran tactile)

Pendant l'opération tactile

Soyez attentif aux points suivants. Sinon cela peut entraîner des dommages au moniteur.

- N'appuyez pas trop fort sur l'écran, évitez de le rayer ou de le pousser.
 - Ne touchez pas l'écran avec des objets durs comme des stylos à billes ou du métal.
-
-

Nettoyage

Vous pouvez enlever les taches de la carrosserie et la surface de l'écran en utilisant le chiffon fourni.

Attention

- Ne laissez aucun liquide pénétrer dans l'espace situé entre le panneau et le cadre de l'écran.
 - Les produits chimiques comme l'alcool et des solutions antiseptiques peuvent provoquer une modification du brillant, le ternissement et la décoloration de la carrosserie ou du panneau LCD et également la détérioration de la qualité de l'image.
 - N'utilisez jamais de diluant, du benzène, de la cire ou un nettoyant abrasif car ils peuvent endommager la carrosserie ou la surface du panneau LCD.
-

Pour un confort d'utilisation du moniteur

- Un écran trop sombre ou trop lumineux peut abîmer les yeux. Ajustez la luminosité du moniteur en fonction des conditions ambiantes.
- Regarder le moniteur trop longtemps entraîne une fatigue oculaire. Faites des pauses de 10 minutes toutes les heures.

TABLE DES MATIERES

Avertissement concernant le moniteur	3	4-6. Réglages moniteur	23	
Nettoyage	4	● Signal entrée	23	
Pour un confort d'utilisation du moniteur.....	4	● Voyant Tension.....	23	
TABLE DES MATIERES	5	● Langues.....	23	
Chapitre 1 Introduction	6	● Réglages du menu	24	
1-1. Caractéristiques	6	● Restaurer.....	24	
● Conception ultra-plate.....	6	4-7. Informations	24	
● Mécanisme de redressement facile	6	4-8. Touches de verrouillage du	fonctionnement	24
● Fonction multi-touch 10 points	6	Chapitre 5 Dépannage	25	
1-2. Commandes et fonctions	7	5-1. Aucune image	25	
● Avant	7	5-2. Problèmes d'imagerie	(analogique et numérique)	26
● Arrière	8	5-3. Problèmes d'imagerie	(analogique uniquement)	27
1-3. Fixation de l'enveloppe du crayon tactile ... 9		5-4. Problèmes d'imagerie	(numérique uniquement)	27
1-4. EIZO LCD Utility Disk	9	5-5. Problèmes concernant l'écran tactile	28	
● Contenu du disque et présentation du logiciel... 9		5-6. Autres problèmes	30	
Chapitre 2 Ajustement / Réglage de base	10	Chapitre 6 Référence	31	
2-1. Activation ou désactivation de l'écran	tactile	6-1. Fixation du bras en option	31	
2-2. Commutation du signal d'entrée	10	6-2. Raccordement de plusieurs PC	33	
2-3. Ajustement de la luminosité	11	6-3. Spécifications	34	
2-4. Réglage du volume	11	● Résolutions compatibles	35	
Chapitre 3 Réglages de l'écran tactile	12	● Principaux réglages par défaut	36	
3-1. Méthode de réglage de l'écran tactile	12	● Accessoires.....	36	
3-2. Ajustement de la position tactile	12	Annexe	37	
3-3. Configuration des réglages du contrôle	de l'écran tactile	Marque commerciale	37	
.....	14	Droit d'auteur	37	
Chapitre 4 Ajustement / Réglage avancés	15	Déclaration de conformité à la FCC	38	
4-1. Fonctionnement de base du menu	Réglage	GARANTIE LIMITÉE	39	
.....	15	Informations sur le recyclage	40	
4-2. Couleur	16			
● Mode couleur	16			
● Luminosité	16			
● Contraste.....	17			
● Température	17			
● Gamma.....	17			
● Réglages avancés.....	18			
● Réinit. couleur	18			
4-3. Écran	19			
● Taille	19			
● Lissage.....	19			
● Ajustement analog.	20			
4-4. Son	21			
● Source	21			
4-5. PowerManager	22			
● Veille.....	22			
● Minuterie Eco	22			


Chapitre 1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un moniteur couleur LCD EIZO.

1-1. Caractéristiques


● Conception ultra-plaie

Une conception ultra-plaie sans obstacle a été adoptée pour le cadre. Vous pouvez toucher chaque bord de l'écran en toute sécurité avec le bout des doigts.

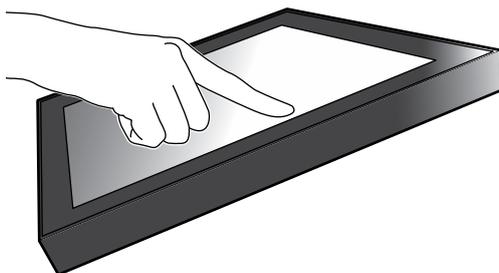

● Mécanisme de redressement facile


L'angle d'inclinaison peut être ajusté en continu. Vous pouvez facilement modifier la position d'écran pour répondre à vos besoins, par exemple, pour le travail de bureau ou les opérations multipoints.

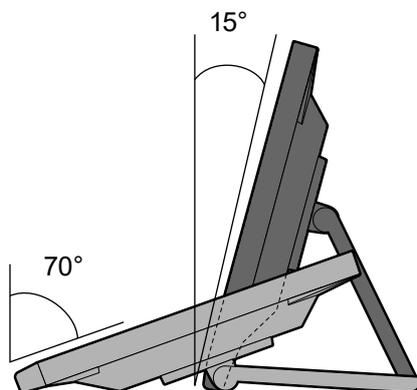


● Fonction multi-touch 10 points

Vous pouvez effectuer des opérations telles que l'agrandissement, la réduction et la rotation à l'aide de la fonction multi-touch. L'écran tactile réagit à un effleurement des doigts sur l'écran, permettant ainsi d'effectuer aisément des opérations de glissement et de pincement.

Élargir / Réduire

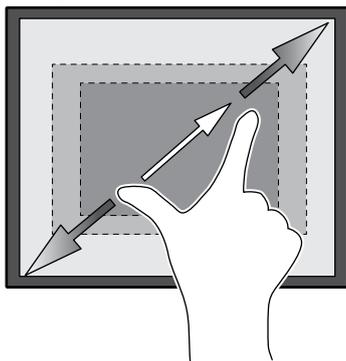


Pivoter

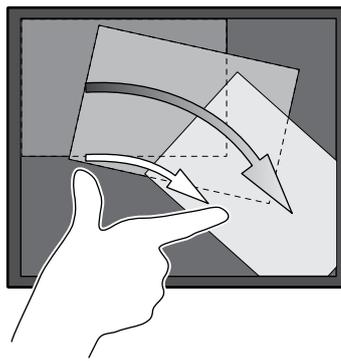

1-2. Commandes et fonctions

● Avant

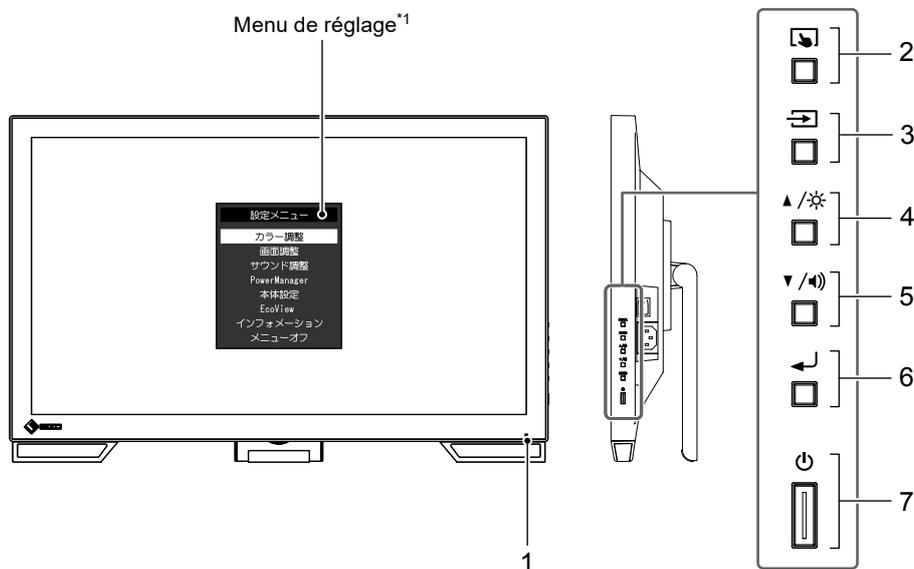


1. Témoin de fonctionnement	Indique l'état de fonctionnement du moniteur. Bleu : Affichage écran Orange : Mode économie d'énergie ARRÊT : Alimentation coupée / Arrêt
2. Touche	Permet de commuter l'écran tactile sur les modes activé ou désactivé ou d'étalonner la sensibilité tactile (page 10).
3. Touche	Commute les signaux d'entrée de l'affichage (page 10).
4. Touche	Permet de sélectionner un élément, ajuster une fonction ou régler une option en affichant le menu réglage, et d'afficher l'écran d'ajustement de la luminosité (page 11).
5. Touche	Permet de sélectionner un élément, ajuster une fonction ou régler une option en affichant le menu réglage, et d'afficher l'écran de commande du volume (page 11).
6. Touche	Permet d'afficher le menu Réglage, de sélectionner un élément à ajuster de chaque menu, et de sauvegarder les valeurs ajustées (page 15).
7. Touche	Pour mettre sous / hors tension.

*1 Pour plus de détails concernant l'utilisation, voir « 4-1. Fonctionnement de base du menu Réglage » (page 15).

*2 Dans ce Manuel d'utilisation, la touche pourrait s'afficher ci-après sous , et la touche sous .

● Arrière

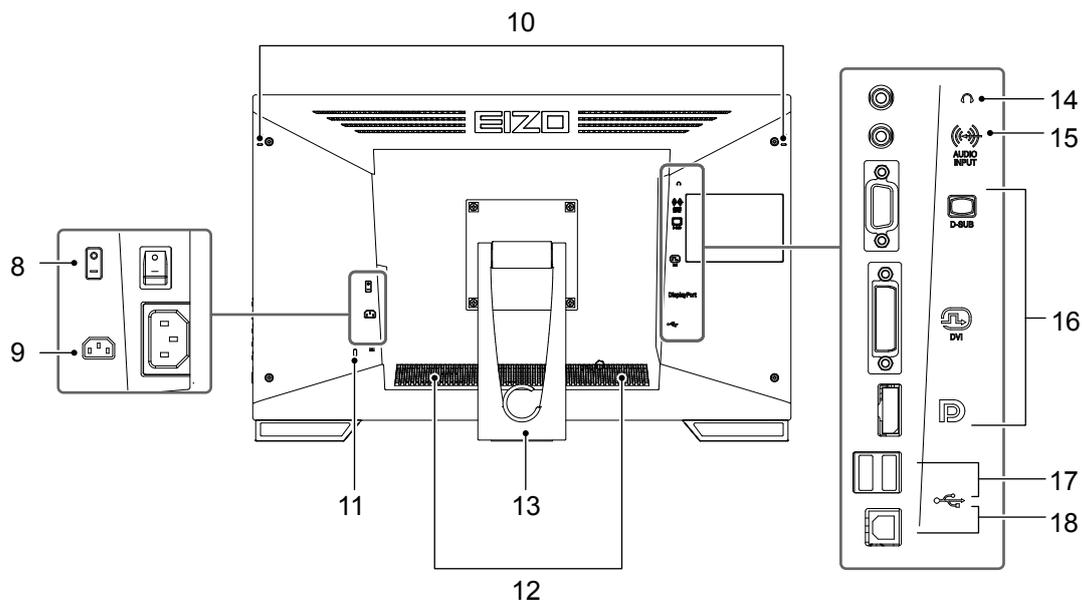

8. Commutateur d'alimentation principal	Permet de mettre le moniteur sous / hors tension. : ON, ○ : OFF
9. Connecteur d'alimentation	Permet de connecter le cordon d'alimentation.
10. Orifice de fixation de l'enveloppe du crayon tactile*³	Utilisé pour fixer un fourreau de crayon tactile.
11. Fente pour le verrouillage de sécurité	Compatible avec le système de sécurité MicroSaver de Kensington.
12. Haut-parleur	Permet de diffuser une source audio.
13. Pied (avec porte-câble)	Permet d'ajuster l'angle de l'écran du moniteur.
14. Prise pour écouteurs	Permet de brancher un casque.
15. Connecteur d'entrée vocale analogique	Permet d'émettre la voix externe depuis le moniteur.
16. Connecteur de signal d'entrée	Raccordez-le au PC. Port supérieur : Connecteur D-Sub mini 15 broches Port moyen : Connecteur DVI-D Port inférieur : Connecteur DisplayPort
17. Port USB aval	Permet de brancher un périphérique USB 2.0.
18. Port USB amont	Permet de connecter le câble USB pour l'utilisation du moniteur en tant qu'écran tactile ou l'utilisation de la fonction de concentrateur USB.


*3 Une enveloppe est fournie avec le crayon tactile (Accessoires (page 36)). Pour la méthode de fixation, voir « 1-3. Fixation de l'enveloppe du crayon tactile » (page 9)

1-3. Fixation de l'enveloppe du crayon tactile

Remarque

- Une enveloppe est fournie avec le crayon tactile (Accessoires (« Accessoires » (page 36))).

Fixez l'enveloppe du crayon tactile à l'un des trous de droite ou de gauche à l'arrière du moniteur. Pour fixer fermement l'enveloppe du crayon tactile, utilisez la vis fournie avec le crayon tactile.

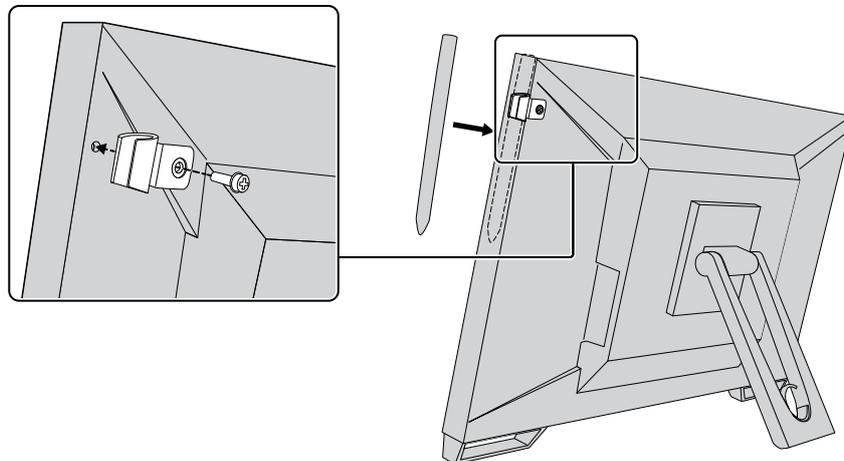

1-4. EIZO LCD Utility Disk

Un CD-ROM utilitaire « EIZO LCD Utility Disk » est fourni avec ce produit. Le tableau suivant présente le contenu du disque et l'ensemble des logiciels.

● Contenu du disque et présentation du logiciel

Le disque comprend un logiciel de réglage, un logiciel pour l'écran tactile, et un Manuel d'utilisation. Pour les procédures de démarrage du logiciel ou les procédures d'accès au fichier, voir le fichier Readme.txt sur le disque.


Élément	Présentation
Pilote d'écran tactile	Pilote d'écran tactile fourni par EIZO.* 1
TPOffset	Logiciel permettant d'étalonner la sensibilité de l'écran tactile.* 1 Utilisez ce logiciel lorsque l'écran tactile ne répond pas ou répond seulement après une pression importante.
Manuel d'utilisation du moniteur (fichier PDF)	
Dimensions externes	
Fichier Readme.txt	

*1 Uniquement pour Windows. Pour plus de détails sur l'installation et l'utilisation de chaque logiciel, reportez-vous au Manuel d'utilisation qui y correspond, sur le CD-ROM .

Chapitre 2 Ajustement / Réglage de base

2-1. Activation ou désactivation de l'écran tactile

Vous pouvez commuter l'écran tactile sur les modes activé ou désactivé. Cette fonction est disponible lorsque vous souhaitez afficher temporairement la fonction de l'écran tactile.

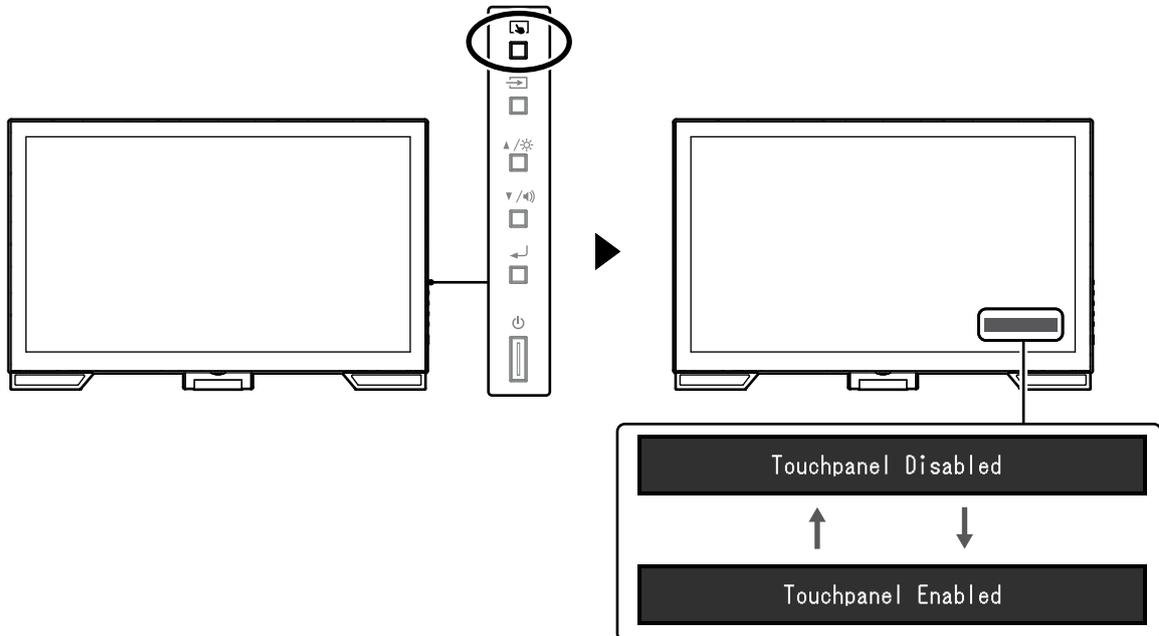


Remarque

- Maintenir enfoncée la touche  vous permet d'étalonner la sensibilité tactile.

2-2. Commutation du signal d'entrée

Lorsque le moniteur reçoit plusieurs entrées de signaux, le signal à afficher à l'écran peut être changé. Lorsque le signal est commuté, le nom du port d'entrée actif s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

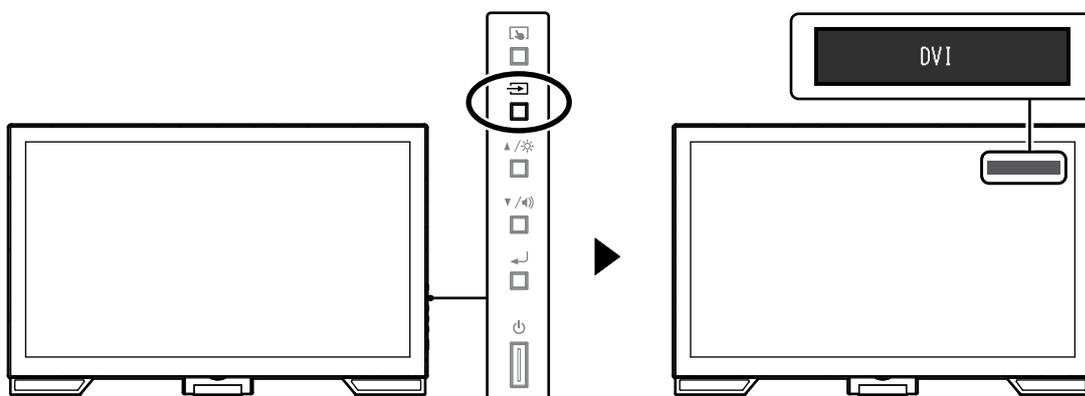


2-3. Ajustement de la luminosité

La luminosité de l'écran peut être ajustée pour l'adapter à l'environnement de l'installation ou à la préférence personnelle.

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran en modifiant la luminosité du rétroéclairage (la source de lumière émanant de l'arrière du panneau LCD).

Plage de réglage

0 à 100

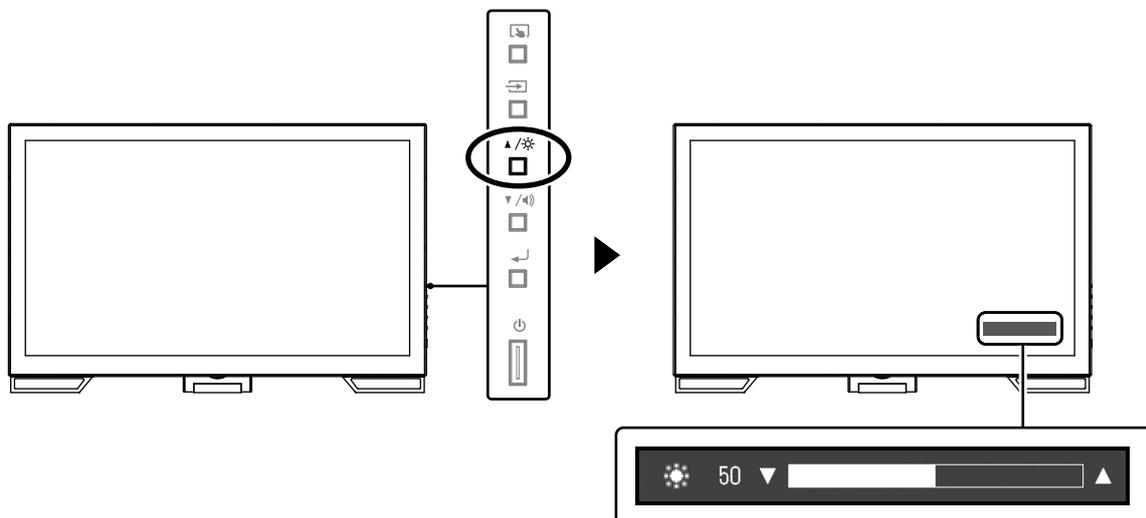


2-4. Réglage du volume

Vous pouvez syntoniser individuellement le volume du haut-parleur ou des écouteurs.

Plage de réglage

0 à 30

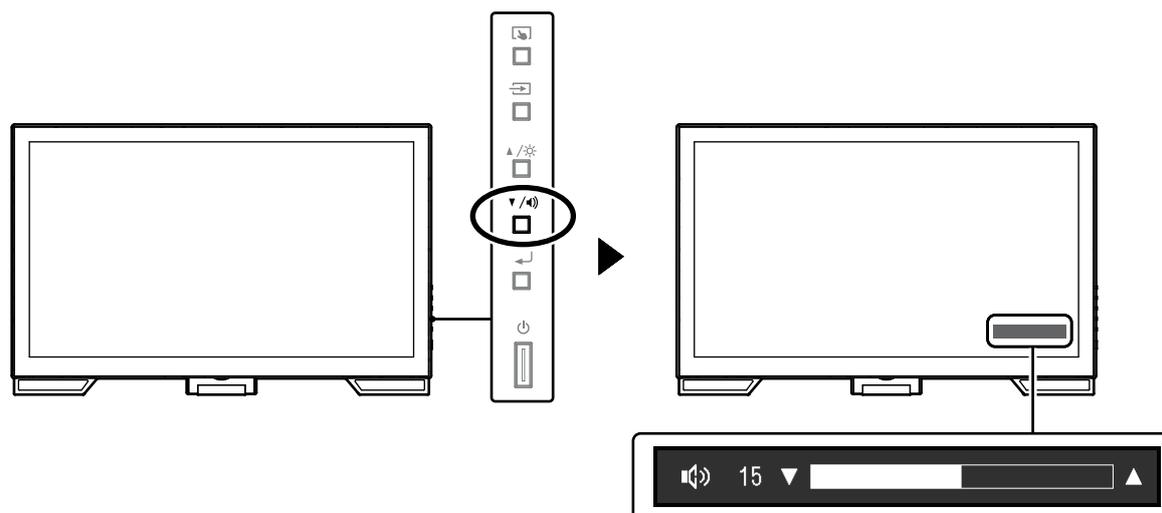

Chapitre 3 Réglages de l'écran tactile

3-1. Méthode de réglage de l'écran tactile

Les fonctions d'écran tactile de ce produit varient en fonction du pilote utilisé et ses réglages. Configurez les réglages pour qu'ils correspondent aux applications que vous utilisez.

Fonction	Pilote standard Windows	Pilote d'écran tactile dédié (DMT-DD)*1	
Installation du pilote	Non requis	Requis	
Émission de son au toucher	x	√	
Multi-connexion*2	√*3	√	
Mode de fonctionnement	Numériseur tactile*4	Numériseur tactile*4,5	Émulation de la souris*5
Opération multipoint	√	√	x

*1 Inclus dans le EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

*2 √ : Deux ou plusieurs moniteurs peuvent être branchés sur un seul ordinateur.

*3 Uniquement disponible avec Windows 11 / Windows 10.

*4 L'opération tactile peut ne pas être reconnue sur une application conçue par émulation de la souris.

*5 Pour obtenir plus d'informations sur la procédure de configuration, voir le Manuel d'utilisation du pilote d'écran tactile (inclus sur le CD-ROM).

Remarque

- Lorsque le réglage est terminé, exécutez l'application « TPOffset » incluse sur le CD-ROM et étalonnez la sensibilité de l'écran tactile.

Lorsque vous utilisez le pilote standard Windows, configurez les réglages en vous reportant aux informations suivantes.

3-2. Ajustement de la position tactile

Faites des ajustements pour aligner la position tactile avec la position du curseur affiché en réponse à l'opération tactile.

Attention

- Ne placez pas vos mains ni aucun objet métallique à proximité de l'écran car celui-ci est sensible aux conducteurs électriques.
- Si la boîte de dialogue « Contrôle de compte d'utilisateur » s'affiche durant le fonctionnement, procédez conformément aux instructions indiquées.

1. Ouvrez le Panneau de configuration de Windows.

La méthode d'ouverture du Panneau de configuration diffère en fonction du système d'exploitation.

Windows 11

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur « Toutes les applications » - « Outils Windows » - « Panneau de configuration ».

Windows 10

1. Ouvrez le menu Accueil, et cliquez sur « Toutes les applications » - « Système Windows » - « Panneau de configuration ».

Windows 8.1


1. Cliquez sur  en bas de l'écran « Accueil ».
L'écran « Applications » s'affiche.
2. Cliquez sur « Panneau de configuration » sous « Système Windows ».

Windows 7

1. Cliquez sur « Accueil » - « Panneau de configuration ».

2. Cliquez sur « Matériel et audio » - « Paramètres du Tablet PC ».

La fenêtre « Paramètres du Tablet PC » apparaît.

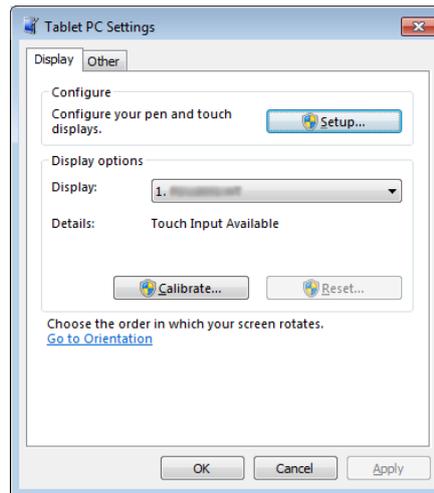

3. Cliquez sur « Configurer » dans l'onglet « Affichage ».

Un écran de type écran tactile avec un fond blanc s'affiche.

Attention

- Si le moniteur est utilisé dans un environnement à moniteurs multiples, spécifiez l'écran tactile conformément au message affiché à l'écran.

4. Touchez l'écran avec votre doigt.

L'écran touché est reconnu comme étant un écran tactile.

5. Appuyez sur « Entrée » sur le clavier.

La fenêtre « Paramètres du Tablet PC » réapparaît.

6. Cliquez sur « Étalonner ».


Un écran avec un fond blanc s'affiche.

Attention

- Si le moniteur est utilisé dans un environnement à moniteurs multiples, sélectionnez le moniteur pour lequel étalonner la position tactile dans le menu déroulant « Affichage » puis cliquez sur « Étalonner ».

7. Touchez la cible d'étalonnage (croix) quelques secondes avec le doigt puis relâchez.

La cible d'étalonnage apparaît 16 fois sur l'écran, en commençant en haut de la gauche vers la droite puis en bas de la gauche vers la droite.

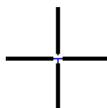

Remarque

- Pour le deuxième étalonnage ou les suivants, la cible d'étalonnage apparaît 4 fois.

8. Après avoir terminé le calibrage de la position tactile, cliquez sur « Oui » pour enregistrer les données de calibrage.

9. Cliquez sur « OK » pour fermer la fenêtre.


3-3. Configuration des réglages du contrôle de l'écran tactile

1. Ouvrez le Panneau de configuration de Windows.

La méthode d'ouverture du Panneau de configuration diffère en fonction du système d'exploitation. (Voir [page 12](#))

2. Cliquez sur « Matériel et audio » - « Stylet et fonction tactile ».

La fenêtre « Stylet et fonction tactile » apparaît.

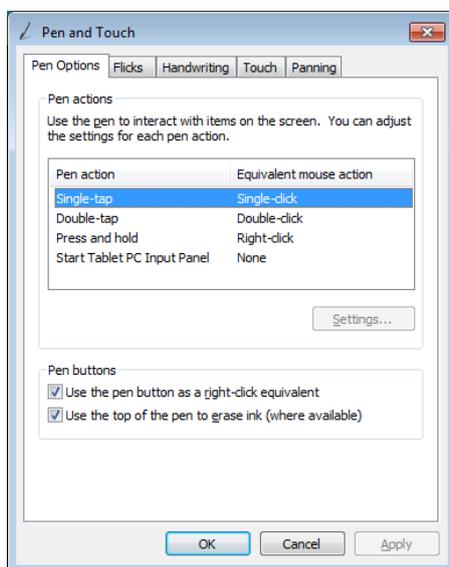

Configurez les réglages du contrôle de l'écran tactile dans la fenêtre « Stylet et fonction tactile ». Pour les réglages détaillés, reportez-vous aux réglages figurant sur chaque onglet et à l'Aide de Windows.

3. Après avoir terminé les réglages, cliquez sur « OK » pour fermer la fenêtre.

Chapitre 4 Ajustement / Réglage avancés

Ce chapitre décrit l'ajustement avancé du moniteur et les procédures de réglage en utilisant le menu Réglage.

4-1. Fonctionnement de base du menu Réglage

1. Affichage du menu Réglage


1. Appuyez sur \leftarrow pour ouvrir le menu Réglage.

2. Ajustement / Réglage

1. Utilisez \blacktriangle \blacktriangledown pour sélectionner un menu à ajuster ou à configurer, et appuyez sur \leftarrow . Le sous-menu s'affiche.



2. Utilisez \blacktriangle \blacktriangledown pour sélectionner un élément à ajuster ou à configurer, et appuyez sur \leftarrow . Le menu d'ajustement / réglage s'affiche.

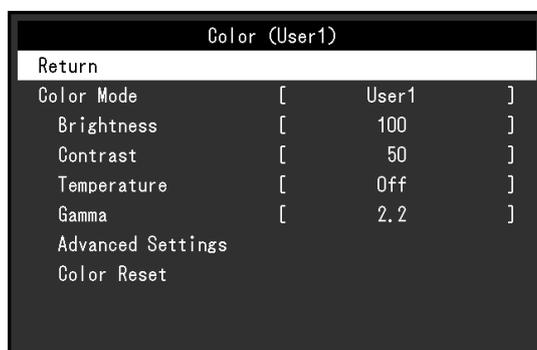

3. Utilisez \blacktriangle \blacktriangledown pour effectuer les ajustements / réglages, et appuyez sur \leftarrow pour appliquer le réglage.




3. Sortie

1. Sélectionnez « Retour » dans le sous-menu, puis appuyez sur \leftarrow . Le menu Réglage s'affiche.
2. Sélectionnez « Sortie » dans le menu Réglage, puis appuyez sur \leftarrow . Vous quittez le menu « Réglage ».

Remarque

- Vous pouvez également quitter le menu Réglage en appuyant deux fois rapidement sur \leftarrow .

4-2. Couleur

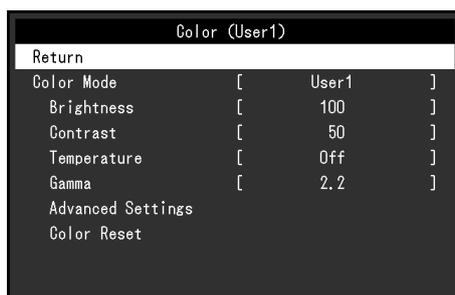

● Mode couleur

Cette fonction facilite la sélection d'un mode personnalisé en fonction de l'application du moniteur.

Mode	Fonction
User1	Sélectionnez cela pour définir un jeu de paramètres désiré.
User2	
sRGB	Adapté à la synchronisation des couleurs des périphériques compatibles sRGB.

Les fonctions qui peuvent être ajustées diffèrent selon le mode couleur.

√ : Réglable - : Non réglable

Fonction	Mode couleur			
	User1	User2	sRGB	
Luminosité	√	√	√	
Contraste	√	√	-	
Température	√	√	-	
Gamma	√	√	-	
Réglages avancés	Nuance	√	√	-
	Saturation	√	√	-
	Overdrive	√	√	-
	Gain	√	√	-
Restaurer	√	√	√	

Attention

- 30 minutes sont nécessaires à la stabilisation des performances des composants électriques. Veuillez attendre au moins 30 minutes après avoir mis en marche le moniteur pour le régler.
- Effectuez d'abord le réglage de niveau lorsque vous ajustez les couleurs pour les signaux analogiques (voir « Réglage niveau auto » (page 20)).
- La même image peut être visionnée dans différentes couleurs sur de multiples moniteurs, en raison des caractéristiques spécifiques des moniteurs. Effectuez manuellement des réglages précis de la couleur lorsque vous synchronisez les couleurs sur de multiples moniteurs.

● Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran en modifiant la luminosité du rétroéclairage (la source de lumière émanant de l'arrière du panneau LCD).

Plage de réglage

0 à 100

Remarque

- Si vous trouvez que l'image est trop sombre, même si la luminosité est réglée à 100, ajustez le contraste.

● **Contraste**

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran en modifiant le niveau du signal vidéo.

Plage de réglage

0 à 100

Remarque

- Avec un contraste de 50, toute la palette de couleurs est affichée.
 - Lors du réglage du moniteur, il est conseillé d'effectuer le réglage de la luminosité, ce qui ne risquerait pas de faire perdre les caractéristiques de gradation, avant le réglage du contraste.
 - Effectuez le réglage du contraste dans les cas suivants.
 - Si l'image est trop sombre, même si la luminosité est réglée sur 100 (Définissez un contraste supérieur à 50.)
-

● **Température**

Vous pouvez régler la température de la couleur.

La température de couleur sert normalement à exprimer la nuance de « Blanc » et / ou « Noir » par une valeur numérique. L'unité de cette valeur est le degré Kelvin (« K », en abrégé).

L'écran devient rougeâtre lorsque la température de couleur est basse, et bleuâtre lorsqu'elle est élevée, comme la température d'une flamme. Les valeurs de gain prédéfinies sont configurées pour chaque valeur de paramétrage de la température de couleur.

Plage de réglage

Arrêt / De 4000 K à 10000 K (spécifiée par chaque unité de 500 K, y compris 9300 K)

Remarque

- La valeur de « K » est indiquée à titre de référence uniquement.
 - La fonction « Réglages avancés » - « Gain » vous permet d'effectuer un ajustement encore plus précis (voir « Gain » (page 18)).
 - Si vous le réglez sur « Arrêt », l'image sera affichée dans la couleur prédéfinie du moniteur (Gain : 100 pour chaque RGB).
 - Lorsque le gain est modifié, la température de couleur est basculée sur « Arrêt ».
-

● **Gamma**

Vous pouvez régler la valeur gamma. La luminosité du moniteur varie selon le signal d'entrée.

Toutefois, le taux de variation n'est pas proportionnel au signal d'entrée. La « Correction Gamma » permet de maintenir l'équilibre entre le signal d'entrée et la luminosité du moniteur.


Plage de réglage

1.8 / 2.0 / 2.2

Remarque

- Si « sRGB » est sélectionné pour le mode couleur, « 2.2 » s'affiche pour la valeur gamma.
-

● Réglages avancés

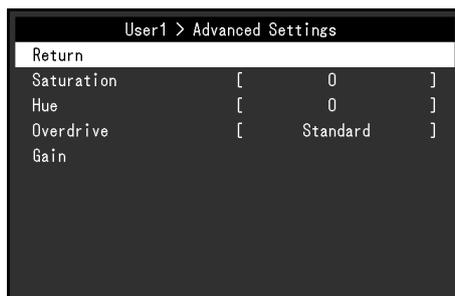

Fonction	Plage de réglage	Description
Saturation	De -50 à 50	Cette fonction permet de régler la saturation de la couleur. Remarque <ul style="list-style-type: none"> L'utilisation de cette fonction peut empêcher certaines palettes de couleurs de s'afficher. La valeur minimale (-50) change l'écran pour le mettre en mode monochrome.
Nuance	De -50 à 50	Cette fonction permet de régler la nuance. Remarque <ul style="list-style-type: none"> L'utilisation de cette fonction peut empêcher certaines palettes de couleurs de s'afficher.
Overdrive	Amélioré / Standard / Arrêt	Cette fonction vous permet de régler l'intensité de suractivité en fonction de l'utilisation du moniteur. Vous pouvez réduire les décalages image en réglant cette fonction sur « Amélioré » lors de l'affichage d'images animées. Remarque <ul style="list-style-type: none"> La fonction de suractivité est désactivée dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> Lorsque la fréquence de balayage vertical des signaux d'entrée est supérieure à 70 Hz Lorsque « Normal » ou « Elargi » est sélectionné dans « Taille » (sauf si la résolution d'affichage est 1920 × 1080).
Gain	0 à 100	La luminosité de chaque composant de la couleur (rouge, vert, et bleu) est appelée « Gain ». Il est possible de changer la nuance de « blanc » en ajustant le gain. Remarque <ul style="list-style-type: none"> L'utilisation de cette fonction peut empêcher certaines palettes de couleurs de s'afficher. La valeur de gain change avec celle de la température de couleur. Lorsque le gain est modifié, la température de couleur est basculée sur « Arrêt ».

● Réinit. couleur


Restaurez tous les ajustements de couleur pour le mode couleur actuellement sélectionné à leurs réglages par défaut.

4-3. Écran

Pour l'entrée de signal D-Sub



Pour l'entrée de signal DisplayPort ou DVI

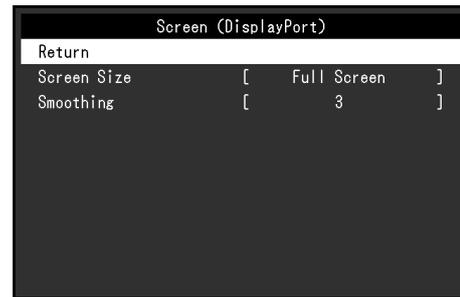


● Taille

L'image dans une résolution différente de celle recommandée s'affiche automatiquement en plein écran. Vous pouvez modifier le réglage de l'écran à l'aide de la fonction « Taille ».

Réglages	Fonction
Plein écran	Affiche une image sur la totalité de l'écran. Dans certains cas, les images peuvent être déformées, car la fréquence du balayage vertical est différente de la fréquence du balayage horizontal.
Elargi	Affiche une image sur la totalité de l'écran. Dans certains cas, une bande noire verticale ou horizontale apparaît afin de compenser la différence entre la fréquence de balayage vertical et horizontal.
Normal	Affiche les images selon la résolution spécifiée.

Exemple : Taille de l'image 1024 × 768

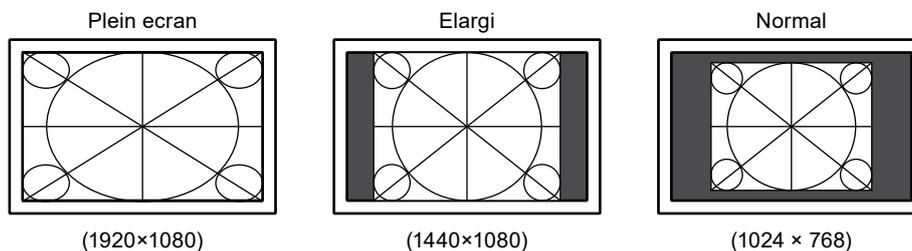

● Lissage

Lorsqu'une image est agrandie avec une résolution autre que celle recommandée (« Plein écran » ou « Elargi » est sélectionné pour « Taille »), les caractères ou les lignes de l'image affichée peuvent être flous. Cette fonction réduit l'effet de flou.


Plage de réglage

1 à 5



Remarque


- Le réglage du lissage n'est pas forcément nécessaire, en fonction de la résolution de l'affichage. (Vous ne pouvez pas choisir « Lissage ».)

● Ajustement analog.

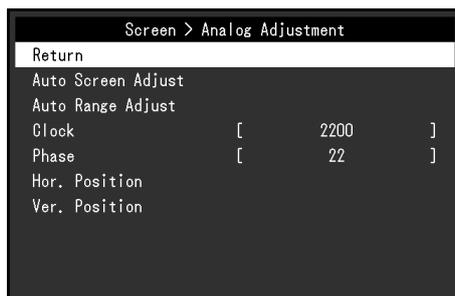


Le scintillement, la position et la taille de l'affichage peuvent être ajustés avec l'entrée de signal D-Sub.

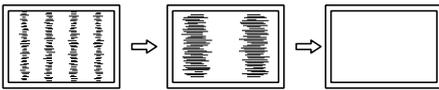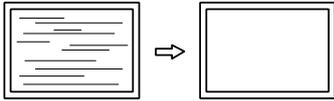Fonction	Description
Réglage écran auto	<p>Permet de régler le scintillement, la position et la taille de l'affichage automatiquement. La sélection de « Réglage écran auto » affiche un message. Sélectionnez « Oui » pour activer cette fonction.</p> <p>Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> La fonction d'ajustement automatique d'écran travaille correctement lorsqu'une image est entièrement affichée sur la totalité de la zone utilisable de l'écran. Elle ne fonctionne pas correctement dans les cas ci-dessous : <ul style="list-style-type: none"> Lorsqu'une image est affichée uniquement sur une partie de l'écran (fenêtre invite de commandes par exemple) Lorsqu'un fond noir (papier peint, etc.) est utilisé Ces fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement avec certaines cartes vidéo. Lorsqu'un signal entre dans le moniteur pour la première fois, ou lorsqu'une résolution ou une fréquence de balayage vertical/horizontal non encore utilisée est réglée, l'écran est automatiquement ajusté (uniquement pour les signaux ayant une résolution de 800 × 600 ou supérieure).
Réglage niveau auto	<p>Chaque palette de couleurs (0 à 255) peut être affichée en ajustant automatiquement le niveau de sortie du signal. La sélection de « Réglage niveau auto » affiche un message. Sélectionnez « Oui » pour activer cette fonction.</p>
Horloge	<p>Le scintillement des lignes verticales sur l'écran ou une partie de l'écran peut être réduit.</p>  <p>Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilisez ▲▼ pour effectuer des ajustements précis afin de n'omettre aucun point d'ajustement.
Phase	<p>Le scintillement et le flou sur la totalité de l'écran peuvent être réduits.</p>  <p>Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> En fonction de votre ordinateur ou de votre carte vidéo, le flou ou le scintillement ne seront pas forcément éliminés. Après le réglage, ajustez l'« Horloge » à nouveau si des barres verticales apparaissent.

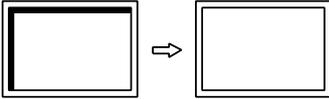Fonction	Description
Position Hor. Position Vert.	<p>La position d'affichage (horizontale et verticale) de l'écran peut être réglée.</p>  <p>Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> Etant donné que le nombre de pixels et les positions des pixels sont fixés sur le moniteur LCD, seule une position est fournie pour afficher correctement les images. Le réglage de la position sert à faire glisser une image à la position correcte.

4-4. Son

● Source

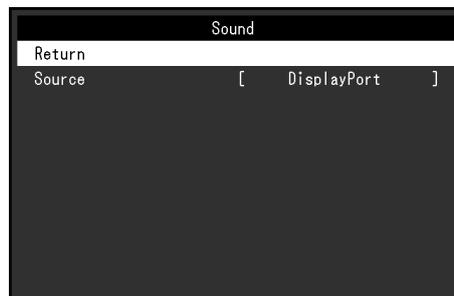


Cette fonction vous permet de modifier la source sonore lors de l'entrée du signal DisplayPort.

Réglages	Fonction
Miniprise stéréo	Permet de régler la voix connectée au connecteur d'entrée vocale analogique sur la source.
DisplayPort	Permet de régler la voix envoyée au signal vidéo via le câble DisplayPort sur la source.

Remarque

- Ce réglage est fixé sur « Miniprise stéréo » lors de l'entrée du signal DVI ou du signal D-Sub.

4-5. PowerManager

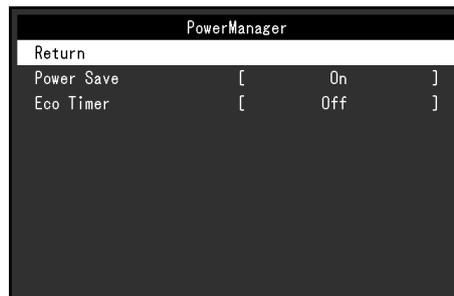

● Veille

Cette fonction vous permet de régler le moniteur en mode d'économie d'énergie selon l'état de l'ordinateur. Une fois que le moniteur est entré en mode d'économie d'énergie, aucune image ne s'affiche à l'écran.

Réglages	Fonction
Marche	Le moniteur peut passer en mode d'économie d'énergie par synchronisation en fonction de l'état du PC.
Arrêt	Le moniteur ne peut pas passer en mode d'économie d'énergie indépendamment de l'état du PC ou du signal d'entrée.

Remarque

- Quand vous n'utilisez pas le moniteur, vous pouvez arrêter l'alimentation secteur ou débrancher la fiche électrique afin de couper complètement l'alimentation.
- Le moniteur passe en mode veille environ 15 secondes après que l'entrée du signal cesse d'être détectée.
- Lorsque le moniteur est en mode d'économie d'énergie, les périphériques raccordés à l'écran tactile et port USB aval continuent de fonctionner.
- La consommation d'énergie varie, même si le câble de la miniprise stéréo est branché.


● Minuterie Eco

Cette fonction permet de régler la mise hors tension automatique du moniteur après un délai défini en mode d'économie d'énergie.

Plage de réglage

Arrêt / 0 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 45 min. / 1 / 2 / 3 / 4 / 5h

4-6. Réglages moniteur

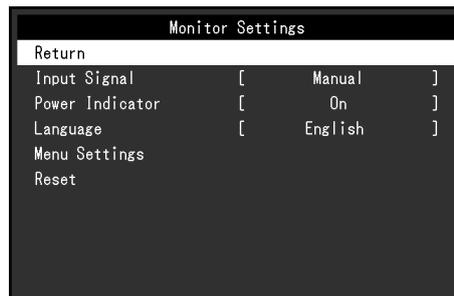

● Signal entrée

Réglages	Fonction
Auto	Le moniteur reconnaît automatiquement le connecteur à travers lequel les signaux sont entrés et il affiche l'écran. Lorsqu'un PC est mis hors tension ou passe en mode d'économie d'énergie, le moniteur affiche automatiquement un autre signal.
Manuel	Le moniteur affiche le signal du connecteur sélectionné, qu'un signal d'entrée soit émis ou non. Sélectionnez le signal d'entrée à afficher à l'aide de la touche  .

Remarque

- Si vous sélectionnez « Auto », le moniteur ne passe en mode d'économie d'énergie qu'une fois tous les PC en mode d'économie d'énergie ou hors tension.

● Voyant Tension

Cette fonction permet d'activer ou désactiver le Voyant Tension (bleu) lorsque le moniteur fonctionne.

Réglages	Fonction
Marche	Permet d'activer le témoin de fonctionnement.
Arrêt	Permet de maintenir le témoin de fonctionnement désactivé même si l'écran est affiché.

● Langues

Cette fonction vous permet de sélectionner la langue du menu Réglage et des messages.

Langues pouvant être sélectionnées

English / Deutsch / Français / Español / Italiano / Svenska / Japonais / Chinois simplifié / Chinois traditionnel

● Réglages du menu



Fonction	Plage de réglage	Description
Logo	Marche / Arrêt	Le logo EIZO apparaît à l'écran lors de la mise sous tension du moniteur. Lorsque cette fonction est définie sur « Arrêt », le logo EIZO n'apparaît pas.
Position du Menu	Centre / Haut droit / Bas droit / Bas gauche / Haut gauche	Vous pouvez modifier la position d'affichage du menu Réglage.

● Restaurer

Permet de restaurer tous les réglages sur leurs valeurs par défaut, excluant le réglage qui active ou désactive l'écran tactile.

Remarque

- Pour plus de détails concernant les réglages par défaut, voir « Principaux réglages par défaut » (page 36).

4-7. Informations

Les informations concernant le moniteur (nom du produit, numéro de série, durée d'utilisation, résolution et signal d'entrée) peuvent être vérifiées.

Exemple :



4-8. Touches de verrouillage du fonctionnement

Cette fonction vous permet de verrouiller les réglages afin d'en éviter toute modification.

Procédure


1. Appuyez sur  pour éteindre le moniteur.
2. Tout en maintenant enfoncée la touche , appuyez sur  pour allumer le moniteur.
Vous pouvez alterner entre la fonction de verrouillage et de déverrouillage en effectuant l'opération à l'étape 2.


Remarque

- Les fonctions suivantes sont disponibles même lorsque les touches sont verrouillées:
 - Mise hors tension ou sous tension du moniteur avec la touche d'alimentation

Chapitre 5 Dépannage

5-1. Aucune image

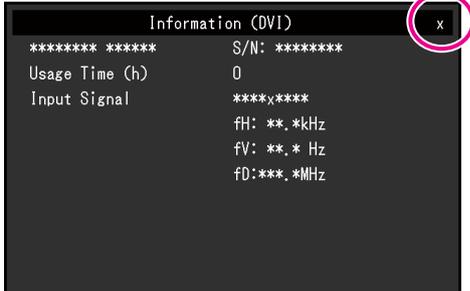Problème	Cause possible et solution
1. Aucune image <ul style="list-style-type: none">Le témoin de fonctionnement ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.Activez le commutateur d'alimentation principal.Appuyez sur .Coupez l'alimentation du moniteur, puis rétablissez-la quelques minutes plus tard.
<ul style="list-style-type: none">Le témoin de fonctionnement s'allume en bleu.	<ul style="list-style-type: none">Augmentez les valeurs de « Luminosité », « Contraste » ou « Gain » dans le menu Réglage (voir « 4-2. Couleur » (page 16)).
<ul style="list-style-type: none">Le témoin de fonctionnement est allumé en orange.	<ul style="list-style-type: none">Changez le signal d'entrée en appuyant sur .Déplacez la souris ou appuyez sur une touche du clavier.Effleurez la surface du panneau.Vérifiez si l'ordinateur est sous tension.En fonction du PC et de la carte graphique, le signal d'entrée n'est pas détecté et le moniteur ne récupère pas du mode économie d'énergie. Si l'écran n'est pas affiché même après le déplacement de la souris ou la pression d'une touche du clavier, arrêtez le moniteur et remettez-le en marche en appuyant sur le bouton marche. Lorsque l'écran s'affiche, exécutez la procédure suivante. Le problème pourrait être résolu.<ol style="list-style-type: none">Appuyez sur  pour éteindre le moniteur.Tout en maintenant enfoncée la touche , appuyez sur  pour allumer le moniteur. « x » s'affiche sur le titre du menu d' « Informations » du menu Réglage (voir « 4-7. Informations » (page 24)). Redémarrez le PC. Pour revenir au réglage précédent, effectuez à nouveau les étapes 1 à 3.
<ul style="list-style-type: none">Le témoin de fonctionnement clignote en orange.	<ul style="list-style-type: none">Ce problème risque de survenir lorsqu'un ordinateur est connecté via le connecteur DisplayPort. Connectez-le à l'aide du câble de transmission spécifié par EIZO, éteignez le moniteur, puis allumez-le de nouveau.

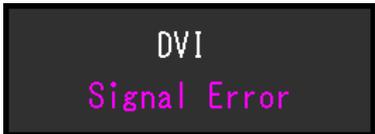Problème	Cause possible et solution
<p>2. Le message ci-dessous s'affiche.</p> <p>Exemple :</p> 	<p>Ce message s'affiche lorsque le signal n'entre pas correctement, même si le moniteur fonctionne correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le message illustré à gauche risque de s'afficher, étant donné que certains ordinateurs n'émettent pas de signal dès leur mise sous tension. • Vérifiez si l'ordinateur est sous tension. • Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. • Changez le signal d'entrée. • Coupez l'alimentation du moniteur sur la face arrière, puis rétablissez-la. • Vérifiez que l'ordinateur est configuré de façon à correspondre aux besoins du moniteur en matière de résolution et de fréquence de balayage vertical (voir « Résolutions compatibles » (page 35)). • Redémarrez le PC. • Sélectionnez un réglage approprié à l'aide de l'utilitaire de la carte vidéo. Pour obtenir plus d'informations, consultez le Manuel d'utilisation de la carte graphique.

5-2. Problèmes d'imagerie (analogique et numérique)

Problème	Cause possible et solution
<p>1. L'écran est trop lumineux ou trop sombre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez les fonctions « Luminosité » ou « Contraste » dans le menu Réglage pour régler ce problème. (Le rétro-éclairage du moniteur LCD a une durée de vie limitée. Lorsque l'écran s'assombrit ou scintille, consultez votre représentant local EIZO.)
<p>2. Les caractères sont flous.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'ordinateur est configuré de façon à correspondre aux besoins du moniteur en matière de résolution et de fréquence de balayage vertical (voir « Résolutions compatibles » (page 35)). • Lorsqu'une image est affichée avec une résolution autre que celle recommandée, les caractères ou les lignes de l'image affichée peuvent être flous. Utilisez « Lissage » et « Taille » dans le menu Réglage pour régler l'écran (voir « Lissage » (page 19) et « Taille » (page 19)).
<p>3. Des images rémanentes s'affichent.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les images rémanentes sont un problème propre aux moniteurs LCD. Évitez d'afficher la même image pendant trop longtemps. • Utilisez l'économiseur d'écran ou la fonction d'économie d'énergie pour éviter d'afficher la même image pendant une période prolongée.
<p>4. Des points verts / rouges / bleus / blancs ou des points défectueux restent affichés sur l'écran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • C'est une caractéristique du panneau LCD et non un défaut.
<p>5. Un moirage ou des marques de pression restent sur l'écran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Affichez une image unie de couleur noire ou blanche sur tout l'écran. Le problème peut être ainsi résolu.
<p>6. Des parasites apparaissent sur l'écran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dans le menu Réglage, configurez « Overdrive » sur « Arrêt » (voir « Overdrive » (page 18)). • Lorsque les signaux HDCP sont entrés, il est possible que les images normales ne s'affichent pas immédiatement à l'écran.

5-3. Problèmes d'imagerie (analogique uniquement)

Problème	Cause possible et solution
<p>1. La position d'affichage est incorrecte.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez la fonction « Position du menu » dans le menu Réglage pour corriger la position de l'image (voir « Position Hor. » (page 21)). Si le problème persiste, utilisez l'utilitaire de la carte vidéo, s'il est disponible, pour modifier la position d'affichage.
<p>2. Des barres verticales s'affichent à l'écran ou une partie de l'image scintille.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez la fonction « Horloge » du menu réglage pour régler ce problème (voir « Horloge » (page 20)).
<p>3. Tout l'écran scintille ou est flou.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez la fonction « Phase » du menu Réglage pour régler ce problème (voir « Phase » (page 20)).

5-4. Problèmes d'imagerie (numérique uniquement)

Problème	Cause possible et solution									
<p>1. (Pendant l'entrée de signal DisplayPort) Allumer ou éteindre l'alimentation ou sortir du mode d'économie d'énergie déplacera les fenêtres et les icônes. Dans un environnement multi-moniteur, lorsqu'on coupe l'alimentation d'un moniteur, les paramètres de l'écran passeront en affichage pour un moniteur unique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pour les prochaines étapes, désactivez la fonction « DP Power Save ». Le réglage de cette fonction sur « Arrêt » peut augmenter la consommation d'énergie. <ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur  pour mettre le moniteur hors tension. Maintenez enfoncée la touche  /  lorsque vous appuyez sur  pour mettre le moniteur sous tension. La fonction passe en mode « Arrêt » ou « Marche » chaque fois que cette opération est effectuée. L'état du réglage actuel peut être identifié en fonction de la couleur utilisée pour afficher le port d'entrée ou l'erreur de signal. <table border="1" data-bbox="737 1534 1431 1756"> <thead> <tr> <th>Réglage</th> <th>Port d'entrée</th> <th>Erreur de Signal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marche (réglage par défaut)</td> <td>DisplayPort</td> <td>DisplayPort Signal Error</td> </tr> <tr> <td>Arrêt</td> <td>DisplayPort</td> <td>DisplayPort Signal Error</td> </tr> </tbody> </table>	Réglage	Port d'entrée	Erreur de Signal	Marche (réglage par défaut)	DisplayPort	DisplayPort Signal Error	Arrêt	DisplayPort	DisplayPort Signal Error
Réglage	Port d'entrée	Erreur de Signal								
Marche (réglage par défaut)	DisplayPort	DisplayPort Signal Error								
Arrêt	DisplayPort	DisplayPort Signal Error								

5-5. Problèmes concernant l'écran tactile

Lorsque vous utilisez le pilote d'écran tactile dédié (fourni sur le CD-ROM), consultez également le Manuel d'utilisation du pilote d'écran tactile (fourni sur le CD-ROM).

Problème	Cause possible et solution
1. Le contrôle tactile est désactivé.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le moniteur et l'ordinateur sont branchés au moyen d'un câble USB.• Appuyez sur .• Vérifiez que le cordon d'alimentation du moniteur et de l'ordinateur est branché sur une prise secteur reliée à la terre. Le non-respect de cette consigne peut présenter des risques de dysfonctionnement.• Maintenez enfoncée la touche  (voir « 2-1. Activation ou désactivation de l'écran tactile » (page 10)).• Procédez au réglage de la sensibilité de l'écran tactile en utilisant le logiciel TPOffset.
2. La position du curseur n'est pas correcte. / Le curseur saute.	<ul style="list-style-type: none">• Connectez le moniteur à l'ordinateur à l'aide du câble indiqué dans le Guide d'installation. L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement si un adaptateur convertisseur est utilisé.• Éteignez et rallumez le moniteur.• Ajustez la position tactile.<ul style="list-style-type: none">- Lorsque vous utilisez le pilote d'écran tactile dédié, consultez également le Manuel d'utilisation du pilote d'écran tactile.- Lorsque vous utilisez le pilote standard Windows, configurez les réglages, en consultant « 3-2. Ajustement de la position tactile » (page 12).• Vérifiez que le cordon d'alimentation du moniteur et de l'ordinateur est branché sur une prise secteur reliée à la terre. Le non-respect de cette consigne peut présenter des risques de dysfonctionnement.• Maintenez enfoncée la touche .• Changer la position ou l'angle du moniteur peut provoquer un saut du curseur.• Éloignez tout métal de la surface de l'écran.• Si l'écran tactile est sale, ce dernier peut ne pas fonctionner correctement. Nettoyez l'écran tactile (voir « Nettoyage » (page 4)).• Un aérosol destiné à éviter l'électricité statique peut influencer la sensibilité de l'écran tactile.• Ne touchez pas l'écran tactile pendant 5 secondes après avoir démarré l'ordinateur, après avoir démarré le moniteur ou après avoir connecté le câble USB. Toucher trop rapidement l'écran tactile peut provoquer un positionnement incorrect du curseur ou désactiver le contrôle tactile. Dans ce cas, ne touchez pas l'écran tactile pendant 2 minutes environ ou éteignez le moniteur puis rallumez-le. Si l'erreur se reproduit, maintenez enfoncée la touche .• Procédez au réglage de la sensibilité de l'écran tactile en utilisant le logiciel TPOffset.• Changer la taille de l'écran du moniteur peut provoquer un désalignement de la position du curseur. Lorsque la taille d'écran est modifiée, ajustez la position tactile.• Lorsque la résolution d'affichage est différente de la résolution recommandée, la position tactile et la position du curseur peuvent changer en raison de la fonction de mise à l'échelle de la carte graphique. Dans ce cas, vérifiez les réglages du pilote graphique et modifiez la mise à l'échelle du moniteur. Après avoir modifié les réglages, rectifiez à nouveau la position tactile.

Problème	Cause possible et solution
<p>3. Le curseur n'apparaît pas à la position touchée mais il s'affiche à une position symétrique par rapport au centre de l'écran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustez la position tactile. <ul style="list-style-type: none"> - Lorsque vous utilisez le pilote d'écran tactile dédié, consultez également le Manuel d'utilisation du pilote d'écran tactile. - Lorsque vous utilisez le pilote standard Windows, configurez les réglages, en consultant « 3-2. Ajustement de la position tactile » (page 12).
<p>4. Le curseur est scintillant. / Les lignes tracées ne sont pas droites et régulières.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le cordon d'alimentation du moniteur et de l'ordinateur est branché sur une prise secteur reliée à la terre. Le non-respect de cette consigne peut présenter des risques de dysfonctionnement. • Procédez au réglage de la sensibilité de l'écran tactile en utilisant le logiciel TPOffset. • L'influence du métal peut provoquer un scintillement du curseur. • Lorsque plusieurs moniteurs sont placés à proximité les uns des autres, laissez de l'espace entre eux.
<p>5. La position tactile n'est pas réglée selon l'ajustement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous utilisez le pilote d'écran tactile dédié, consultez également le Manuel d'utilisation du pilote d'écran tactile. • Réinitialisez l'écran tactile sur l'état qui précédait le calibrage (en cliquant sur « Réinitialiser » dans l'onglet « Affichage » de la fenêtre « Paramètres du Tablet PC » accessible depuis le Panneau de configuration de Windows), puis ajustez la position tactile (voir « 3-2. Ajustement de la position tactile » (page 12)). • Une fois que « Configurer » est terminé dans l'onglet « Affichage » de la fenêtre « Paramètres du Tablet PC » accessible depuis le Panneau de configuration Windows, fermez « Paramètres du Tablet PC », puis ouvrez à nouveau l'onglet « Affichage » de « Paramètres du Tablet PC », puis ajustez la position tactile.
<p>6. Aucun son n'est émis au toucher.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous utilisez le pilote standard Windows, aucun son n'est émis au toucher. Lorsque vous souhaitez configurer l'émission de son au toucher, utilisez le pilote d'écran tactile dédié (voir « 3-1. Méthode de réglage de l'écran tactile » (page 12)). • Si aucun son n'est émis au toucher lorsque vous utilisez le pilote d'écran tactile dédié, consultez le Manuel d'utilisation du pilote d'écran tactile.
<p>7. La fonction multi-touch ne s'exécute pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Redémarrez le PC. • Lorsque vous utilisez le pilote d'écran tactile dédié, consultez également le Manuel d'utilisation du pilote d'écran tactile.

Attention

- Concernant les détails de TPOffset (logiciel permettant de régler la sensibilité de l'écran tactile), reportez-vous au manuel d'utilisation de TPOffset (sur le CD-ROM).

5-6. Autres problèmes

Problème	Cause possible et solution
1. Le menu Réglage ne s'affiche pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si la fonction de verrouillage est active (voir « 4-8. Touches de verrouillage du fonctionnement » (page 24)).
2. « Lissage » du menu Réglage « Ecran » est indisponible.	<ul style="list-style-type: none">• « Lissage » est indisponible lorsque l'écran est affiché selon les résolutions ou les réglages suivants.<ul style="list-style-type: none">- La résolution est de 1920 × 1080- La taille de l'écran est « Normal »
3. La fonction de réglage automatique ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Cette fonction est inopérante lorsqu'un signal numérique est entré.• Cette fonction fonctionne correctement lorsqu'une image est entièrement affichée sur la totalité de la zone utilisable de l'écran. Elle ne fonctionne pas correctement lorsqu'une image ne s'affiche que sur une partie de l'écran (fenêtre de commande, par exemple) ou lorsqu'un fond d'écran noir (papier peint, etc.) est utilisé.• Cette fonction ne fonctionne pas correctement avec certaines cartes vidéo.
4. Pas de sortie audio.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le câble de la miniprise stéréo est correctement branché.• Regardez si le volume est réglé sur 0.• Vérifiez les réglages de l'ordinateur et du logiciel audio.• Lors de l'entrée du signal DisplayPort, vérifiez le réglage « Source » (voir « Source » (page 21)).
5. Les périphériques USB raccordés au moniteur ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le câble USB est correctement branché.• Branchez le câble sur un autre port USB. Si votre PC ou les périphériques fonctionnent correctement après avoir changé de port USB, consultez votre représentant local EIZO (voir le manuel de l'ordinateur pour plus d'informations).• Redémarrez le PC.• Si les périphériques fonctionnent correctement lorsqu'ils sont raccordés directement au PC, consultez votre représentant local EIZO.• Assurez-vous que le PC et le système d'exploitation sont compatibles USB. (Pour la compatibilité USB de chaque appareil, veuillez contacter les fabricants respectifs.)• Vérifiez le réglage du BIOS pour la connexion USB si votre PC fonctionne sous Windows. (Consultez le manuel du PC pour plus d'informations.)

Chapitre 6 Référence

6-1. Fixation du bras en option

Un bras en option (ou un pied en option) peut être fixé en retirant la section du pied.

Attention

- Fixez le bras ou pied conformément aux instructions de son manuel d'utilisation.
- Branchez les câbles après avoir attaché le bras ou le pied.
- Une fois le pied retiré, ne le manipulez pas vers le haut ou le bas. Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.
- Le moniteur et le bras ou pied sont lourds. Vous pourriez vous blesser ou endommager le matériel en les laissant tomber.

Conditions d'installation




Lorsque vous utilisez le bras ou le pied d'un autre fabricant, assurez-vous d'abord des points suivants, puis choisissez-en un qui soit conforme au standard VESA.

- Espacement entre les trous de vis : 100 mm × 100 mm
- Epaisseur de la plaque : 2,6 mm
- Suffisamment solide pour supporter le poids du moniteur (à l'exception du pied) et les accessoires tels que les câbles.

Avant d'utiliser un bras ou un pied d'une autre marque, utilisez les vis décrites ci-dessous.

- Vis utilisées pour fixer le pied sur le moniteur

Lorsque vous fixez un bras ou un pied, les conditions d'installation sont les suivantes :

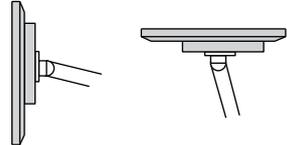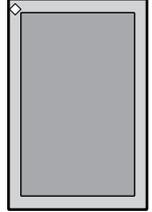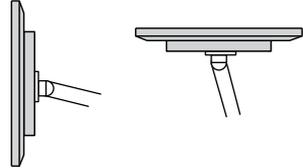	Orientation	Orientation de l'affichage
Paysage		 0° (avant) à 90° (vers le haut)
Portrait		 0° (avant) à 90° (vers le haut)

Procédure


1. Posez le moniteur LCD sur un tissu doux étalé sur une surface stable avec la surface de l'écran tournée vers le bas.

2. Retirez le pied.

En utilisant un tournevis, desserrez les vis fixant l'unité et le pied.

3. Fixez le bras ou le pied au moniteur.


Fixez le moniteur au bras ou pied à l'aide des vis spécifiées dans le manuel d'utilisation du bras ou pied.

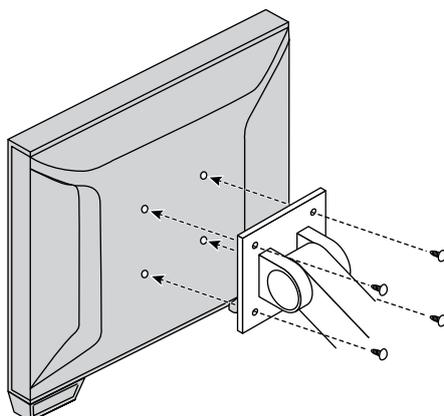


Remarque

- Lorsque le moniteur est réglé en orientation portrait, retirez les pieds de la partie inférieure du moniteur conformément à la procédure suivante.
- Conservez les pièces retirées dans un endroit sûr.

1. Retirez les caches des pieds.

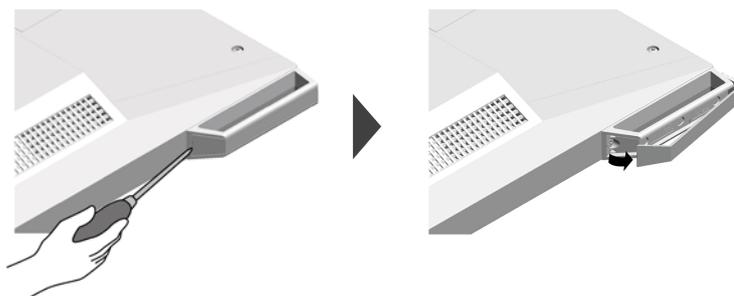

2. Retirez la vis qui fixe chaque pied au moniteur.

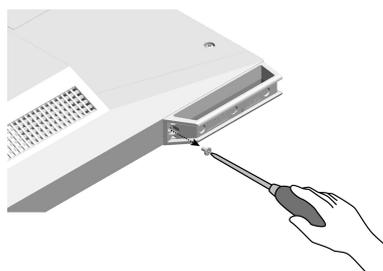

3. Faites glisser chaque pied vers le bord du moniteur et retirez-les comme illustré ci-dessous.


Pour couvrir le trou, appliquez le produit d'étanchéité fourni avec ce produit.



6-2. Raccordement de plusieurs PC

Le produit possède plusieurs connexions vers des PC et vous permet de passer à l'une des connexions pour l'affichage.

Exemples de branchement

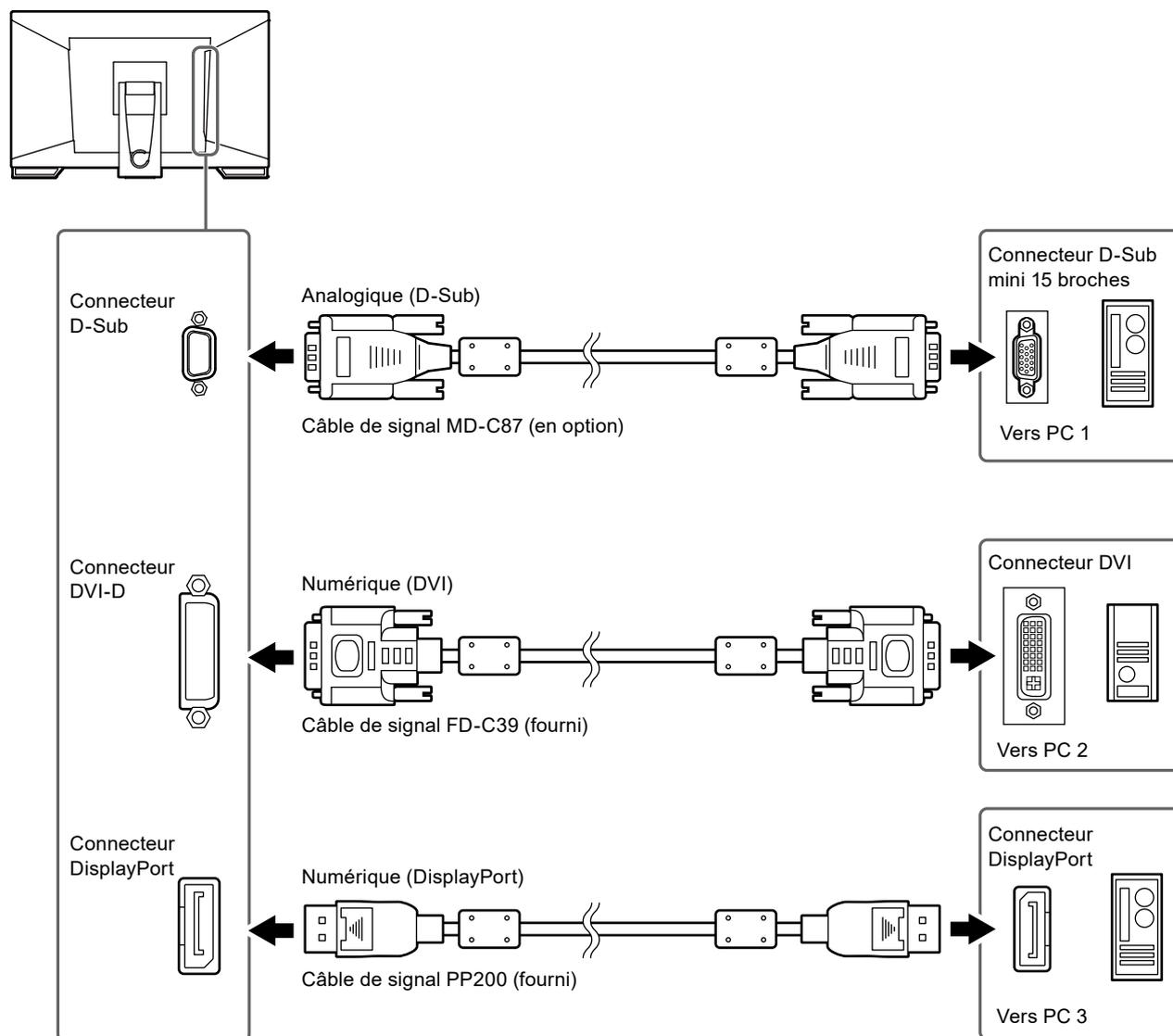

Attention

- L'écran tactile ne fonctionne qu'avec le moniteur connecté par USB.

6-3. Spécifications

Panneau LCD	Type	IPS		
	Rétroéclairage	LED		
	Taille	58,4 cm (23,0 pouces)		
	Résolution	1920 points × 1080 lignes		
	Taille de l'écran	509,2 mm × 286,4 mm (H x V)		
	Pas de pixels	0,265 mm		
	Couleurs d'affichage	Couleur 8 bits : 16,77 millions de couleurs		
	Angles de visionnage	178° / 178° (H / V, typique)		
Temps de réponse	Gris-à-gris : env. 6 ms (réglage Overdrive : Amélioré, typique)			
Ecran tactile	Traitement de la surface	Anti-reflet		
	Dureté de surface	5 H		
	Communication	Par USB		
	Méthode de détection	Technologie capacitive projetée		
	SE ²	Microsoft Windows 11 (64 bit) Microsoft Windows 10 (32 bit / 64 bit) Microsoft Windows 8.1 (32 bit / 64 bit) Microsoft Windows 7 (32 bit / 64 bit)		
	Nombre de points de toucher simultanés	Max. 10 points		
Signaux vidéo	Terminaux d'entrée	Numérique	DisplayPort × 1, DVI-D × 1 (compatible avec HDCP)	
		Analogique	D-Sub mini 15 broches	
	Fréquence de balayage numérique	Horizontale	DisplayPort	De 31 kHz à 68 kHz
			DVI	De 31 kHz à 64 kHz
		Verticale	De 59 Hz à 61 Hz (720 × 400 : de 69 Hz à 71 Hz)	
	Fréquence de balayage analogique	Horizontale	De 31 kHz à 81 kHz	
		Verticale	De 55 Hz à 76 Hz	
	Mode de synchronisation de trame	De 59 Hz à 61 Hz		
Fréquence de point (Max.)	Numérique	148,5 MHz		
	Analogique	148,5 MHz		
Port	USB	Port amont x 1		
		Port aval x 2		
	Standard	USB Specification Revision 2.0		
	Vitesse de transmission	480 Mbps (haute) / 12 Mbps (maxi) / 1,5 Mbps (bas)		
Alimentation courante	Port aval : 500 mA max. / 1 port			
Audio	Entrée	Terminal	Miniprise stéréo × 1 DisplayPort × 1 (partagé avec le signal vidéo) - Format : 2 canaux PCM linéaire (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz)	
	Sortie	Terminal	Miniprise stéréo × 1 (pour les écouteurs)	
		Haut-parleur	1,0 W + 1,0 W	
	Casque	2,0 mW + 2,0 mW		

Alimentation	Entrée	100 - 240 VCA ± 10 %, 50 Hz / 60 Hz 0,65 A - 0,35 A			
	Consommation électrique	Max.	42 W ou moins		
		Mode veille (économie d'énergie)	0,7 W ou moins	Uniquement entrée D-Sub connectée, pas de connexion USB, pas de connexion câble audio, « Réglages moniteur » - « Signal entrée » : « Auto »	
		Mode veille	0,7 W ou moins	Uniquement entrée D-Sub connectée, pas de connexion USB, pas de connexion câble audio	
Spécifications physiques	Dimensions externes (largeur \times hauteur \times profondeur)	Produit complet	Hauteur min.	556,7 mm \times 143,9 mm \times 401,3 mm (Inclinaison : 70°)	
			Hauteur max.	556,7 mm \times 353,9 mm \times 216,3 mm (Inclinaison : 15°)	
		Section moniteur		556,7 mm \times 339,2 mm \times 54 mm	
	Poids	Produit complet		6,6 kg	
		Section moniteur		6,0 kg	
	Inclinaison		De 15° à 70°		
Conditions ambiantes	Plage disponible	Température	De 5 °C à 35 °C		
		Humidité	De 20 % à 80 % H.R. (sans condensation)		
		Pression atmosphérique	De 540 hPa à 1060 hPa		
	Plage pour le transport / stockage	Température	De -20 °C à 60 °C		
		Humidité	De 10 % à 92 % H.R. (sans condensation)		
		Pression atmosphérique	De 200 hPa à 1060 hPa		

*1 L'assistance d'EIZO prendra fin en même temps que l'assistance du fournisseur du système d'exploitation.

● Résolutions compatibles

Entrée analogique (D-Sub)

Résolution	Fréquence de balayage vertical
640 \times 480	De 60 Hz à 75 Hz
720 \times 400	70 Hz
800 \times 600	De 56 Hz à 75 Hz
1024 \times 768	De 60 Hz à 75 Hz
1280 \times 720	60 Hz
1280 \times 960	60 Hz
1280 \times 1024	De 60 Hz à 75 Hz
1680 \times 1050	60 Hz
1920 \times 1080 *1	60 Hz

*1 Résolution recommandée

Entrée de signal numérique (DisplayPort / DVI-D)

Résolution	Fréquence de balayage vertical	DisplayPort	DVI-D
640 × 480	60 Hz	√	√
720 × 400	70 Hz	√	√
720 × 480	60 Hz	√	-
800 × 600	60 Hz	√	√
1024 × 768	60 Hz	√	√
1280 × 720	60 Hz	√	√
1280 × 960	60 Hz	√	√
1280 × 1024	60 Hz	√	√
1680 × 1050	60 Hz	√	√
1920 × 1080 *1	60 Hz	√	√

*1 Résolution recommandée

● Principaux réglages par défaut

Écran tactile	Activé
Mode couleur	User1
Taille	Plein écran
Lissage	3
Veille	Marche
Minuterie Eco	Arrêt
Langue	English
Position du Menu	Centre
Signal Entrée	Auto

● Accessoires

Crayon tactile	TP5
----------------	-----

Pour obtenir les toutes dernières informations relatives aux accessoires, consultez notre site Web.

www.eizoglobal.com

Annexe

Marque commerciale

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le logo DisplayPort Compliance et VESA sont des marques déposées de Video Electronics Standards Association.

Le logo SuperSpeed USB Trident est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.



DICOM est la marque déposée de la National Electrical Manufacturers Association pour les publications de ses normes liées à la communication numérique d'informations médicales.

Kensington et Microsaver sont des marques déposées d'ACCO Brands Corporation.

Thunderbolt est une marque commerciale d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays.

Apple, macOS, Mac OS, OS X, Macintosh et ColorSync sont des marques déposées d'Apple Inc.

EIZO, le logo EIZO, ColorEdge, CuratOR, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor et ScreenManager sont des marques déposées de EIZO Corporation au Japon et dans d'autres pays.

ColorEdge Tablet Controller, ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO Monitor Configurator, EIZO ScreenSlicer, G-Ignition, i•Sound, Quick Color Match, RadiLight, Re/Vue, Screen Administrator, Screen InStyle et UniColor Pro sont des marques déposées d'EIZO Corporation.

Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Droit d'auteur

L'utilisation des fonctions spécifiques, comme la modification de la taille de l'écran (par exemple, pour changer l'aspect horizontal et vertical des entrées d'image) dans un but commercial ou pour diffusion publique peut enfreindre les lois sur les droits d'auteur.

Déclaration de conformité à la FCC

For U.S.A., Canada Only

FCC Declaration of Conformity

We, the Responsible Party

EIZO Inc.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

Phone: (562) 431-5011

declare that the product

Trade name: EIZO

Model: DuraVision FDF2382WT

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- * Reorient or relocate the receiving antenna.
- * Increase the separation between the equipment and receiver.
- * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (enclosed)

Canadian Notice

This Class B information technology equipment complies with Canadian ICES-003.
Cet équipement informatique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTIE LIMITÉE

EIZO Corporation (ci-après dénommé « **EIZO** ») et les distributeurs autorisés par EIZO (ci-après dénommés « **Distributeurs** »), sous réserve et conformément aux termes de cette garantie limitée (ci-après dénommée « **Garantie** »), garantissent à l'acheteur initial (ci-après dénommé « **Acheteur initial** ») du produit spécifié dans la présente (ci-après dénommé « **Produit** ») acheté auprès d'EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses Distributeurs auront pour option de réparer ou remplacer gratuitement le Produit si l'Acheteur initial constate, pendant la Période de garantie (définie ci-dessous), qu'il y a un dysfonctionnement ou que le Produit a subi un dommage dans le cadre d'une utilisation normale du Produit conformément à la description du mode d'emploi qui accompagne le Produit (ci-après dénommé « **Manuel d'utilisation** »).

La période de cette Garantie est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du Produit (ci-après dénommée « **Période de Garantie** »). EIZO et ses Distributeurs déclinent toute responsabilité ou obligation concernant ce Produit face à l'Acheteur initial ou à toute autre personne à l'exception de celles stipulées dans la présente Garantie.

EIZO et ses Distributeurs cesseront de détenir ou conserver toutes les pièces (en excluant les pièces de conception) du produit à l'expiration de sept (7) années après que la production du Produit se soit arrêtée. Pour réparer le moniteur, EIZO et ses distributeurs utiliseront des pièces de rechange conformes à nos normes de contrôle qualité. Si l'unité ne peut pas être réparée en raison de son état ou de la rupture de stock d'une pièce adéquate, EIZO et ses Distributeurs peuvent proposer le remplacement par un produit aux performances équivalentes au lieu de le réparer.

La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les territoires où se trouvent les Distributeurs. La Garantie ne limite aucun des droits reconnus par la loi à l'Acheteur initial.

Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n'auront d'obligation dans le cadre de cette Garantie pour aucun des cas énumérés ci-dessous :

- (a) Tout défaut du Produit résultant de dommages occasionnés lors du transport, d'une modification, d'une altération, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte, d'un désastre, d'un entretien et/ou d'une réparation incorrects effectués par une personne autre que EIZO ou ses Distributeurs ;
- (b) Toute incompatibilité du Produit résultant d'améliorations techniques et/ou réglementations possibles ;
- (c) Toute détérioration du capteur ;
- (d) Tout défaut du Produit causé par un appareil externe ;
- (e) Tout défaut d'un Produit sur lequel le numéro de série original a été altéré ou supprimé ;
- (f) Toute détérioration normale du Produit, particulièrement celle des consommables, des accessoires et/ou des pièces reliées au Produit (touches, éléments pivotants, câbles, Manuel d'utilisation etc.) ;
- (g) Toute déformation, décoloration, et/ou gondolage de l'extérieur du Produit, y compris celle de la surface du panneau LCD ;
- (h) Tout défaut du Produit causé par le placement dans un endroit où il pourrait être affecté par de fortes vibrations ou chocs ;
- (i) Tout défaut du Produit causé par un écoulement du liquide contenu dans les piles, et
- (j) Toute détérioration des performances d'affichage causée par la détérioration des éléments consommables tels que le panneau LCD et/ou le rétroéclairage, etc. (par exemple des changements de luminosité, des changements de l'uniformité de la luminosité, des modifications de couleur, des changements de l'uniformité des couleurs, des défauts de pixels y compris des pixels brûlés, etc.).

Pour bénéficier d'un service dans le cadre de cette Garantie, l'Acheteur initial doit renvoyer le Produit port payé, dans son emballage d'origine ou tout autre emballage approprié offrant un degré de protection équivalent, au Distributeur local, et assumera la responsabilité des dommages et/ou perte possibles lors du transport. L'Acheteur initial doit présenter une preuve d'achat du Produit comprenant sa date d'achat pour bénéficier de ce service dans le cadre de la Garantie.

La Période de garantie pour tout Produit remplacé et/ou réparé dans le cadre de cette Garantie expirera à la fin de la Période de garantie initiale.

EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES DE DONNÉES OU D'AUTRES INFORMATIONS STOCKÉES DANS UN MÉDIA QUELCONQUE OU UNE AUTRE PARTIE DU PRODUIT RENVOYÉ À EIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR RÉPARATION.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, N'EST OFFERTE PAR EIZO ET SES DISTRIBUTEURS CONCERNANT LE PRODUIT ET SES QUALITÉS, PERFORMANCES, QUALITÉ MARCHANDE OU ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES FORTUITS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INDUITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE PERTE DE PROFIT, D'UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, D'UNE PERTE DE DONNÉES COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE MANQUE À GAGNER) RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU AYANT UN RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE PRODUIT, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UN TORT, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, MÊME SI EIZO OU SES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE RESPONSABILITÉ QUI POURRAIT ÊTRE SOULEVÉE LORS DES RÉCLAMATIONS D'UN TIERS CONTRE L'ACHETEUR INITIAL. L'ESSENCE DE CETTE CLAUSE EST DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ POTENTIELLE DE EIZO ET DE SES DISTRIBUTEURS RÉSULTANT DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ET/OU DES VENTES.

Informations sur le recyclage

Recycling Information

This product, when disposed of, is supposed to be collected and recycled according to your country's legislation to reduce environmental burden. When you dispose of this product, please contact a distributor or an affiliate in your country.

The contact addressees are listed on the EIZO website below.

www.eizoglobal.com

For recycling information for customers in Switzerland, please refer to the following website.

www.swico.ch

Informationen zum Thema Recycling

Dieses Produkt muss gemäß den Vorschriften Ihres Landes zur Entlastung der Umwelt recyclet werden. Wenden Sie sich bei der Entsorgung dieses Produkts an einen Verteiler oder eine Tochtergesellschaft in Ihrem Land.

Die Adressen zur Kontaktaufnahme sind auf der unten angegebenen Website von EIZO aufgeführt.

www.eizoglobal.com

Kunden in der Schweiz entnehmen Informationen zum Recycling der folgenden Website:

www.swico.ch

Informations sur le recyclage

Ce produit doit être jeté aux points de collecte prévus à cet effet et recyclé conformément à la législation de votre pays, afin de réduire l'impact sur l'environnement. Lorsque vous jetez ce produit, veuillez contacter un distributeur ou une société affiliée de votre pays.

Les adresses des distributeurs sont répertoriées sur le site Web EIZO ci-dessous.

www.eizoglobal.com

Pour les clients en Suisse, veuillez consulter le site Web suivant afin d'obtenir des informations sur le recyclage.

www.swico.ch

Información sobre reciclaje

Este producto debe desecharse y reciclarse según la legislación del país para reducir el impacto medioambiental.

Cuando desee deshacerse de este producto, póngase en contacto con un distribuidor o una filial de su país.

Encontrará las direcciones de contacto en el sitio web de EIZO que se indica a continuación.

www.eizoglobal.com

Informazioni sul riciclaggio

Per lo smaltimento e il riciclaggio del presente prodotto, attenersi alle normative vigenti nel proprio paese per ridurre l'impatto ambientale. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un distributore o un affiliato presenti nel proprio paese.

Gli indirizzi sono elencati nel sito Web EIZO riportato di seguito.

www.eizoglobal.com

Per informazioni sul riciclaggio per i clienti in Svizzera, consultare il sito Web riportato di seguito.

www.swico.ch

Återvinningsinformation

När denna produkt kasseras ska den hanteras och återvinnas enligt landets föreskrifter för att reducera miljöpåverkan.

När du kasserar produkten ska du kontakta en distributör eller representant i ditt land.

Kontaktadresserna listas på EIZO-webbplatsen nedan.

www.eizoglobal.com

Πληροφορίες ανακύκλωσης

Το προϊόν αυτό, όταν απορρίπτεται, πρέπει να συλλέγεται και να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας έτσι ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Για να απορρίψετε το προϊόν, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο ή μια θυγατρική εταιρεία στη χώρα σας.

Οι διευθύνσεις επικοινωνίας αναγράφονται στην τοποθεσία web της EIZO παρακάτω.

www.eizoglobal.com

Сведения по утилизации

По истечении срока службы данного продукта его следует принести на сборный пункт и утилизировать в соответствии с действующими предписаниями в вашей стране, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Прежде чем выбросить данный продукт, обратитесь к дистрибьютору или в местное представительство компании в вашей стране.

Контактные адреса можно найти на веб-узле EIZO.

www.eizoglobal.com

Informatie over recycling

Wanneer u dit product wilt weggooien, moet het uit milieu-overwegingen worden verzameld en gerecycled volgens de betreffende wetgeving van uw land. Wanneer u dit product wilt weggooien, moet u contact opnemen met een distributeur of een partner in uw land.

De contactadressen worden vermeld op de volgende EIZO-website.

www.eizoglobal.com

Informação sobre reciclagem

Este produto, quando o deitar fora, deve ser recolhido e reciclado de acordo com a legislação do seu país para reduzir a poluição. Quando deitar fora este produto, contacte um distribuidor ou uma filial no seu país.

Os endereços de contacto estão listados no website do EIZO, abaixo.

www.eizoglobal.com

Oplysninger om genbrug

Dette produkt forventes ved bortskaffelse at blive indsamlet og genbrugt i overensstemmelse med lovgivningen i dit land for at reducere belastningen af miljøet. Når du bortskaffer denne produkt, skal du kontakte en distributør eller et tilknyttet selskab i dit land.

Adresserne på kontaktpersonerne er angivet på EIZO's websted nedenfor.

www.eizoglobal.com

Kierrätystä koskevia tietoja

Tuote tulee hävittää kierrättämällä maan lainsäädännön mukaisesti ympäristön kuormittumisen vähentämiseksi. Kun hävität tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai tytäryhtiöön maassasi.

Yhteystiedot löytyvät EIZOn Internet-sivustolta.

www.eizoglobal.com

Wykorzystanie surowców wtórnych

Ten produkt po zużyciu powinien być zbierany i przetwarzany zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Wyrzucając ten produkt, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub partnerem. Adresy kontaktowe można znaleźć we wskazanej poniżej witrynie internetowej firmy EIZO.

www.eizoglobal.com

Informace o recyklaci

Při likvidaci produktu musí být produkt vyzvednut a recyklován podle zákonů příslušné země, aby nedocházelo k zatěžování životního prostředí. Zbavujete-li se produktu, kontaktujte distributora nebo pobočku ve své zemi. Kontaktní adresy jsou uvedeny na následující webové stránce společnosti EIZO.

www.eizoglobal.com

Ringlussevõtu alane teave

Keskkonnakoormuse vähendamiseks tuleks kasutatud tooted kokku koguda ja võtta ringlusse vastavalt teie riigi seadustele. Kui kõrvaldate käesoleva toote, võtke palun ühendust turustaja või filiaaliga oma riigis.

Kontaktisikud on toodud EIZO veebilehel järgmisel aadressil:

www.eizoglobal.com

Újrahasznosítási információ

Jelen terméket, amikor eldobjuk, az illető ország törvényei alapján kell összegyűjteni és újrahasznosítani, hogy csökkentjük a környezet terhelését. Amikor ezt a terméket eldobja, kérjük lépjen kapcsolatba egy országon belüli forgalmazóval vagy társvállalkozással.

A kapcsolat címei az EIZO alábbi weboldalán található felsorolva:

www.eizoglobal.com

Podatki o recikliranju

Ob koncu uporabe odslužen izdelek izročite na zbirno mesto za recikliranje v skladu z okoljevarstveno zakonodajo vaše države. Prosimo, da se pri odstranjevanju izdelka obrnete na lokalnega distributerja ali podružnico.

Kontaktni naslovi so objavljeni na spodaj navedenih spletnih straneh EIZO:

www.eizoglobal.com

Informácie o recyklácii

Pri likvidácii musí byť tento výrobok recyklovaný v súlade s legislatívou vašej krajiny, aby sa znížilo zaťaženie životného prostredia. Keď sa chcete zbaviť tohto výrobku, kontaktujte prosím distribútora alebo pobočku vo vašej krajine.

Zoznam kontaktných adries je uvedený na nasledovnej webovej stránke firmy EIZO:

www.eizoglobal.com

Pārstrādes informācija

Utilizējot šo produktu, tā savākšana un pārstrāde veicama atbilstoši jūsu valsts likumdošanas prasībām attiecībā uz slodzes uz vidi samazināšanu. Lai veiktu šī produkta utilizāciju, sazinieties ar izplatītāju vai pārstāvniecību jūsu valstī. Kontaktadresses ir norādītas zemāk minētajā EIZO tīmekļa vietnē.

www.eizoglobal.com

Informacija apie gražinamąjį perdirbimą

Šalinant (išmetant) šiuos gaminius juos reikia surinkti ir perdirbti gražinamuoju būdu pagal jūsų šalies teisės aktus, siekiant sumažinti aplinkos teršimą. Kai reikia išmesti šį gaminį, kreipkitės į jūsų šalyje veikiančią gaminių pardavimo atstovybę arba jos filialą.

Kontaktiniai adresatai nurodyti EIZO interneto svetainėje.

www.eizoglobal.com

Информация относительно рециклиране

При изхвърлянето на този продукт се предлага събирането и рециклирането му съобразно законите на вашата страна за да се намали замърсяването на околната среда. Когато искате да се освободите от този продукт, моля свържете се с търговския му представител или със съответните органи отговарящи за това във вашата страна.

Данните за връзка с нас са описани на следния Интернет сайт на EIZO:

www.eizoglobal.com

Informație referitoare la reciclare

Acest produs, când debarasat, trebuie colectat și reciclat conform legislației țării respective ca să reducem sarcina mediului. Când se debarasează de acest produs, vă rugăm să contactați un distribuitor sau un afiliat al țării respective. Adresele de contact le găsiți pe pagina de web al EIZO:

www.eizoglobal.com

معلومات عن اعادة التدوير

عند التخلص من هذا المنتج، من الضروري تجميعه واعادة تدويره وفقاً للقوانين المتبعة في بلدك لتقليل العبء المسلط على البيئة. عندما تتخلص من هذا المنتج، يرجى الاتصال بموزع أو طرف منتسب إليه في بلدك. عناوين الاتصال مدرجة في موقع ايزو EIZO ادناه على شبكة الانترنت.

www.eizoglobal.com

Gerı Dönüşüm Bilgisi

Bu ürünün, atılacağı zaman, ülkenizin çevre kirliliğinin azaltılması konusundaki mevzuatına göre toplanması ve yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ürünü atacağınız zaman lütfen ülkenizdeki bir distribütör veya ilgili kuruluşla temasa geçiniz.

İrtibat adresleri aşağıdaki EIZO web sitesinde verilmiştir.

www.eizoglobal.com

